


Brukerhåndbok

TD Snap®

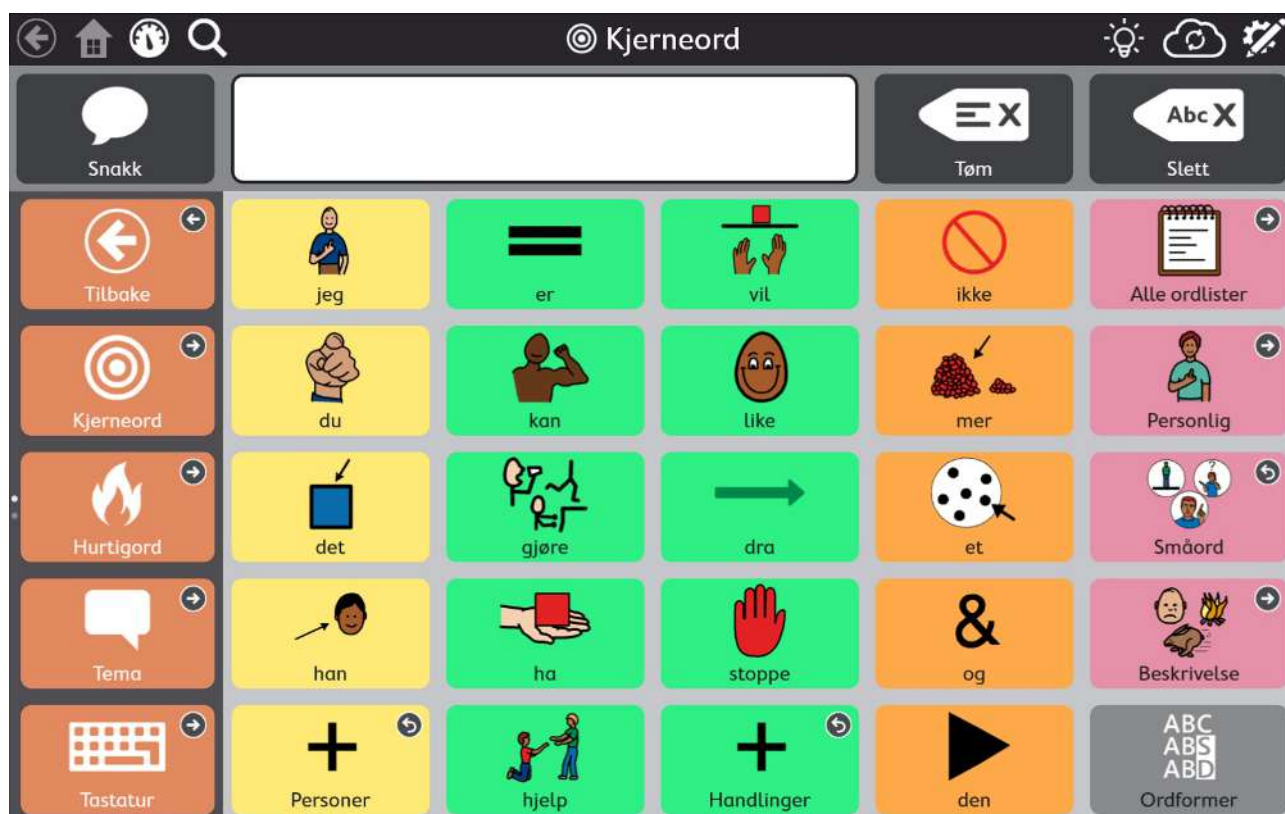

Brukerhåndbok

Versjon 1.36

2025-04-08

Med enerett.

Opphavsrett © Dynavox Group AB (publ)

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, lagres i en database eller deles i noen form eller på noen måte (elektronisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Den angitte opphavsretten inkluderer ethvert format og alle deler av det opphavsrettslig beskyttede materialet, og informasjon som måtte være tillatt under nåværende gjeldende lov eller heretter vedtatt, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som er basert på programvare som vises på skjermen, som skjermbilder, menyer, etc.

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Dynavox Group AB. Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Dynavox Group AB.

Produkter som refereres til i dette dokumentet kan være varemerker og/eller registrerte varemerker. Utgiver og forfatter har ikke krav på disse varemerkene.

Alle forholdsregler er tatt ved utarbeidelse av dette dokumentet, og utgiver og forfatter tar ikke ansvar for feil eller mangler, eller for skader som oppstår som resultat av bruk av informasjon i dette dokumentet, eller av bruk av programmer som eventuelt følger med. Utgiver og forfatter skal på ingen måte holdes ansvarlig for profittap eller andre kommersielle skader som oppstår eller påstås å oppstå direkte eller indirekte på grunn av dette dokumentet.

Innholdet kan endres uten varsel.

Se nettstedet til Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com for oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Kontaktinformasjon:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
215021 Kina

+86 512 69362880



Innholdsfortegnelse

1	Velkommen	9
1.1	Systemkrav	9
1.2	Støttede språk	10
1.3	Slik skaffer du deg TD Snap®	10
1.3.1	Kjøp talefunksjoner	10
2	Ressurser og støtte	11
2.1	Tobii Dynavox Pathways for Core First	11
2.2	Nettressurser og støtte	11
2.3	myTobiiDynavox	11
2.4	Opplæring	11
3	Kom i gang	12
3.1	Sett opp en ny bruker	12
3.2	Gjenopprett en eksisterende bruker	12
3.3	Velg et sidesett	12
3.3.1	Core First	12
3.3.2	Motorplan-sidesett*	13
3.3.3	Core First skanning-sidesett*	13
3.3.4	Tekst-sidesett*	14
3.3.5	Afasi-sidesett*	14
3.3.6	Express-sidesett*	14
3.4	Velg en rutenettstørrelse	14
4	Navigasjon	15
4.1	Skrivebordstilgang til øyestyring	15
5	Topplinjen	16
5.1	Tilbake	16
5.2	Hjem	16
5.3	Kontrollpanel	16
5.4	Søk	16
5.5	Partnervindu-indikator	17
5.6	Vokabularfilter	17
5.7	Datasporing	18
5.8	Synkroniser	18
5.9	Rediger	18
6	Meldingslinjen	19
6.1	Snakk	19
6.2	Meldingsvindu	19
6.2.1	Redigering av tekst i meldingsvinduet	19
6.3	Tøm	20
6.4	Slett	20

6.5	Angre	20
6.6	Gjør om	21
6.7	Chat	21
6.8	Kopier til knapp	21
6.9	Del.....	21
6.10	Pause tilgangsmåte	22
6.11	Vokabularfilter av/på (kun for motorplan-sidesett)	22
7	Verktøylinjen	23
7.1	Tilbake	23
7.2	Kjerneord	23
7.3	Hurtigord	24
7.4	Tema	24
	7.4.1 Temaord.....	24
	7.4.2 Støtte.....	24
7.5	Tastatur	26
7.6	Kontrollpanel	26
7.7	Ordformer.....	26
7.8	Støttet navigasjon	27
7.9	Gjeldende Boardmaker-aktivitet.....	27
7.10	abc (kun tysk).....	27
8	Vokabularfilter	28
8.1	Slå Vokabularfilter av eller på	28
8.2	Redigere en liste med vokabular	28
8.3	Velge en liste med vokabular.....	29
8.4	Opprette en ny liste med vokabular	29
8.5	Importere en liste med vokabular (.txt-fil).....	30
8.6	Dele listen med vokabular.....	30
8.7	Gi nytt navn til, duplisere eller slette en liste med vokabular	30
9	Redigering	31
9.1	Redigeringspanelet	31
9.2	Legg til en knapp.....	31
9.3	Flytt en knapp	32
9.4	Tilpass størrelsen på en knapp.....	32
9.5	Knappredigeringsverktøy	34
	9.5.1 Angre og Gjør om.....	35
	9.5.2 Kopier og Lim inn-knappen	35
	9.5.3 Velg alle knapper	35
	9.5.4 Velg flere knapper.....	35
	9.5.5 Rektangulær markering.....	36
	9.5.6 Skjul/Vis en knapp.....	36
	9.5.7 Sorter knapper alfabetisk	37
	9.5.8 Slette en knapp	37
	9.5.9 Utvid/legg ned navn på redigeringsverktøy.....	37

9.6	Knappeinnhold	38
9.6.1	Knappetikett	38
9.6.2	Aktivt innhold	38
9.6.3	Knappmelding	40
9.6.4	Audiosignal for knapp	41
9.6.5	Knappbilde	42
9.6.6	Rediger symbol	44
9.6.7	Knapptype	45
9.7	Knappehandlinger	46
9.7.1	Slett en Handling	50
9.7.2	Endre rekkefølge på Knapphandlinger	50
9.7.3	Tavle	50
9.7.4	AccessIT	51
9.7.5	Spill av Boardmaker-aktiviteter i TD Snap®	53
9.7.6	Spill av YouTube-videoer i TD Snap®	57
9.8	Knappestil	57
9.8.1	Knappebakgrunn	58
9.8.2	Knapperamme	58
9.8.3	Knappetikett	59
9.8.4	Knapputforming	60
9.8.5	Visning av lenke for knapp	60
9.9	Koble til side/Opprett ny side	61
9.9.1	Opprett en Koblingsknapp i en tom celle	61
9.9.2	Opprett en kobling fra en eksisterende knapp	62
9.9.3	Kobling til en Ny side/Opprett ny side	62
9.9.4	Kobling til eksisterende side	62
9.9.5	Kobling til en Ny kopi av en eksisterende side	62
9.9.6	Importer og koble til side	63
9.9.7	Besøk side	63
9.10	Tilgangsmåteinnstillinger for knapp	64
9.11	Språkregler for knapp	65
9.12	Suffiks og prefiks	65
9.13	Redigering av støtte	66
9.14	Fjernkontroller	66
9.14.1	Programmer en Fjernkontrollknapp	66
9.14.2	Bruk av fjernkontroller	66
9.15	Rediger side	67
9.15.1	Sidenavn	67
9.15.2	Sidesymbol	67
9.15.3	Språkregler for side	69
9.15.4	Rutenettstørrelse på side	70
9.15.5	Bakgrunnsfarge på side	70
9.15.6	Vis/Skjul Meldingslinje	71
9.15.7	Slett side	71
9.15.8	Importer/eksporter sider	71
9.16	Skanngrupper	71
9.16.1	Alternativer for skanngrupper	73
9.17	Rediger Meldingslinjen	73
9.17.1	Flytte og endre størrelse på objekter i Meldingslinjen	73
9.17.2	Legg til knapper i Meldingslinjen	73
9.17.3	Fjern knapper i Meldingslinjen	74
9.18	Rediger Verktøylinjen	74

9.19	Tilpassede farger	75
10	Sidesettninnstillinger	76
10.1	Sidesett	76
10.1.1	Velg sidesett.....	76
10.1.2	Opprett nytt sidesett.....	76
10.1.3	Gi nytt navn til Sidesett og Rediger beskrivelse.....	76
10.1.4	Slett sidesett.....	77
10.1.5	Angi Hjemmesiden	77
10.1.6	Angi Tastaturside	77
10.2	Rutenettstørrelse	77
10.3	Sidesettstil.....	78
10.3.1	Hudfarge og hårfarge for symbol	78
10.3.2	Skrifttype på knappetiketter i Sidesett.....	79
10.3.3	Skriftstørrelse på knappetiketter i Sidesett.....	79
10.3.4	Fet på knappetiketter i Sidesett.....	79
10.3.5	Knapputforming i Sidesett.....	79
10.3.6	Koblingsvisning i Sidesett	80
10.3.7	Rutenettmarg i Sidesett.....	81
10.3.8	Standard bakgrunnsfarger i Sidesett.....	81
10.3.9	Skrifttype for Meldingsvindu i Sidesett	81
10.3.10	Skriftstørrelse på Meldingsvindu i Sidesett	81
10.3.11	Tekstfarge for Meldingsvindu i Sidesett	82
10.3.12	Bakgrunnsfarge for meldingsvindu i Sidesett.....	82
10.3.13	Markeringsfarge for tale for meldingsvindu i Sidesett	82
10.3.14	Bakgrunnsfarge for meldingslinje i Sidesett	82
10.3.15	Navigasjonsknappens stil.....	82
10.4	Sidesettvalg	83
10.5	Tilpassbare knapper	83
10.6	Om Sidesett	84
10.6.1	Innstillinger for innholdsutvikler i Sidesett	84
11	Print	86
12	Google Assistant	87
12.1	Koble til Google-kontoen din	87
12.2	Oppsett av Google-enhetene dine	87
12.3	Språkstøtte for Google-assistenten	87
12.4	Snakk med Google-assistenten	88
13	Deling og lagring	90
13.1	Brukere	90
13.2	Sidesett.....	90
13.2.1	Importer et Sidesett.....	90
13.2.2	Lagre en kopi av et Sidesett.....	91
13.2.3	Del en kopi av et Sidesett (via myTobiiDynavox).....	91
13.2.4	Synkroniser sidesett.....	92
13.3	Sidebunter.....	94
13.3.1	Eksporter sidebunt	95
13.3.2	Importer Sidebunt.....	96
14	Brukerinnstillinger.....	97

14.1	Endre bruker	97
14.2	Opprett en ny bruker	97
14.3	Sikkerhetskopier en bruker	97
14.4	Gjenopprett en bruker	98
14.5	Rediger/Gi nytt navn til en bruker	99
14.6	Slett en bruker	100
14.7	Innlogging på myTobiiDynavox-konto	100
14.8	Stemme	100
14.8.1	Talestemme	100
14.8.2	Stemmehastighet	102
14.8.3	Stemmeleie	102
14.8.4	Uttaleunntak	102
14.9	Utgangsenhet for tale	103
14.10	Språkspesifikke stemmer	103
14.11	Google-konto	104
14.12	Brukervalg	104
14.12.1	Taleinnstillinger	104
14.12.2	Innstillinger for meldingsvindu	104
14.12.3	Prediksjonsinnstillinger	105
14.12.4	Tilbakestill ordprediksjon	105
14.12.5	Synkroniser-innstillinger	105
14.13	Tilgangsmåte	105
14.13.1	Angi Tilgangsmåte	106
14.13.2	Berøringsalternativer	106
14.13.3	Alternativer for Klikk ved berøring	107
14.13.4	Alternativer for Klikk ved slipp	108
14.13.5	Alternativer for Auditiv berøring	109
14.13.6	Alternativer for musedveling	110
14.13.7	Alternativer for øyestyring	111
14.13.8	Skanningsvalg	112
14.14	Datasporing	115
14.14.1	Overvåk knapp bruk	115
14.14.2	Vis topplinje-knapp	116
14.14.3	Vis brukstall for knapper	116
14.14.4	Vis modelleringstall	117
14.14.5	Administrer data	118

15 Systeminnstillinger 119

15.1	Valg	119
15.1.1	Passord	119
15.1.2	Skjerminnstilling (Kun Windows)	120
15.1.3	Språk for Redigeringsmodus	120
15.2	Enhet	120
15.2.1	Innstillinger for partnervindu	120
15.3	Butikk	120
15.3.1	Gjennomføre et kjøp (kun iPadOS)	120
15.3.2	Gjenopprett kjøp (kun for Windows)	121
15.3.3	Deaktiver nøkkel (kun for Windows)	121
15.4	Symbolsett	121
15.4.1	Søkeinnstillinger	121

	15.4.2	Installerte og nedlastbare symboler	121
	15.4.3	Endre rekkefølge på Symbolsett	122
15.5		Hjelp & opplæring	122
	15.5.1	Videoer	122
	15.5.2	Pathways for Core First.....	122
	15.5.3	Hurtigomvisning	122
	15.5.4	Ekstern hjelp	122
15.6		Om	122
	15.6.1	Send tilbakemelding	123
	15.6.2	Programvareoppdateringer	123

1 Velkommen



Illustrasjon 1: Snap Core First – Hurtigord

TD Snap® er det beste innen symbolbasert kommunikasjonsprogramvare for symbolstøttede kommunikatører. Den er utformet for å være den letteste å bruke, den mest intuitive, og den mest konsekvent oppsatte løsningen tilgjengelig på markedet, både for brukeren og for kommunikasjonspartneren. TD Snap® er den ideelle løsningen for personer med autisme, cerebral parese, Downs syndrom, psykisk utviklingshemming og afasi. Med TD Snap® gir vi deg den beste symbolbaserte kommunikasjonsopplevelsen som er tilgjengelig, kombinert med de nødvendige komponentene som gjør at en forelder, lærer eller terapeut kan jobbe sammen med brukerne for å hjelpe dem med å bli vellykkede kommunikatører.

1.1 Systemkrav

Tabell 1: Windows OS

	Operativsystem	Arkitektur	Minne	Berøring	Kamera
Minimum	Windows 10 versjon 1803	x64	2 GB	Ikke nødvendig	Ikke nødvendig
Anbefalt	Windows 10 Versjon 20H2	x64	4 GB	Integrert berøring	Integrert kamera

Tabell 2: iPadOS

	Operativsystem	Enhet	Kapasitet	Berøring	Kamera
Minimum	iPadOS 13	iPad Air 2 iPad Mini 4	32 GB	Integrert berøring	Ikke nødvendig
Anbefalt	iPadOS 17	iPad 8. generasjon	64 GB	Integrert berøring	Integrert kamera

1.2 Støttede språk

- Arabisk (SA)
- Kinesisk (forenklet)
- Tsjekkisk (CZ)
- Dansk (DK)
- Nederlandsk (NL)
- Engelsk (Australia)
- Engelsk (Canada)
- Engelsk (Storbritannia)
- Engelsk (USA)
- Finsk (FI)
- Fransk (CA)
- Fransk (FR)
- Tysk (DE)
- Tysk (Sveits)
- Hebraisk (IL)
- Islandsk (IS)
- Italiensk (IT)
- Japansk (JP)
- Norsk (NO)
- Portugisisk (BR)
- Portugisisk (PT)
- Spansk (ES)
- Spansk (Latin-Amerika)
- Spansk (US)
- Svensk (SE)
- Tyrkisk (TR)

1.3 Slik skaffer du deg TD Snap®

TD Snap® er tilgjengelig på Apple App Store for iPad og myTobiiDynavox.com for Windows-enheter. TD Snap® kommer forhåndsinstallert på Tobii Dynavox-taleenheter.

Talefunksjonalitet i TD Snap® er inkludert med Tobii Dynavox-taleenheter. Ved installering av TD Snap® på en enhet som ikke er produsert av Tobii Dynavox er alle ikke-talerelaterte funksjoner tilgjengelig gratis, inkludert noe innhold, oppretting og redigering av sider, brukeroppretting og -sikkerhetskopiering, gjenoppretting og Synkroniser; men talefunksjonalitet er begrenset. Full talefunksjonalitet kan kjøpes.

Talefunksjonalitet som er *deaktivert* i gratisversjonen av appen:

- Opplesing av meldingsvinduet
- Alle tale- eller opptaks-utdata generert av en knapp-handling
- Alle tale- eller opptaks-utdata generert av en adferdsstøtte
- Audiosignaler

Talefunksjonalitet som er *tilgjengelig* i gratisversjonen av appen:

- Lydopptak (i redigeringsmodus)
- Forhåndsvisning av lydopptak (i redigeringsmodus)
- Test stemme
- Forhåndsvisning av uttaleunntak (i redigeringsmodus)

1.3.1 Kjøp talefunksjoner

iPadOS – I TD Snap® går du til *Rediger > System > Butikk* for å kjøpe talefunksjonene i TD Snap® gjennom Apple App Store.

Windows - ring Tobii Dynavox kundestøtten for å kjøpe talefunksjonene i TD Snap®. <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

2 Ressurser og støtte

Tobii Dynavox tilbyr flere gratisressurser for å støtte og supplere din opplevelse med TD Snap®. Ikke gå glipp av disse verktøyene som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av din Tobii Dynavox-programvare!

2.1 Tobii Dynavox Pathways for Core First



Pathways for Core First er en gratisressurs som hjelper deg med å implementere Tobii Dynavox-produkter på de mest effektive måtene. Du vil få lære forskningsdrevne teknikker som maksimerer engasjement, brukervennlighet og mye mer!

Pathways for Core First følger deg mens du kommer igang med å bruke TD Snap® Core First, og oppmuntrer til vekst i engasjement, språk, samt lese- og skriveferdigheter. Pathways for Core First vil:

- gi en tydelig, skreddersydd rute for å komme igang.
- oppmuntre vekst for individer i alle aldre og ferdighetsnivåer.
- lære deg å utvikle ferdigheter innen en rekke områder, inkludert bruk av kjernevokabular, utvidelse av vokabular, bruk av TD Snap® Core First i daglige aktiviteter og mer.
- vise deg hvordan TD Snap® Core First kan bidra til sosiale ferdigheter og i sosiale situasjoner, slik som å håndtere kommunikasjonsbrudd, navigering og operasjonelle ferdigheter, og oppfordring til positiv adferd.
- bygge kommunikasjonspartner-ferdigheter med Top Tips.
- støtte pågående tilpasning av Core First.

Den fullstendige versjonen av Pathways for Core First er tilgjengelig som en [gratis app](#) for Windows eller iPadOS.

Pathways for Core First på nett er tilgjengelig via nettleseren din. Gå til <https://www.tobiidynavox.com/products/pathways-for-core-first?tab=1> for mer informasjon.

2.2 Nettressurser og støtte

Det første stedet du bør sjekke hvis du trenger hjelp, er opplærings- og støttedelen på Tobii Dynavox-nettsiden.

2.3 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox er din personlige nettlagringsside og delingsportal. Last opp dine sikkerhetskopierte brukerfiler til myTobiiDynavox for oppbevaring og for å dele med hele kommunikasjons-støtteteamet ditt.

Gå til www.myTobiiDynavox.com for å registrere deg for en gratis konto.

2.4 Opplæring



Læringscenteret er per i dag kun på engelsk.

Se tobiidynavox.com for dokumentasjon, opplæring og andre ressurser, inkludert:

- svar på ofte stilte spørsmål
- opplæringsvideoer
- opptak av nettseminarer
- nettkurs

3 Kom i gang

Når du starter TD Snap® for første gang vil du bli stilt noen spørsmål for å hjelpe til med å tilpasse programvaren til dine behov. Du kan endre alle disse innstillingene senere dersom du ønsker det.

3.1 Sett opp en ny bruker

Velg **Kom i gang**, så sørger vi for at du er klar på under et minutt!

3.2 Gjenopprett en eksisterende bruker

Bruk dette alternativet dersom du allerede har en sikkerhetskopierte brukerfil som du vil gjenopprette.

Gjenopprett en brukersikkerhetskopi fra myTobiiDynavox

1. Velg **Gjenopprett**.
2. Dersom du ikke allerede er logget inn på myTobiiDynavox taster du inn e-posten din og passordet ditt og velger deretter **Neste**.
3. Velg en brukersikkerhetskopi fra listen, og velg deretter **Neste**.

Gjenopprett en brukersikkerhetskopi fra en lokal fil


1. Velg **Gjenopprett**.
2. Velg **Gjenopprett fra en lokal fil**.
3. Bla gjennom og velg sikkerhetskopi-filen, og velg deretter **Åpne**.

3.3 Velg et sidesett

Veiviseren for brukeroppsett viser automatisk de sidesettene som stemmer med språkinnstillingene på din enhet, hvis det språket er tilgjengelig i TD Snap®. Velg **Språk** for å se de tilgjengelige sidesettene på andre språk.

3.3.1 Core First

Core First er det fremste sidesettet som er tilgjengelig i TD Snap®-programvaren. Det er utformet for å maksimere deltagelse, grunnleggende lese- og skriveferdigheter og utvikling gjennom et utvalg av kommunikasjonsverktøy som brukes sammen på en strukturert måte.

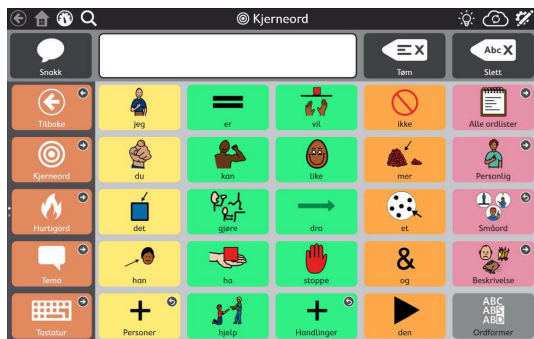

Illustrasjon 2: Core First-sidesett

Det definierende kjennetegnet ved Core First er kjerneordstrategien vår. Forskning, klinisk erfaring og brukertesting har formet:

- Ordvalg for maksimal bruk på tvers av omgivelser .
- Ord plassering og brukergrensesnitt.
- Rekkefølge for ordintroduksjon.
- Stabil plassering av ord idet andre systematisk legges til.
- Navigeringseffektivitet.
- Støtte for å lære brukere om betydningen av ord, og hvordan de kan kombineres for å skape unike ytringer.

Ytterligere kommunikasjonsverktøy inkludert i Core First inkluderer:

- Hurtigord – raske, forutsigbare ytringer som kan brukes alene eller i kombinasjon med hverandre.
- Tastatur – skriv inn bokstaver i Meldingsvinduet for å lage eller endre ord.
- Ordlister – organisert etter kategorier for enkelt oppslag.
- Temaer – støtt opp om interaksjoner i spesifikke omgivelser eller rundt spesielle temaer.
- Støtter – hjelp brukere med adferd og sosial kommunikasjon.
- Kontrollpanel – enkel tilgang til fjernkontroller, volumkontroller og mer!

Core First-sidesettet ble utformet for å være gullstandarden innen innhold for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og gir brukerne den mest tilgjengelige opplevelsen med å finne innhold raskt, og å ha den maksimale evnen til å opprette unike og spesifikke ytringer. Core First lar brukerne delta i raske samtaler i sanntid om de temaene som er viktigst for dem. Det gir dem også friheten til å skape nye ytringer som ville være vanskelig å forutse på forhånd. Ved å bevege seg gjennom de inkluderte verktøyene kan kommunikatører holde seg aktivt delaktig i situasjonen de deltar i og holde seg engasjert med kommunikasjonspartnere.

Utvikling av lese- og skriveferdigheter er en kritisk ferdighet som må være en del av enhver kommunikasjonsløsning. Ved bruk av tastaturer, enkle koblinger til forskningstestede programmer på enheten, og innhold utformet for å støtte kommunikasjonsmøter rundt leseerfaringer støtter Core First utvikling av lese- og skriveferdigheter for alle sine brukere.

Sist, men ikke minst er Core First ikke ment som et stasjonært- eller et én-størrelse-passer-alle-system. Kontinuitet på tvers av rutenettstørrelser er en primær ledesnor. Idet kommunikatører utvikler ferdigheter og trenger ytterligere alternativer for språkkompleksitet, legges disse nye alternativene sømløst til i Core First, og beholder innholdet på forutsigbare steder.

3.3.2 Motorplan-sidesett*

TD Snaps motorplan-sidesett legger vekt på språkutvikling og generativ språkproduksjon (si det du vil si, slik du vil si det). Brukere lærer særegne motoriske mønstre knyttet til hvert ord, noe som fører til automatikk over tid. Dette gjør at brukerne kan rette den kognitive innsatsen mot språk og kommunikasjon i stedet for navigering av programvare. Med verktøyet Vokabularfilter kan tilretteleggere ta for seg spesielle ord eller øke ordforrådet litt etter litt. Alle motorplan-sidesett har samme antall ord (omtrent 2700).



Illustrasjon 3: Startside for Motorplan 30-sidesettet.

De to hovedprinsippene for motorplan-sidesettet er konsekventhet og effektivitet.

Konsekvent atferd

- Starter alltid fra startsidene og går tilbake til startsidene automatisk etter at du har gjort et valg.
- Ord blir igjen på samme sted og vises kun én gang i sidesettet.

Effektivt

- Alle de 2700 ordene er innenfor 3 treff eller mindre.†
- De oftest brukte ordene er like ved startsidene.

Alternativene for utenettstørrelser for sidesett varierer fra språk til språk. Plassering 30 (5x6), plassering 40 (5x7) og plassering 66 (6x11)

* Ikke tilgjengelig på alle språk.

† Vokabularvalg krever i gjennomsnitt 2,3 treff på motorplan-sidesettet i plassering 30 og 2,0 treff på motorplan-sidesettet i plassering 66.

3.3.3 Core First skanning-sidesett*

I dette sidesettet er Core First-innholdet omarbeidet for enkel og effektiv bruk med Skanning som tilgangsmåte. De inkluderte Lær å skanne-sidene hjelper brukere med å bli komfortable med Skanning som tilgangsmåte.

Rutenettstørrelser for sidesett: 3x4, 6x4, 7x6, 9x8

* Ikke tilgjengelig på alle språk.

3.3.4 Tekst-sidesett*

Dette sidesettet er utformet for brukere som ikke er avhengige av symboler for å kommunisere. Tekst-sidesettet anbefales for kommunikatører med gode lese- og skriveferdigheter.

Rutenettstørrelser for sidesett: 7x10

* Ikke tilgjengelig på alle språk.

3.3.5 Afasi-sidesett*

Afasi-sidesettet er designet for brukere med afasi. Funksjoner inkluderer Tavlen, Temasider med valg mellom rutenett- eller visuell scene-oppsett, Kalender, Fotoalbum og sider for Google-assistenten og Alexa. Symbolene som brukes i Afasi-sidesettet passer for voksne brukere.

Rutenettstørrelser for sidesett: 6x5, 4x3, 3x3

* Ikke tilgjengelig på alle språk.

3.3.6 Express-sidesett*

TD Snap® Express-sidesettet ble designet med fokus på enkelhet og brukervennlighet, samtidig som det støtter bevegelse fremover i kommunikasjons- og språkferdigheter. Sidesettet har en intuitiv struktur og flyt, som minimerer læringskurven for brukere og gir mulighet for personalisering. TD Snap® Express gir ordforråd organisert i en enkel meny med temaer. Hvert tema eller kontekst inneholder vanlige setningsstartere, enkeltord og fullstendige meldinger. Den tilbyr en enkelt rutenettstørrelse på 18 knapper. Kompatibel med alle TD Snap®-støttede tilgangsmetoder, de større knappene gjør tilgangen enklere for brukeren og oppsettet enklere for kommunikasjonspartnerne.

Rutenettstørrelser for sidesett: 6x3

* Ikke tilgjengelig på alle språk.

3.4 Velg en rutenettstørrelse

Valg av rutenettstørrelse vil avhenge av flere faktorer: det viktigste er valgnøyaktighet, etterfulgt av visuelle- eller oppmerksomhetsbegrensninger. Dersom det er problemer med hastigheten eller nøyaktigheten av valg kan du begynne med en mindre rutenettstørrelse, slik at brukeren har større knapper å jobbe med. Det er enkelt å endre rutenettstørrelsen i Sidesett-innstillinger, så ikke vær bekymret for å finne den ideelle rutenettstørrelsen på første forsøk. Du kan øke eller minske rutenettstørrelsen basert på hvordan brukerens fysiske- eller språkferdigheter endrer seg.



Dersom du ønsker å vise Meldingslinjen og/eller Verktøylinjen må du velge en rutenettstørrelsen med minst 3 rader og 3 kolonner.

Tabell 3: Eksempler på rutenettstørrelser (ikke uttømmende)



2x3




3x4



6x6

4 Navigasjon

Les videre for å lære hvordan du navigerer deg gjennom innholdet i TD Snap®, og hvordan du finner alt du trenger for å kommunisere.

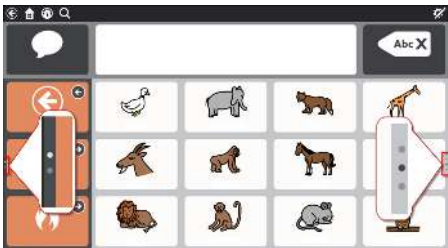Skrolling	Du kan skrolle opp og ned både i verktøylinjen og på siden. Sideindikatorene (prikker til venstre for verktøylinjen og til høyre for siden) viser deg når det er mer innhold tilgjengelig over eller under. Avhengig av dine innstillinger og tilgangsmåten skroller du ved å dra over berøringsskjermen eller ved å velge en navigeringsknapp. Se delen 14.13.2 <i>Berøringsalternativer</i> , side 106.	
Topplinje	Knappene på den venstre siden av topplinjen inkluderer en Tilbakeknapp, Hjemknapp, Kontrollpanel-knapp og en Søkeknapp. Se avsnittet 5 <i>Topplinjen</i> , side 16.	
Koblingsknapp	Koblingsknapper tar deg til en annen side. Se avsnittet 9.9 <i>Koble til side/Opprett ny side</i> , side 61.	
Besøksknapp	Besøksknapper tar deg til en annen side, lar deg gjøre ett valg på den siden, og tar deg så tilbake til den forrige siden automatisk. Se avsnittet 9.9.7 <i>Besøk side</i> , side 63.	
Tilbakeknapp	Tilbakeknappen fungerer som tilbake-knappen i en nettleser. Velg tilbakeknappen én gang for å gå til den forrige siden, eller flere ganger for å fortsette å gå bakover i sidehistorikken.	
Boardmaker-knapp	Boardmaker-knappen kobler til mapper og aktiviteter som er lagret i Boardmaker Online. Bla gjennom og spill av aktivitetene rett i TD Snap®! Se avsnittet 9.7.5 <i>Spill av Boardmaker-aktiviteter i TD Snap®</i> , side 53.	

4.1 Skrivebordstilgang til øyestyring

Brukere av øyestyring kan navigere mellom TD Snap® og andre programmer og funksjoner på enheten ved hjelp av skrivebordstilgang. Skrivebordstilgang gir deg tilgjengelighetsverktøyene du trenger for å bruke øyestyring på enheten din utenfor TD Snap®. På Windows-enheter brukes TD Control som løsning for skrivebordstilgang. På iPad-baserte enheter er skrivebordstilgang tilgjengelig gjennom AssistiveTouch-funksjonene i iPadOS. Følg instruksjonene for enheten din for å konfigurere løsningen for skrivebordstilgang før du starter skrivebordstilgang fra TD Snap®.

Det finnes to måter å opprette en knapp i TD Snap® på for å navigere bort fra TD Snap® og bruke skrivebordstilgang:

- Knapp med aktivt innhold-typen Status for skrivebordstilgang Se avsnittet 9.6.2 *Aktivt innhold*, side 38.
- Knapp med handlingen Veksle skrivebordstilgang Se avsnittet 9.7 *Knappehandlinger*, side 46.

5 Topplinjen

5.1 Tilbake



Tilbake-knappen tar deg til den forrige besøkte siden.

5.2 Hjem



Hjem-knappen tar deg til hjem-siden (den første siden du ser når du starter TD Snap®). Hjemknappen er en snarvei du kan bruke for å komme tilbake til hjemmesiden din fra hvor som helst i programvaren. For å endre hjemmesiden din, se 10.1.5 *Angi Hjemmesiden*, side 77.

5.3 Kontrollpanel



Bruk Instrumentpanel-knappen for å få rask tilgang til Instrumentpanel-siden din. Kontrollpanelet er en side for enkel tilgang til ofte brukte knapper, spesielt ikke-vokabular-knapper slik som volumkontroll eller fjernkontroller.

5.4 Søk




Søk er kun tilgjengelig med tilgangsmåten berøring, men den markerte banen til ordet kan følges ved å bruke hvilken som helst tilgangsmåte.




Søkeverktøyet viser deg hvor du finner et hvert ord i TD Snap®. Bare tast inn et søkeord og følg så de visuelle tilbakemeldingene. De visuelle tilbakemeldingene fører deg til målordet, slik at du kan finne ordet på egenhånd senere.



1. Klikk på **Søkeverktøyet** i topplinjen.
2. Angi et søkeord.

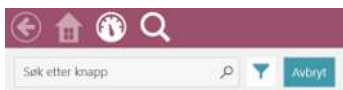

3. Om relevant velger du **Innstillinger for søkeknapp** for å avgrense innstillingene for søk (ikke tilgjengelig i motorplan-sidesett):
 - **Tillat dupliserte treff** – aktiver for å vise alle plasseringene av identiske knapper.
 - **Vis skjulte baner** – aktiver for å vise baner som bruker knapper som for øyeblikket er skjulte.
 - **Tilgjengelig søkebane** – aktiver for å gjøre den markerte banen til målnappen tilgjengelig med hvilken som helst tilgangsmåte.
4. Velg den knappen som du søker etter i søkeresultatene.
5. Velg den markerte knappen på hver side frem til du kommer til målnappen. Du må kanskje skrolle for å se den neste knappen, så se etter piler som forteller deg hvor du skal gå!

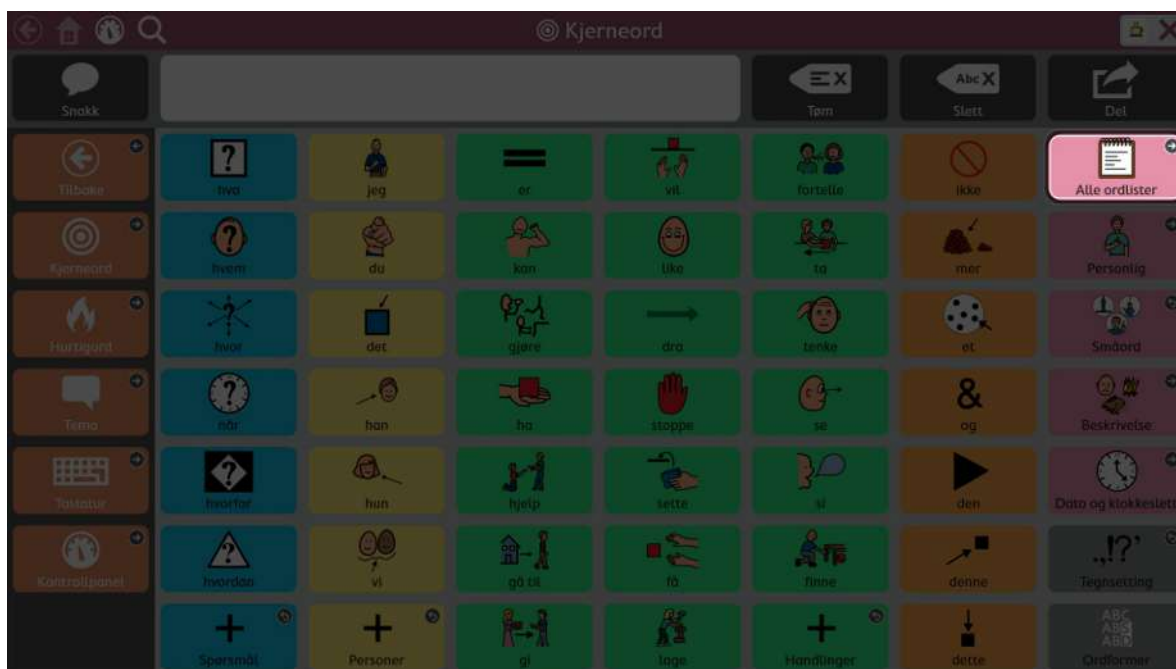

Følg med på hver markerte knapp slik at du kan huske veien på egenhånd neste gang.
Du kan avbryte søket når som helst ved å trykke hvor som helst utenfor den markerte veien.

5.5 Partnervindu-indikator



Partnervindu-indikatoren er kun tilgjengelig på Tobii Dynavox I-13-, I-16- og TD Pilot-enheter.

Partnervindu-indikatoren gir deg informasjon om statusen til partnervinduet på baksiden av enheten din.

Tabell 4: Indikatorstiler for partnervindu

Speil-stil – viser teksten som for øyeblikket er i partnervinduet.	
Ikon-stil – ikonet indikerer at partnervinduet er på. Ikonet vil ikke vises når partnervinduet er av.	

For å endre stilen på partnervindu-indikatoren, se avsnittet 15.2.1 Innstillinger for partnervindu, side 120.

5.6 Vokabularfilter



Vokabularfilter er bare tilgjengelig i motorplan-sidesettet.



Når Vokabularfilter er aktivert, begrenser det vokabularknappene i sidesettet til kun de som er spesifisert i den valgte listen med vokabular. Vokabular som ikke er i listen med vokabular, skjules. Se avsnittet 8 Vokabularfilter, side 28 for mer informasjon om Vokabularfilter.

5.7 Datasporing



Datasporing er kun tilgjengelig via berøring eller direkte museklikk.



Når den er aktivert gir Datasporing-knappen rask tilgang til de følgende innstillingene: Modelleringsmodus, Vis brukstallere for knapper, Vis modelleringstallere og Administrer data. For mer informasjon om datasporing, se *14.14 Datasporing, side 115*.

5.8 Synkroniser



Synkroniser er kun tilgjengelig via berøring eller direkte museklikk.



Synkroniser-knappen brukes for å begynne å dele et sidesett for synkronisering, eller for å oppdatere et sidesett som allerede deles for synkronisering. For mer informasjon om Synkronisering, se *13.2.4 Synkroniser sidesett, side 92*.

For å skjule Synkroniser-knappen i Bruksmodus, se avsnittet *14.12.5 Synkroniser-innstillinger, side 105*.

5.9 Rediger



Rediger er kun tilgjengelig via berøring eller direkte museklikk.



Velg Rediger-knappen for å gjøre endringer i sidesettet og for å få tilgang til Innstillinger.

For mer informasjon, se avsnittet *9 Redigering, side 31*.

6 Meldingslinjen

Meldingslinjen viser den komponerte meldingsteksten og knappene for å dele den med verden!

 Dersom du ønsker å vise Meldingslinjen må du velge en rutenettstørrelsen med minst 3 rader og 3 kolonner.



For å redigere meldingslinjen, se 9.17 Rediger Meldingslinjen, side 73.

6.1 Snakk



Velg denne knappen for å lese opp det nåværende innholdet i Meldingsvinduet.

 På Windows-enheter kan du bruke snarveien **Ctrl + Enter** på det fysiske tastaturet for å snakke i meldingsvinduet,

6.2 Meldingsvindu



Meldingsvinduet viser teksten som du ønsker å lese opp eller sende som en melding. Det kan også vise symboler. Du kan sende tekst til meldingsvinduet fra en knapp, skrive direkte i meldingsvinduet ved bruk av en tastaturside eller et fysisk tastatur, eller lime inn tekst fra systemets utklippstavle.

For Innstillinger for Meldingsvindu, se 14.12.2 Innstillinger for meldingsvindu, side 104.

6.2.1 Redigering av tekst i meldingsvinduet

Når du skriver inn tekst i meldingsvinduet, vises markøren på slutten av teksten som standard. For å flytte markøren i meldingsvinduet, bruker du knapper programmert med *Flytt markør*-handlingen.

Flytte på markøren i meldingsvinduet

- Bruk handlingen *Flytt markør* for å flytte markøren på følgende måter:
 - Flytt opp eller ned
 - Flytt fremover eller bakover tegn for tegn
 - Flytt fremover eller bakover ord for ord

- Flytt fremover eller bakover setning for setning
- Flytt til begynnelsen eller slutten av linjen
- Flytt til begynnelsen eller slutten av meldingsvindu-teksten
- Flytt opp eller ned én side med tekst

For å velge tekst, bruker du knapper programmert med *Velg tekst*-handlingen. Den valgte meldingsvindu-teksten kan slettes, formateres som fet eller kursiv, klippes ut eller kopieres, deles til en annen app, leses opp og mer. Se avsnittet om Meldingsvindu i 9.7 *Knappehandlinger*, side 46 for å lære mer om disse handlingene.

Velge tekst i meldingsvinduet

- Bruk handlingen *Velg tekst* for å velge tekst, flytte på det valgte området, eller utvide det valgte området på følgende måter:
 - Flytt valgte område opp eller ned
 - Flytt valgte område fremover eller bakover tegn for tegn
 - Flytt valgte område fremover eller bakover ord for ord
 - Flytt valgte område fremover eller bakover setning for setning
 - Utvid valgte område til begynnelsen eller slutten av linjen
 - Utvid valgte område til begynnelsen eller slutten av meldingsvindu-teksten
 - Utvid valgte område opp eller ned én side med tekst
 - Utvid valgte område opp eller ned
 - Utvid valgte område fremover eller bakover tegn for tegn
 - Utvid valgte område fremover eller bakover ord for ord
 - Utvid valgte område fremover eller bakover setning for setning
 - Velg alt
 - Avbryt valg



Den enkleste måten å redigere tekst i meldingsvinduet, er å bruke de forhåndsprogrammerte sidene for redigering av meldingsvindu. Disse sidene er inkludert i flere sidesett. Sidene for meldingsvindu-redigering er også tilgjengelige på Page Set Central. www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral

6.3 Tøm



Fjern alt innhold i meldingsvinduet.

6.4 Slett



Slett det gjeldende ordet eller den gjeldende valgte teksten i meldingsvinduet.

6.5 Angre



Angre den siste handlingen i meldingsvinduet.

6.6 Gjør om



Gjør om den siste angrede handlingen i meldingsvinduet.

6.7 Chat



Skru Chat av og på. Når du skruer på Chat vil det nåværende Meldingsvinduet bli mellomagret og så vil Meldingsvinduet bli tømt. Mens du er i chat kan du sette inn nytt innhold i meldingsvinduet og lese opp. Når Chat er skrudd av gjenopprettes det mellomagrede innholdet fra Meldingsvinduet slik at du kan fortsette der du slapp.

6.8 Kopier til knapp



Kopier teksten i meldingsvinduet, og legg den deretter til på en knapp. Dette er en brukertilgjengelig måte for å redigere knapper på farten!

6.9 Del



Bruk denne praktiske, brukertilgjengelige funksjonen til å sende tekst i meldingsvinduet til en AccessIT 3-enhet (9.7.4 *AccessIT, side 51*), til en knapp på den gjeldende siden (6.8 *Kopier til knapp, side 21*), til systemets utklippstavle, eller til Google-assistenten.

Velg Annet for å sende teksten i meldingsvinduet til en valgfri app (slik som e-post, Facebook, osv.).



Knappemenyen Annet er kun tilgjengelig via berøring.



Illustrasjon 4: Del-menyen

6.10 Pause tilgangsmåte



Stoppe eller starte tilgangsmåten midlertidig. Denne knappen fungerer bare med tilgangsmåtene for øyestyring, skanning og musedveling.

6.11 Vokabularfilter av/på (kun for motorplan-sidesett)



Slå Vokabularfilter av eller på. Denne knappen er kun tilgjengelig når du bruker et motorplan-sidesett.


7 Verktøylinjen

For å lære hvordan du redigerer verktøylinjen, se 9.18 Rediger Verktøylinjen, side 74.



Alternativene i verktøylinjen varierer avhengig av sidesettet ditt.


7.1 Tilbake

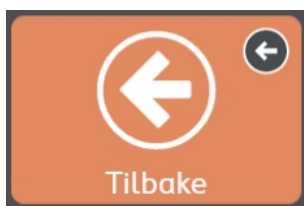

Illustrasjon 5: Tilbakeknapp – verktøylinje

Tilbakeknappen fungerer som tilbakeknappen i en nettleser. Bruk den for å gå tilbake til den forrige siden.

7.2 Kjerneord

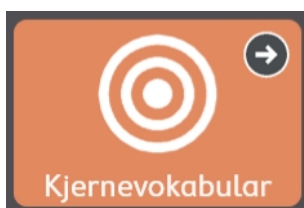

Illustrasjon 6: Kjernevokabular-knapp – Core First-verktøylinje

Denne knappen åpner Kjernevokabular-siden. Kjennetegnet for Core First er kjerneordstrategien vår, som ble utviklet basert på forskning, klinisk erfaring og brukertesting. Nøkkelfunksjoner i Kjernevokabular-siden inkluderer:

- Ordvalg for maksimal bruk på tvers av omgivelser .
- Ordplassering.
- Rekkefølge for ordintroduksjon.
- Stabil plassering av ord idet andre systematisk legges til.
- Navigeringseffektivitet.
- Støtter som lærer brukere meningen av ordene, og hvordan man kan kombinere dem for å skape unike meldinger.


7.3 Hurtigord



Illustrasjon 7: Hurtigord-knapp – verktøylinje

Hurtigord er raske, forutsigbare meldinger som kan brukes alene eller i kombinasjon med hverandre. De er små ord som kan holde samtaler i gang, be om oppmerksomhet, eller kommentere. I tillegg inkluderes ofte brukte beskjeder som fokuserer på Personlige behov, Hilsener, Sosialt, Følelser, Spørsmål og Reparasjoner. Hurtigord leses opp umiddelbart og settes ikke inn i Meldingsvinduet.


7.4 Tema

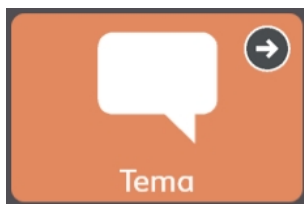

Illustrasjon 8: Temaknapp – verktøylinje

Temaer støtter opp om interaksjoner i spesifikke omgivelser eller rundt spesielle temaer. Velg et Tema fra Temasiden for å se relevante ord og fraser. Tilpass Sidesettet ditt ved å legge til dine egne temaer!

7.4.1 Temaord

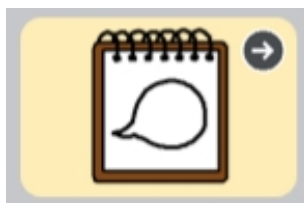


Disse sidene inneholder ofte brukte ord innen det valgte temaet.


7.4.2 Støtte



Støtte hjelper brukere med selvregulering og sosial kommunikasjon. Se avsnittet 9.13 *Redigering av støtte*, side 66 for mer informasjon om hvordan du redigerer støtte.

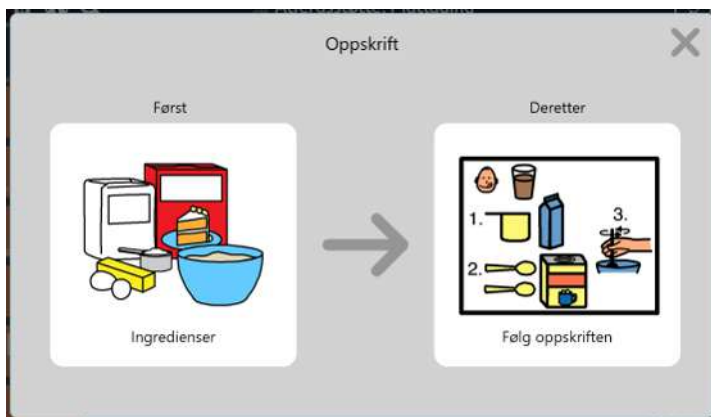

Illustrasjon 9: Først, deretter-støtte – Denne støtten viser en to-stegs sekvens av hendelser, som forsterker årsak og virkning eller logiske steg.

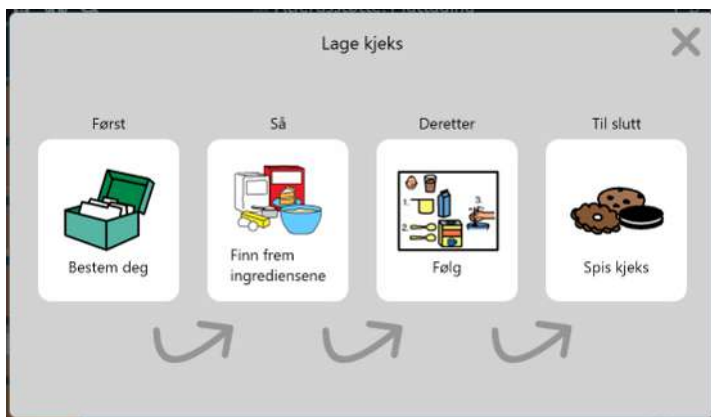

Illustrasjon 10: Miniplan-støtte – Miniplanen viser en flerstegs sekvens av hendelser, som forsterker konseptet om årsak og virkning, eller en rekke med logiske steg.

Matlaging

Jeg vil lage noe.

La meg se i kokeboken.

La oss lage dette!

Har vi alt vi trenger?

1 2 3 Jeg må se hva som er først.

Hjelp meg å samle det.

Illustrasjon 11: Manus-støtte – Et manus gir forhåndslagde fraser som er ofte brukt i forbindelse med et gitt tema. Manus brukes for å skape sosiale hendelsesforløp og for å hjelpe til med å modellere passende samtale.


Illustrasjon 12: Visuell timer-støtte – Timeren viser en nedtellingsklokke og en animert, farget søyle i Topplinjen. Nummerdisplayet teller ned den spesifiserte tiden og den fargede søylen trekker seg tilbake idet den gjenværende tiden blir mindre. Når Alarm-valget er aktivert vil en lyd spilles av når tiden er ute.

For å avbryte timeren velger du **X** på høyre side av topplinjen.



For å endre nedtellingstiden eller alarmvalget redigerer du knappen og velger Timer-handlingen.


7.5 Tastatur

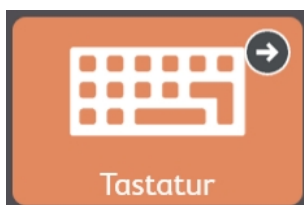

Illustrasjon 13: Tastaturknapp – verktøylinje

Tastatursiden gir individuelle tegnknapper som oppfører seg som tastene på et tastatur. Bruk denne siden for å komponere ord som for tiden ikke er tilgjengelige i Sidesettet ditt, eller for å legge til tegnsetting. For å angi din ønskede tastaturside, se *10.1.6 Angi Tastaturside, side 77*.

7.6 Kontrollpanel

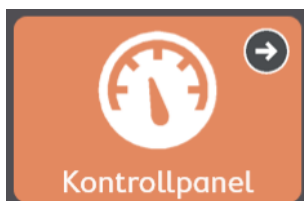

Illustrasjon 14: Kontrollpanel-knapp – verktøylinje

Kontrollpanelet er en side for enkel tilgang til ofte brukte knapper, spesielt ikke-vokabular-knapper slik som volumkontroll eller fjernkontroller.

7.7 Ordformer



Illustrasjon 15: Ordformer-knapp – Core First-verktøylinje

Ordformer-siden viser ulike former (tid, antall, etc.) av det siste ordet i Meldingsvinduet. Velg den ønskede ordformen for å oppdatere ordet i Meldingsvinduet.

7.8 Støttet navigasjon



Illustrasjon 16: Støttet navigasjon – Core First-verktøylinje

Støttet navigasjon-siden er hjem-siden for tidlig begynnende rutenettstørrelser (<3x3). Støttet navigasjon-knappen i verktøylinjen gjør siden tilgjengelig for alle rutenettstørrelser.

7.9 Gjeldende Boardmaker-aktivitet



Illustrasjon 17: Gjeldende Boardmaker-aktivitet – Core First-verktøylinje

Åpne Boardmaker-aktiviteten som for øyeblikket er i gang, om aktuelt. Denne knappen er inaktiv dersom ingen Boardmaker-aktivitet pågår. Knappens miniatyrbilde og etikett oppdateres for å gjenspeile den pågående Boardmaker-aktiviteten.

7.10 abc (kun tysk)



Denne knappen åpner ABC-vokabularområdet kjent fra «LiterAACy». Du vil finne mer enn 3600 ord fra kjerne- og utkantvokabular, sortert etter første og andre bokstav.

- ABC-området støtter læring og bruk av lese- og skriveferdigheter.
- Fonetisk tilbakemelding spilles av når en bokstav velges.
- Det er to versjoner av denne funksjonen, én som bruker store bokstaver, og én som bruker små bokstaver. Abc-knappen med små bokstaver er standard. For å bruke store bokstaver gjør du ABC-knappen (store bokstaver) i verktøylinjen synlig, og skjuler abc-knappen (små bokstaver). Se avsnittet 9.5.6 *Skjul/Vis en knapp*, side 36.

8 Vokabularfilter

 Vokabularfilter er bare tilgjengelig i motorplan-sidesettet.

Vokabularfilter er et verktøy som gjør at assistenten/hjelperen raskt kan endre hvilke ord som er tilgjengelige for brukeren. Når Vokabularfilter er aktivert, er det bare vokabularet i den aktive listen med vokabular som er tilgjengelig. Vokabular som ikke er i listen, skjules.

Du kan bruke Vokabularfilter til å gradvis øke brukerens ordforråd over tid: begynn med et lite antall ord og legg til flere etter hvert som brukeren blir tryggere på å bruke ASK og utvider ordforrådet sitt.

Vokabularfilter kan også brukes som en midlertidig mekanisme for å fokusere på bestemte ord under terapiøkter. Bruk en liste med vokabular i begynnelsen av en terapiøkt, med kun ordene for leksjonen eller aktiviteten. Når økten er over, deaktiverer du Vokabularfilter eller gir personen tilbake den større listen med vokabular.

8.1 Slå Vokabularfilter av eller på



1. Klikk på **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.
2. Sett Vokabularfilter-bryteren i topplinjen til PÅ eller AV.

 Navnet til den aktive listen med vokabular vises i topplinjen.



Vokabularfilter deaktivert



Vokabularfilter aktivert

8.2 Redigere en liste med vokabular

Det finnes flere måter å legge til og fjerne vokabular på i listen med vokabular.



1. Klikk på **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.
2. Endre listen med vokabular ved å bruke en av metodene nedenfor:



1.	Velg vokabularknappene på siden for å legge til eller fjerne dem fra listen.	3.	Velg Legg til raskt for å åpne et tekstfelt nederst på siden. Skriv inn vokabular atskilt med komma i tekstfeltet, og velg Legg til .
2.	Bruk knappene Fjern ... og Legg til ... for å gjøre endringer i større grupper med vokabular samtidig.	4.	Velg Rediger liste med vokabular -ikonet for å vise og redigere listen med vokabular som en alfabetisk, søkbar liste med tekst.



Knappene som vises i fullfarge er i listen med vokabular. Knappene som vises med grått overlegg er ikke i listen med vokabular.

En koblingsknapp blir tilgjengelig når en vokabularknapp på koblingssiden legges til i listen med vokabular. For eksempel vil koblingsknappen Mat og drikke være grå (ikke tilgjengelig) hvis det ikke finnes noe matvokabular i listen med vokabular. Hvis du legger til «pizza» i listen med vokabular, blir knappen Mat og drikke automatisk tilgjengelig.

8.3 Velge en liste med vokabular



1. Klikk på **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.



2. Velg **Rediger liste med vokabular**-ikonet.
3. Velg **Administrer liste**.
4. Velg en liste med vokabular. Den valgte listen er nå aktiv.

8.4 Opprette en ny liste med vokabular



1. Klikk på **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.



2. Velg **Rediger liste med vokabular**-ikonet.
3. Velg **Administrer liste**.
4. Velg **Ny Liste**.
5. Velg **Tom liste**.
6. Velg **Ferdig**.

8.5 Importere en liste med vokabular (.txt-fil)

1. Klikk på  **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.
2. Velg  **Rediger liste med vokabular**-ikonet.
3. Velg **Administrer liste**.
4. Velg **Ny Liste**.
5. Velg **Lokale filer**
6. Velg **Bla gjennom**.
7. Bla til .txt-filen, velg den og velg deretter **Apne**.
8. Angi et navn for listen med vokabular, og velg **Ferdig**.

8.6 Dele listen med vokabular

1. Klikk på  **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.
2. Velg  **Rediger liste med vokabular**-ikonet.
3. Velg **Administrer liste**.
4. Velg  **Mer**-knappen ved siden av listen du vil dele.
5. Velg **Del** og deretter en delingsmetode:
 - **Eksporter til fil** – lagre listen med vokabular som en .txt-fil.
 - **Kopier til utklippstavle** – kopier innholdet i listen med vokabular til utklippstavlen, slik at du kan lime den inn et annet sted (f.eks. i en e-post, et Word-dokument osv.)
 - **Annet** – del listen med vokabular rett til en annen app. Appene du kan velge mellom varierer avhengig av enhetens konfigurasjon.

8.7 Gi nytt navn til, duplisere eller slette en liste med vokabular

1. Klikk på  **Vokabularfilter**-knappen i topplinjen.
2. Velg  **Rediger liste med vokabular**-ikonet.
3. Velg **Administrer liste**.
4. Velg  **Mer**-knappen ved siden av listen du vil gi nytt navn til, duplisere eller slette.
5. Velg handlingen du vil utføre:
 - **Gi nytt navn** – skriv inn et nytt navn for listen med vokabular.
 - **Dupliser** – opprett en kopi av listen med vokabular.
 - **Slett** – slett listen med vokabular. Den aktive listen med vokabular (merket med en hake) kan ikke slettes.

9 Redigering

For å gjøre endringer på en knapp, en side, innstillinger eller brukere må programvaren være i Redigeringsmodus. Du



kan gå inn i Redigeringsmodus når som helst ved å velge

Rediger-knappen.




Rediger-knappen og Redigeringsmodus er kun tilgjengelig ved bruk av tilgangsmåten berøring.

Når du er i Redigeringsmodus kan du dobbelklikke på de fleste sideknapper for å se hvordan de oppfører seg i Bruksmodus.

9.1 Redigeringspanelet

Redigeringspanelet inneholder alle verktøyene og fanene for å gjøre endringer i Sidesettet ditt og programvaren.

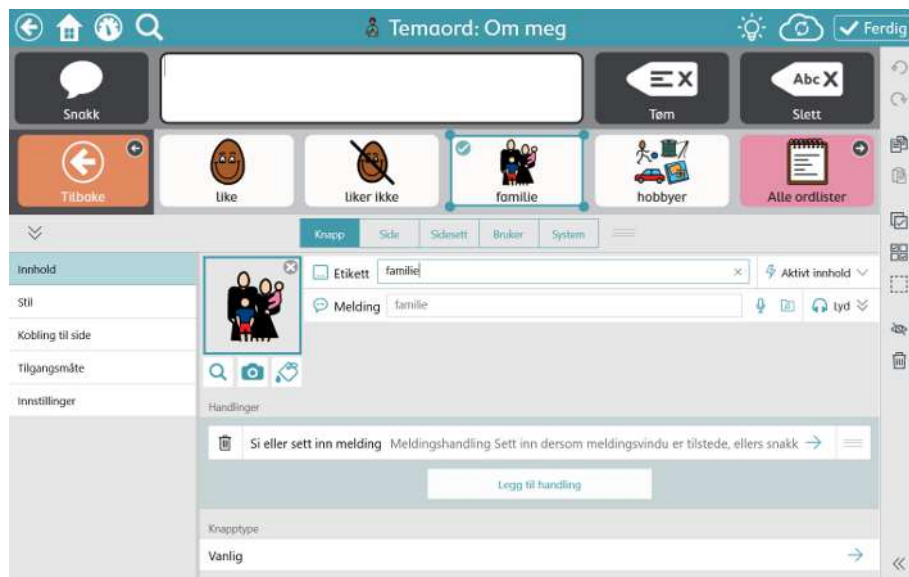

Illustrasjon 18: Redigeringspanelet (vist utvidet)



Velg

for å utvide Redigeringspanelet.



Tilpass Redigeringspanelet til en skreddersydd størrelse ved å dra utvidet.

opp eller ned mens panelet er

9.2 Legg til en knapp




1. Velg

Rediger-knappen.



2. Velg

i en hvilken som helst tom celle på siden for å lage en ny knapp.

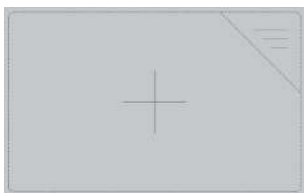


Illustrasjon 19: Tøm innhold

9.3 Flytt en knapp



Illustrasjon 20: Bytt – når du drar knappen direkte oppå en annen knapp, vil de to knappene bytte plassering på siden. Det sorte omrisset rundt den valgte plasseringen i rutenettet indikerer et bytte.

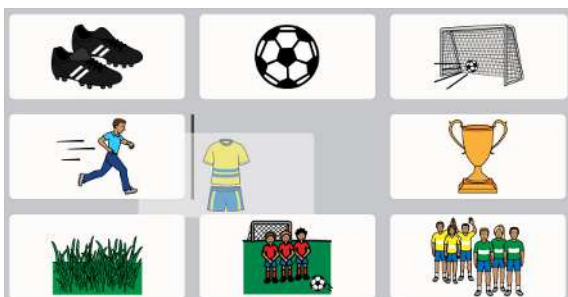

Illustrasjon 21: Sett inn – når du drar den valgte knappen mellom to knapper, vil knappene til høyre og nedenfor flytte seg bort for å lage plass der du kan legge den nye knappen. Knappene vil holde seg i venstre-til-høyre, topp-til-bunn-rekkefølge på siden. Sett inn knapp-plasseringen indikeres av en vertikal søyle.



Du kan sette inn en knapp horisontalt (som vist over) eller vertikalt.




Når du flytter en knapp, gjelder det kun den gjeldende rutenettstørrelsen.

9.4 Tilpass størrelsen på en knapp


Du kan endre størrelsen på en knapp slik at den opptar så mange rutenettceller av en Side- eller Verktøylinje-seksjon som du ønsker.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp på siden eller i verktøylinjen. Tilpasning av størrelsen på en knapp er kun tilgjengelig når en enkelt knapp er valgt.
3. Velg og hold på en av de blå prikkene i hjørnene av den valgte knappen, og dra deretter for å justere størrelsen.

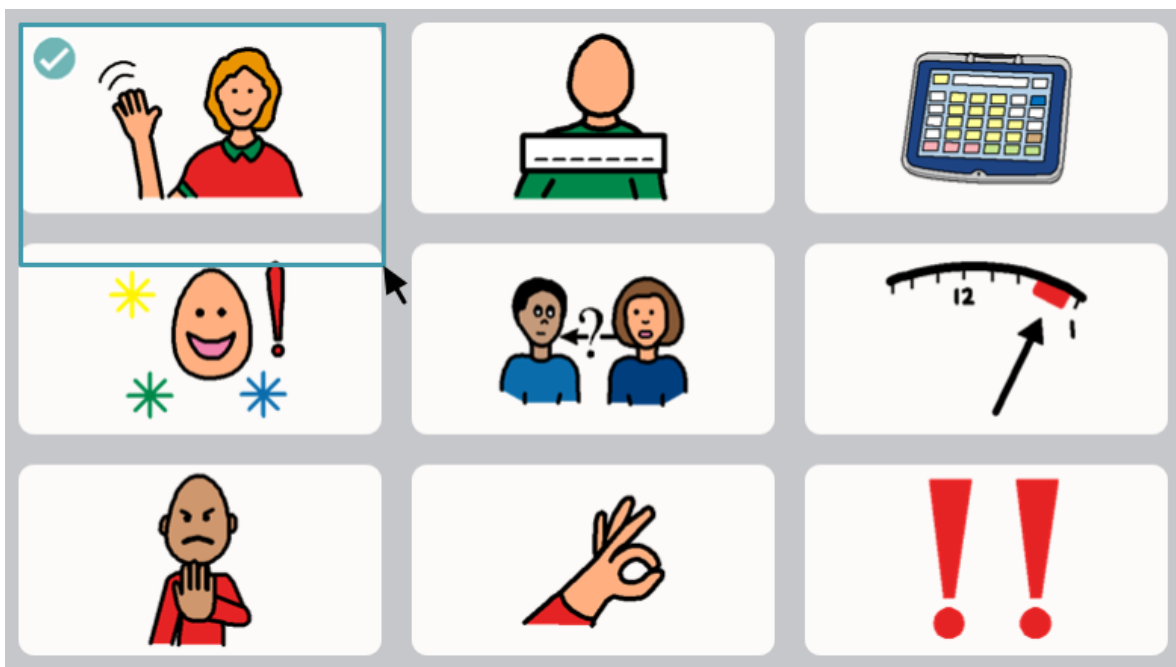

4. Vent på at knappen fyller cellene fullstendig frem til den er i ønsket størrelse, og slipp deretter valget. Når du gjør en knapp større, vil knappen(e) som forflyttes flytte seg til de(n) nærmeste tomme cellen(e).

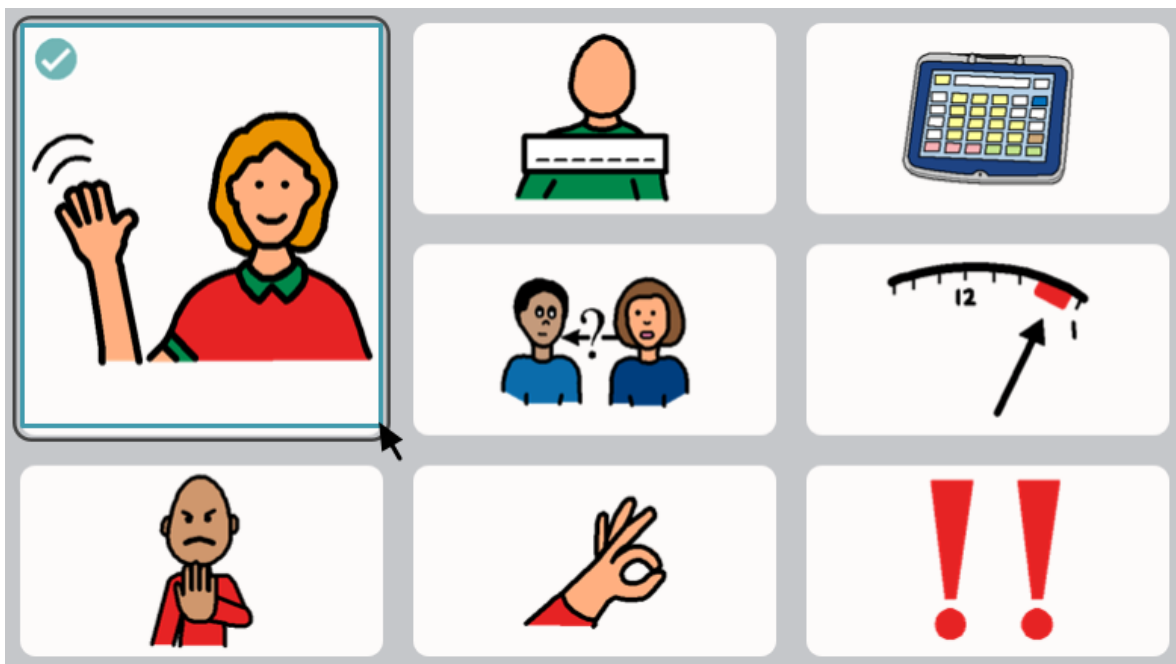

Knapper med tilpasset størrelse kan ikke gå ut over side-seksjoner eller verktøylinje-seksjoner.



Du kan ikke tilpasse størrelsen, eller flytte en knapp inn i en celle som inneholder en navigasjons-knapp (skrolle).



Når du endrer størrelsen på en knapp, gjelder det kun den gjeldende rutenettstørrelsen.

9.5 Knappredigeringsverktøy

Verktøyene du finner på høyre side av applikasjonsvinduet hjelper deg med å redigere den/de gjeldende valgte knappen(e).



Illustrasjon 22: Knappredigeringsverktøy – (fra nederst til øverst), Angre, Gjør om, Kopier, Lim inn, Velg alle, Flervalg, Rektangulær markering, Skjul/vis, Alfabetisk sortering, Slett en knapp, Utvid/legg ned verktøynavn

9.5.1 Angre og Gjør om

Angre-verktøyet  lar deg reversere opp til de siste 100 endringene du har gjort i den/det gjeldende brukeren/Sidesettet. Gjør om-verktøyet  vil gjøre om igjen den siste endringen du reverserte med Angre-verktøyet.



Angre-listen tilbakestilles når du laster inn en annen bruker, et annet sidesett, og når TD Snap®-programvaren lukkes.

9.5.2 Kopier og Lim inn-knappen



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg  **Kopier**-verktøyet.
Merk at Lim inn-verktøyet viser antallet knapper du har kopiert.
4. Velg  **Lim inn**-verktøyet.
Knappen vil limes inn på den første tilgjengelige tomme cellen på siden.

9.5.3 Velg alle knapper

Velg alle-verktøyet velger automatisk alle knappene på den gjeldende siden, slik at du kan utføre samlede redigeringsoppgaver.




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Knapp**-fanen.
3. Velg  **Velg alle**-verktøyet.
Etter du har brukt Velg alle kan du klikke på individuelle knapper for å oppheve valget av dem; de andre knappene vil forbli valgte.
4. Utfør de ønskede endringene på knappene.
5. For å oppheve valget av alle knapper velger du  **Flervalg**-verktøyet.

9.5.4 Velg flere knapper

Flervalg-verktøyet  lar deg velge flere knapper på én gang (manuelt), slik at du kan gjennomføre samlede redigeringsoppgaver.




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Knapp**-fanen.
3. Velg  **Flervalg**-verktøyet.
Flervalg-verktøyet er sort når det er deaktivert og blått når det er aktivert.
4. Velg de knappene du ønsker å redigere samtidig.
5. Utfør de ønskede endringene på knappene.
6. For å oppheve valget av alle knapper velger du  **Flervalg**-verktøyet.

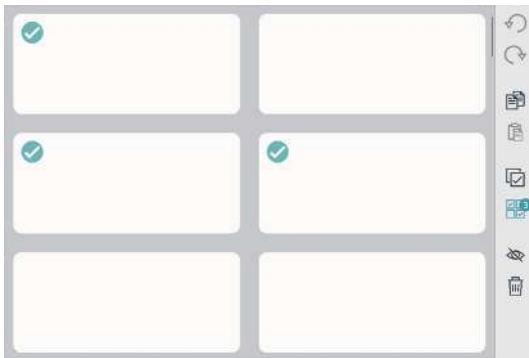

Illustrasjon 23: Flere valgte knapper – merk at Flervalg-verktøyet viser hvor mange knapper som er valgt.

9.5.5 Rektangulær markering

Verktøyet Rektangulær markering  er en enkel måte å velge flere knapper på. Bare klikk og dra for å tegne et rektangel rundt en eller flere knapper du ønsker å velge.

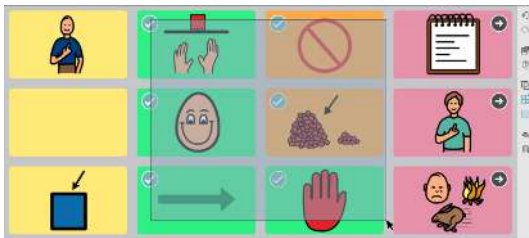

Illustrasjon 24: Bruk av Rektangulær markering – knapper trenger ikke å være fullstendig på innsiden av rektangelet for å bli markert.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Knapp**-fanen.
3. Velg  **Rektangulær markering**-verktøyet.
4. Klikk (eller berør), og dra diagonalt for å tegne et rektangel over alle knappene du ønsker å velge.
5. Utfør de ønskede endringene på de valgte knappene.
6. For å oppheve valget av alle knapper velger du  **Flervalg**-verktøyet.




Klikk på én og én knapp for å velge/oppheve valget av dem.

Knappevalg kan gjøres i Verktøylinjen eller på siden, men ikke på begge to samtidig.

9.5.6 Skjul/Vis en knapp

Knapper som er skjulte er ikke synlige i Bruksmodus. Knapper som for eksempel midlertidig er for avanserte eller distraherende kan skjules, og så vises igjen senere.

I Redigeringsmodus indikeres skjulte knapper med et grått overlegg.

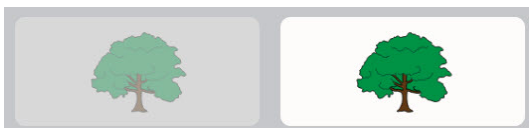

Illustrasjon 25: En skjult knapp ved siden av en synlig knapp, slik det sees i Redigeringsmodus.

9.5.6.1 Skjul



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp som du ønsker å skjule.
3. Velg **Skjul**-verktøyet.



Standardhandlingen for Skjul/vis-verktøyet er å angi synligheten på den knappen overalt hvor den vises i Sidesettet. For å angi synligheten kun for det valgte tilfellet av knappen, klikk og hold (langt trykk) på Skjul/vis-verktøyet og velg **Endre synlighet her**.

9.5.6.2 Vis



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en skjult knapp.
3. Velg **Vis**-verktøyet.



Standardhandlingen for Skjul/vis-verktøyet er å angi synligheten på den knappen overalt hvor den vises i Sidesettet. For å angi synligheten kun for det valgte tilfellet av knappen, klikk og hold (langt trykk) på Skjul/vis-verktøyet og velg **Endre synlighet her**.

9.5.7 Sorter knapper alfabetisk

Bruk knappen Alfabetisk sortering til å ordne de valgte knappene i alfabetisk rekkefølge. Knapper er sortert i følgende rekkefølge: alfabetisk etter etikett, så prediksjonsknapper, så tomme knapper.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Knapp**-fanen.
3. Bruk verktøyene **Flervalg** eller **Rektangulær markering** til å velge knappene du vil sortere.
4. Velg verktøyet **Alfabetisk sortering**.

9.5.8 Slette en knapp



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Slett**-verktøyet.

9.5.9 Utvid/legg ned navn på redigeringsverktøy

Velg de doble pilene for å vise navnene på redigeringsverktøyene. Velg de doble pilene igjen for å skjule verktøynavnene.

9.6 Knappeinnhold




Illustrasjon 26: Knapp med etikett, symbol, bakgrunnsfarge og medium kant.

9.6.1 Knappetikett

Knappetiketten er teksten som vises på en knapp.



1. Velg **Rediger-knappen**.
2. Velg en knapp.
3. Skriv inn i **Etikett**-tekstfeltet.

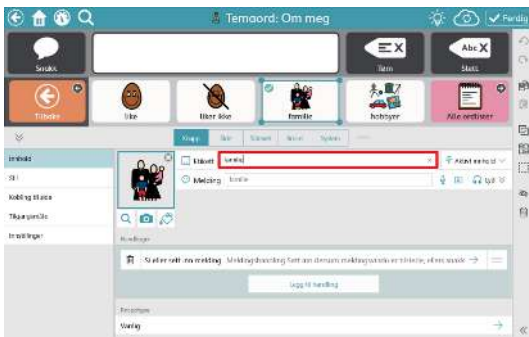

Illustrasjon 27: Tekstfelt for knappetikett


Dersom du ønsker å endre andre egenskaper ved etiketten (font, farge, plassering, størrelse, etc.), kan du se avsnittet [9.8.3 Knappetikett, side 59](#).

9.6.2 Aktivt innhold

Aktivt innhold lar deg vise dynamisk informasjon på en knapp. Knappetiketten og symbolet endrer seg for å reflektere den gjeldende statusen for informasjonen.



1. Velg **Rediger-knappen**.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Aktivt innhold**. (Kun tilgjengelig dersom **Knapptypen** er satt til **Vanlig**)
4. Velg en Aktivt innhold-type.

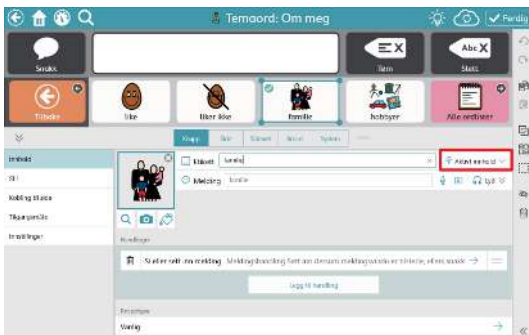

Illustrasjon 28: Aktivt innhold

Aktivt innhold-type	Beskrivelse
Ingen	Velg Ingen for å fjerne det aktive innholdet på knappen.
Tilgangsmåte	Viser den gjeldende tilgangsmåten.
Pausestatus for tilgangsmåte	Merk: Pausestatus for tilgangsmåte er kun gyldig for følgende tilgangsmåter: Øyestyring, Musedveling. Når andre tilgangsmåter er i bruk vil knapper som bruker det aktive innholdet Pausestatus for tilgangsmåte være deaktivert. Dersom handlingen Pausestatus for tilgangsmåte er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Start tilgang eller Pause tilgang. Dersom handlingen Pausestatus for tilgangsmåte ikke er tilstede på knappen, så vil etiketten vise tilgangsmåtens pausestilstand: Tilgang kjører eller Tilgang pauset.
Tilgangstid	Merk: Tilgangstid gjelder ikke for tilgangsmåten berøring. Viser tidsinnstillingen for den gjeldende tilgangsmåten. Den faktiske tidsinnstillingen varierer med tilgangsmåten, dvs. med holdetid, skanningshastighet, fokuseringstid etc. For mer informasjon, se avsnittet
Tilkoblingsstatus for AccessIT	Viser tilkoblingsstatusen for AccessIT 3-enheten: Frakoblet, Kobler fra, Kobler til eller Tilkoblet. Kan kobles sammen med handlingen Koble til AccessIT for å opprette en knapp som viser statusen, og når den er valgt, kobler seg til en AccessIT-enhet.
Batterinivå	Viser det nåværende batterinivået i prosent: 0–100%. Symbolet endrer seg for å reflektere batterinivået, og indikerer når enheten er koblet til strøm og lader.
Chat-modus	Dersom handlingen Chattemodus av/på er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Chat eller Stopp chat. Dersom handlingen Chattemodus av/på ikke er tilstede på knappen, så vil knappeetiketten vise den gjeldende statusen for chattemodus: Chattemodus på eller Chattemodus av.
Gjeldende Boardmaker-aktivitet	Viser tittelen og miniatyrbildet til Boardmaker-aktiviteten som pågår for øyeblikket (om aktuelt). Kan kobles sammen med handlingen Åpne gjeldende Boardmaker-aktivitet for å lage en knapp som åpner Boardmaker-aktiviteten som pågår, og som også viser tittelen og miniatyrbildet til aktiviteten.
Dato	Viser gjeldende dag, måned og år. Datoformatet angis av lokaliteten.
Ukedag	Viser gjeldende ukedag.
Status for skrivebordstilgang	Dersom handlingen Veksle skrivebordstilgang er til stede på knappen (standard), vil etiketten vise handlingen for knappen: Windows – start TD Control eller start Region Interaction. iPadOS – start AssistiveTouch eller start Region Interaction. Dersom handlingen Veksle skrivebordstilgang ikke er til stede på knappen, så vil knappeetiketten vise den nåværende modusen for øyestyring: Windows – TD Control på eller Region Interaction på. iPadOS – AssistiveTouch på eller Region Interaction på.
Dempingsstatus for tilbakemelding	Dersom handlingen Demp av/på er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Demp tilbakemeldingslyd eller Tilbakemeldingslyd på. Dersom handlingen Demp av/på ikke er tilstede på knappen, så vil knappeetiketten vise den gjeldende statusen for dempingen av tilbakemeldingslyden: Tilbakemeldingslyd dempet eller Tilbakemeldingslyd på.
Tilbakemeldingsvolum	Viser volumet for tilbakemeldingslyden: 0–100%. Kan kobles sammen med handlingen Skru opp volum for tilbakemeldingslyd eller handlingen Skru ned volum for tilbakemeldingslyd for å opprette en knapp som kontrollerer volumet og også viser lydnivået for tilbakemeldingslyden.
Lysstyrke for partnervindu	Kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheter. Viser partnervinduets lysstyrke i prosent: 0–100%. Kan kobles sammen med handlingen Lysstyrke for partnervindu opp eller Lysstyrke for partnervindu ned, for å lage en knapp som kontrollerer partnervinduets lysstyrke og i tillegg viser den gjeldende lysstyrken for partnervinduet.

Aktivt innhold-type	Beskrivelse
Status for partnervindu	Kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheter. Dersom handlingen Partnervindu av/på er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Slå partnervindu på eller Slå partnervindu av. Dersom handlingen Partnervindu av/på ikke er tilstede på knappen, så vil knappeetiketten vise den gjeldende Statusen for partnervindu: Partnervindu på eller Partnervindu av.
Talestatus	Dersom handlingen Les opp meldingsvindu er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Les opp eller Stopp. Dersom handlingen Les opp meldingsvindu ikke er tilstede på knappen, så vil knappeetiketten vise den gjeldende opplesingsstatusen: Opplesing eller Snakker ikke.
Dempingsstatus for tale	Dersom handlingen Demp tale av/på er tilstede på knappen (standard), så vil etiketten vise handlingen for knappen: Demp eller Lyd på. Dersom handlingen Demp tale av/på ikke er tilstede på knappen, så vil knappeetiketten vise den gjeldende statusen for dempingen av opplesingen: Dempet eller Ikke dempet.
Talevolum	Viser talevolumet: 0–100%. Kan kobles sammen med handlingen Talevolum opp eller handlingen Talevolum ned, for å opprette en knapp som kontrollerer volumet og også viser lydnivået for talen.
Tid	Viser den gjeldende systemtiden i timer og minutter. Tidsformatet avgjøres av regionsinnstillingene i operativsystemet. Merk: Symbolet er en generisk klokkeskive som ikke endrer seg med tiden.
Tilstand for Vokabularfilter	Dersom handlingen Vokabularfilter av/på er tilstede på knappen (standard), vil etiketten vise handlingen for knappen: Slå Vokabularfilter på eller slå Vokabularfilter av. Dersom handlingen Vokabularfilter av/på ikke er tilstede på knappen, vil knappeetiketten vise den gjeldende Vokabularfilter-statusen: av eller på.
År	Viser det inneværende året.

9.6.3 Knappmelding


Knappemeldingen kan være tekst, innspilt lyd eller en lydfil valgt fra enheten din. Om knappemeldingen er tekst, blir teksten lest opp og satt inn i meldingsvinduet ved valg av knappen. Hvis meldingsvinduet ikke er til stede, leses knappen Meldingstekst. Når knappemeldingen er en innspilt lyd- eller lydfil, legges knappeetiketten inn i meldingsvinduet og den innspilte lyd- eller lydfilen spilles av. Når meldingsvinduet leses, spilles den innspilte lyden eller lydfilen, og knappeetiketten leses ikke opp.

9.6.3.1 Endre knappemeldingstekst



Rediger-knappen.

1. Velg
2. Velg en knapp.
3. Skriv inn i **Melding**-tekstfeltet.

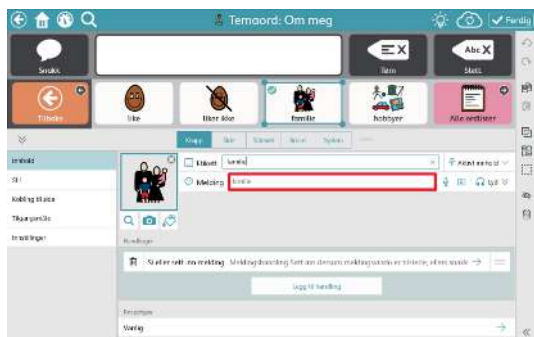

Illustrasjon 29: Tekstfelt for knappmelding



Noen Acapela-stemmer støtter Vocal Smiley-lyder som latter, sukking osv. Skriv inn Vocal Smiley-lydkoden for Acapela-stemmen i feltet Meldinger for å høre den når du velger knappen. Finn språket og stemmen din på følgende lenke for å se Vocal Smiley-lydene som er tilgjengelige for Acapela-stemmen din: [Acapela Vocal Smiley-koder](#). TD Snap støtter ikke Acapela Vocal Smiley-lyder med (S)-eller Vocal Smiley-utrop.

9.6.3.2 Lag et opptak



1. Velg **Spill inn**. Dialogboksen Spill inn melding åpnes.



2. Velg **Spill inn** for å starte opptaket.



3. Når du er ferdig med opptaket velger du **Stopp**.



4. For å høre på opptaket velger du **Spill av**.

5. Når du er ferdig med å lage opptaket ditt velger du **Lagre** for å lagre opptaket. Velg Avbryt for å lukke Spill inn melding-dialogen uten å lagre.

9.6.3.3 Legg til en lydfil i en knappmelding

Legg til en lydfil for å lage en knapp som spiller av en sang eller et annet lydspor.



1. Velg **rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.




3. Velg **Legg til lydfil**.
4. Bla til og velg en lydfil på enheten din. Filer må være <50 MB.
Støttede filtyper: .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma
5. Velg **Ferdig**.

9.6.4 Audiosignal for knapp

Audiosignalet kan brukes sammen med Klikk ved slipp, Musedveling, Øyestyring og Skanning som tilgangsmåter. Audiosignalet er en forhåndsvisning av en knapp, som leses opp når knappen markeres men ikke enda er valgt.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Audiosignal** for å utvide raden.
4. Skriv inn i **Audiosignal**-feltet.

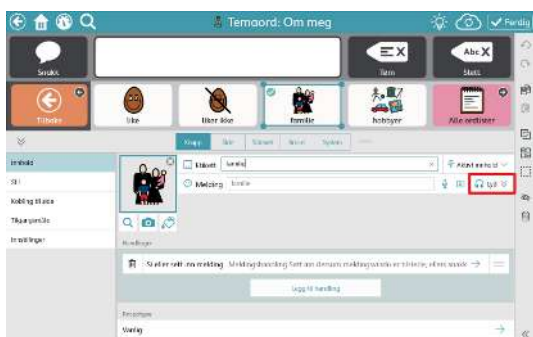

Illustrasjon 30: Tekstfelt for audiosignal på knapp

Dersom du ønsker å ta opp et skreddersydd Audiosignal, se avsnittet 9.6.3.2 *Lag et opptak*, side 41.

9.6.5 Knappbilde

En knapp kan vise et symbol eller et bilde.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Legg til et bilde på knappen:


For å søke etter et symbol i symbolsettet:

- Velg  **Symbolsøk**-knappen.
Symbolsøk-dialogen vil åpnes.
- Tast inn i tekstfeltet for å avgrense søkebegrepene.



Valgfritt: Du kan filtrere søkeresultatene ved å velge egenskapene du ønsker å se i symbolsøkeresultatene (voksen, barn, kvinnelig, mannlig).

- Velg det ønskede symbolet.
- Velg **Ferdig**.

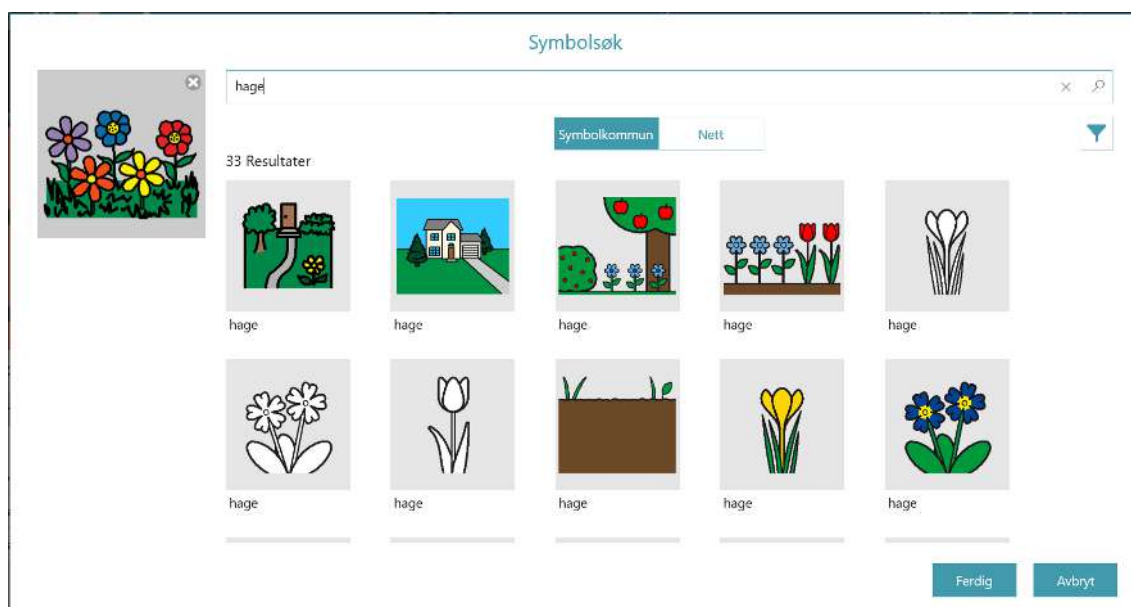


Slik søker du etter et bilde på nett (krever internettilkobling):

- Velg  **Symbolsøk**-knappen.

Symbolsøk-dialogen vil åpnes.

- Velg fanen **Nett** og skriv inn et søkeord i tekstfeltet.
- Velg det ønskede bildet.
- Velg **Ferdig**.

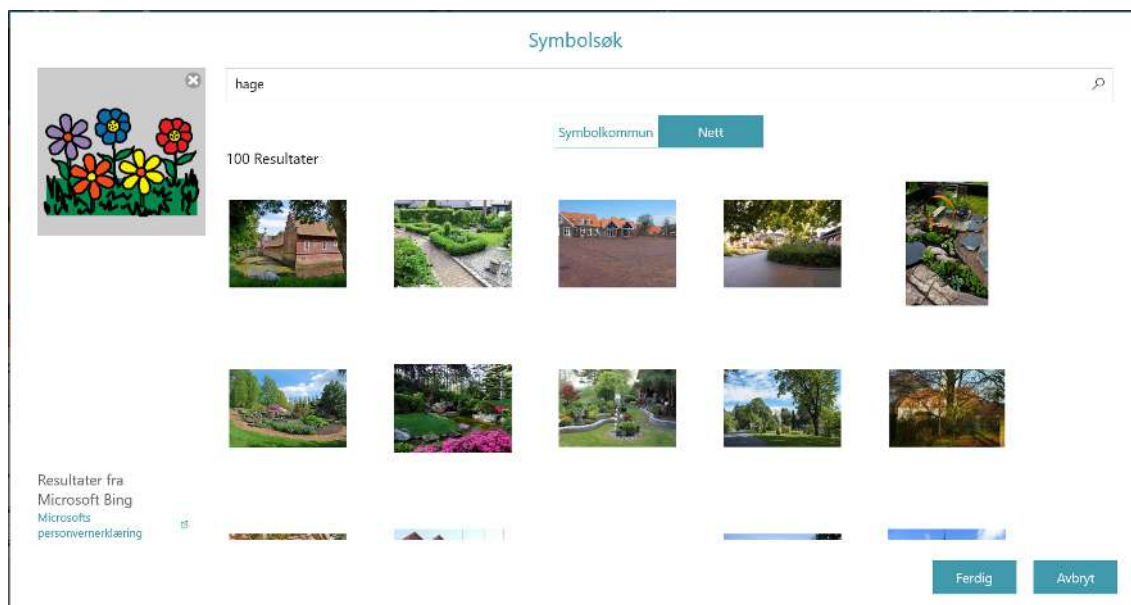

For å bruke kameraet til å ta et bilde til knappbildet:




- Velg **Kamera**-knappen.
- Velg **Fra kamera**.
- Bruk kameraet på enheten din for å ta et bilde.

For å bruke et bilde som er lagret på din lokale enhet:



- Velg **Kamera**-knappen.
- Velg **Fra fotogalleri**.
- Bruk filutforskeren for å navigere til den ønskede bildefilen.

Dersom du ikke ønsker å ha et symbol på knappen velger du **X** i hjørnet av det gjeldende symbolet eller angir Knapputformingen til Kun etikett. Se avsnittet 9.8.4 Knapputforming, side 60.

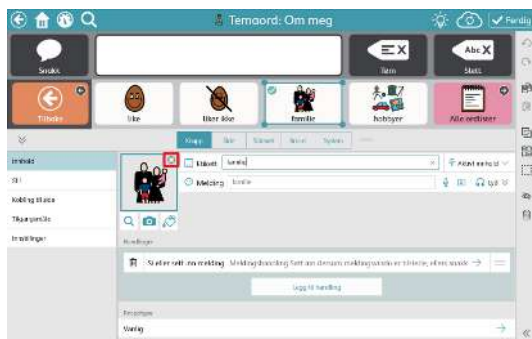

9.6.6 Rediger symbol


Endringer av et symbol ved bruk av Symbolredigering brukes bare på det spesifikke symbolet (bare på knappen du har valgt), og ikke globalt på andre forekomster av det samme symbolet. Hvis du vil endre hårfargen eller hudfargen til alle symboler globalt, må du bruke innstillingene i Sidesett > Stil > Symbolfarger. Se avsnittet *10.3.1 Hudfarge og hårfarge for symbol, side 78*. Merk: Et symbol som har blitt endret i Symbolredigering vil ikke lenger bli oppdatert av innstillingene for Symbol Hudtone og Hårfarge.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp som inneholder et symbol.



3. Velg **Symbolredigering**-knappen.
4. Rediger symbolet ved å bruke verktøyene beskrevet nedenfor.
5. Velg **Ferdig** for å lagre endringene og lukke Symbolredigering. Velg **Avbryt** for å forkaste endringene og lukke Symbolredigering.

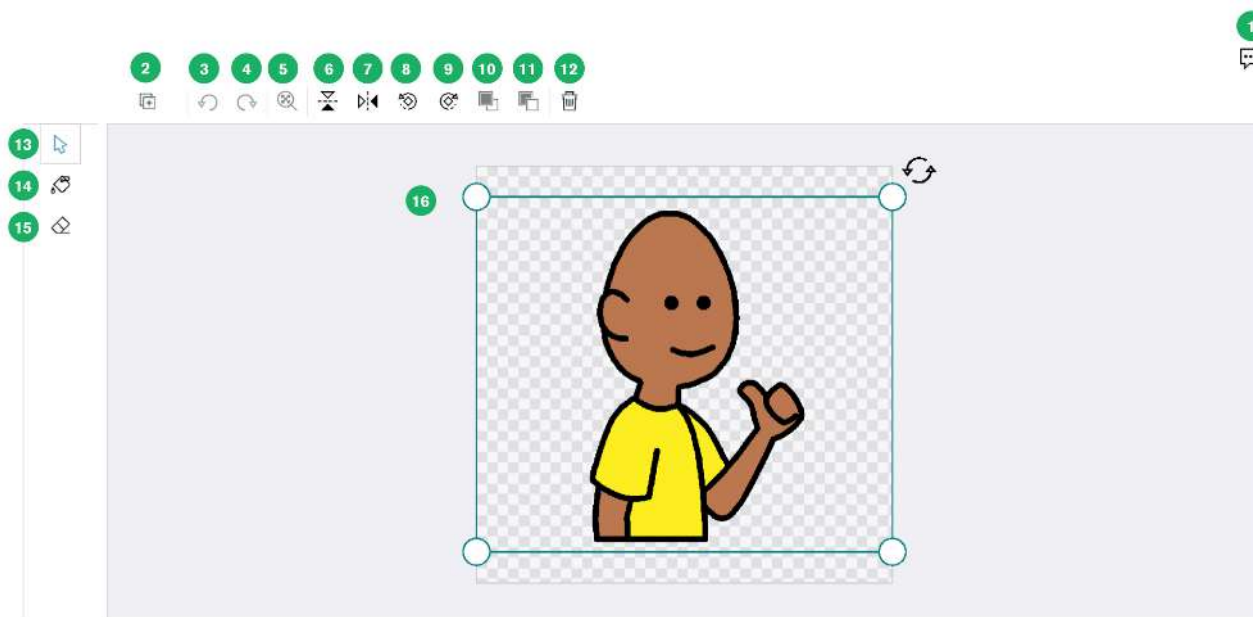

Tabell 5: Symbolredigering - Velg verktøy


	Verktøynavn	Beskrivelse
1	Tilbakemeldinger om symbol	Send tilbakemeldinger om dette symbolet til Tobii Dynavox.
2	Legg til bilde	Legg til et bilde til symbolet. Velg fra symbolbiblioteket, ta et bilde med enhetens kamera, eller velg fra bildebiblioteket ditt. Merk: Bilder som legges til på lerretet kan velges individuelt til du gjør ett av følgende: Velg Ferdig for å lagre endringene og lukke symbolredigering, bruk et av Slett-verktøyene eller bruk et av Paint-verktøyene. Når noen av disse handlingene utføres, blir bildene på lerretet flatet sammen til ett enkelt bilde.
3	Angre	Angre den siste handlingen.
4	Gjør om	Gjør om den siste angrede handlingen.
5	Tilpass til skjerm	Skaler zoomnivået for å passe den tilgjengelige skjermplassen. Hvis du har zoomet inn på lerretet, kan du bruke dette verktøyet til å se hele lerretet på nytt.
6	Vertikal vending	Vend gjeldende valg vertikalt.
7	Horisontal vending	Vend gjeldende valg horisontalt.
8	Roter mot klokken	Roter gjeldende valg mot klokken.

	Verktøynavn	Beskrivelse
9	Roter med klokken	Roter gjeldende valg med klokken.
10	Flytt fremover	Ta det gjeldende valget fremover i lagstabelen.
11	Send bak	Send det gjeldende valget bak i lagstabelen.
12	Slett	Slett gjeldende valg.
13	Velg	Velg et element for å redigere det. Bare ett element kan velges om gangen.
14	Maling	Bytt ut fargen i et område. Se Symbolredigering - Maling-verktøy-tabellen nedenfor.
15	Visk ut	Utvisking på frihånd. Se Symbolredigering - Visk ut-verktøy-tabellen nedenfor.
16	Lerret	Det rutete området er lerretet som definerer grensene til symbolet. Bruk knipebevegelser med en berøringsskjerm eller rullehjulet på en mus for å zoome inn og ut på lerretet. I grafikken over er bildet på lerretet valgt. Velg og dra et hjørne av markeringsrammen for å endre størrelsen på bildet. Velg og dra roteringsikonet for å rotere bildet.



Tabell 6: Symbolredigering - Maling-verktøy

	Verktøynavn	Beskrivelse
17	Farge	Still inn fargen du skal male med. Velg mellom standardfarger, nylig brukte farger, eller velg + for å lage din egen tilpassede farge.
18	Dråper	Bruk dropperen til å velge en farge på lerretet, og bruk deretter den fargen til å male med.

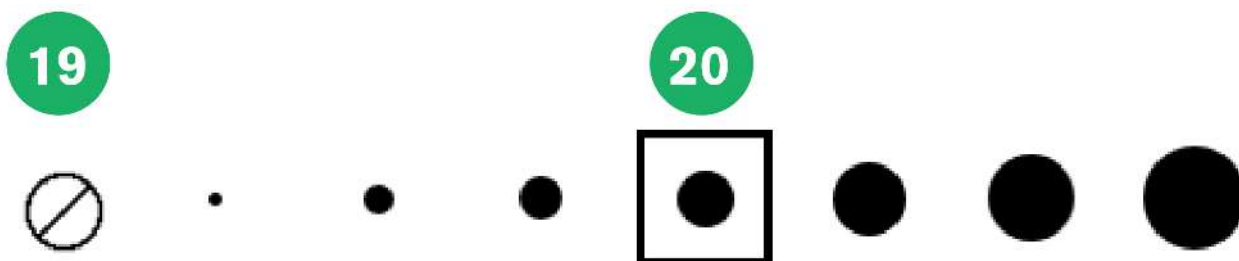

Tabell 7: Symbolredigering - Visk ut-verktøy

	Verktøynavn	Beskrivelse
19	Tøm	Fjern alt fra lerretet.
20	Størrelse på viskeverktøy	Velg størrelsen for viskelærverktøyet.

9.6.7 Knapptype

Innstillingen for knapptype bestemmer hvordan en knapp oppfører seg.



Rediger-knappen.

1. Velg
2. Velg en knapp.
3. Velg **Knapptype**.
4. Velg en knapptype fra listen:

- **Vanlig** – kan inneholde et symbol, en etikett, en melding og handlinger. Standardhandlingen er snakk/sett inn melding.
- **Prediksjon** – forutser det neste ordet basert på den gjeldende sammensetningen i meldingsvinduet. Velg knappen for å sette inn det gjeldende viste ordet i Meldingsvinduet.
- **Tastatur** – utformet for å sette inn et enkelt tegn i Meldingsvinduet, og for å respondere på rett måte på modifikatorer som Shift eller Caps Lock. Tastaturtaster kan også spille av en innspilt lyd eller en lydfil når de velges. Se avsnittene 9.6.3.2 *Lag et opptak, side 41* og 9.6.3.3 *Legg til en lydfil i en knappmelding, side 41*.
- **Ordbøyer** – endrer målordet til den spesifiserte ordformen, f.eks. flertall, preteritum, osv. Målet angis som ett av to alternativer: det siste ordet i Meldingsvinduet eller alle Grammatikkknapper.

Innstillingen for språkregler for knapp må være akkurat den samme for Ordbøyer-knappen og for Grammatikkknappen for at bøyingen skal virke slik det skal.

- **Grammatikk** – oppdaterer sin egen etikett-tekst for å forutse den ønskede grammatiske formen av ordet basert på gjeldende innhold i Meldingsvinduet, en valgt Ordbøyingknapp, eller en valgt Antydet subjekt-knapp.
- **Antydet subjekt** – (kun spansk) når den fylles med et passende pronomen kan Antydet subjekt-knappen brukes for å bøye Grammatikkknapper, og også til å sette inn etiketten dens i Meldingsvinduet. Når den velges én gang vil Antydet subjekt-knappen bøye Grammatikkknapper slik at de stemmer med pronomenet på Antydet subjekt-knappen. Dersom den velges en andre gang vil etiketten (pronomenet) på Antydet subjekt-knappen settes inn i Meldingsvinduet.

Dersom språkreglene for Antydet subjekt-knappen er satt til spansk (Mexico, Spania eller USA) kan et av de følgende pronomenene brukes på knappen:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



Innstillingen for språkregler for knapp må være akkurat den samme for Antydet subjekt-knappen og for Grammatikkknappen for at bøyingen skal virke på riktig måte.

9.7 Knappehandlinger

Handlinger lar deg opprette knapper som utfører bestemte funksjoner!

Legg til eller rediger knappehandlinger



1. Velg **rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Legg til handling** for å velge en handling som skal legges til på knappen. Kun tilgjengelig hvis **knappetypen** er satt til **Vanlig**).



Skriv i **Søk etter handlinger**-feltet for å finne handlinger relatert til søket ditt. Velg  informasjonsikonet i seksjonstittelen for å se flere detaljer om hva handlingene gjør.



Favoritthandlinger vises først i handlingslisten, for enkel tilgang. Velg  stjerneomrisset for å legge til handlingen i favorittlisten. Velg  den fylte stjernen for å fjerne fra handlingen fra favorittlisten.

Handlinger for tale	Beskrivelse
Les opp meldingsvindu	Les opp innholdet i meldingsvinduet.
Si eller sett inn melding	Les opp eller sett inn en knapps melding.
Les opp setning	Les opp den siste setningen i meldingsvinduet.
Stopp all lyd	Stopp all tale og lyd som spilles av for øyeblikket eller som ligger køen i TD Snap®.

Handlinger for meldingsvindu	Beskrivelse
Fet	Gjør den valgte teksten i meldingsvinduet fet.
Tøm meldingsvindu	Slett innholdet i meldingsvinduet.
Kopier teksten i meldingsvinduet	Kopier den gjeldende meldingsvinduteksten til systemets utklippstavle. [‡]
Kopier meldingsvindu til knapp	Kopier teksten i det gjeldende meldingsvinduet, og legg den deretter til på knappeetiketten brukeren har valgt. [‡]
Klipp ut teksten i meldingsvinduet	Klipp ut den gjeldende meldingsvinduteksten til systemets utklippstavle. [‡]
Slett tekst	Slett den valgte teksten i meldingsvinduet, eller det gjeldende ordet i meldingsvinduet.
Kursiv	Gjør den valgte teksten i meldingsvinduet kursiv.
Flytt markør	Flytt på markøren i meldingsvinduet.
Lim inn utklippstavle i meldingsvindu	Lim inn innholdet fra systemets utklippstavle i meldingsvinduet.
Gjør om meldingsvinduet	Gjør om den siste angrede handlingen i meldingsvinduet.
Velg tekst	Velg tekst i meldingsvinduet.
Del teksten i meldingsvinduet	Del den gjeldende teksten i meldingsvinduet. [‡]
Bytt chat-modus	Slå Chat på og av. Når Chat er aktivert, bufres innholdet i meldingsvinduet, og meldingsvinduet tømmes. Mens du er i Chat, kan du sette inn nytt innhold i meldingsvinduet og snakke. Når Chat er slått av, gjenopprettes det bufrede meldingsvinduet slik at du kan fortsette der du tok pause.
Angre meldingsvindu	Angre den siste handlingen i meldingsvinduet.

[‡] «Gjeldende tekst» refererer til den valgte teksten i meldingsvinduet eller, hvis det ikke er gjort noe valg, all teksten i meldingsvinduet.

Handlinger for navigasjon	Beskrivelse
Avbryt besøk	Avbryter besøk slik at du forblir på den gjeldende siden.
Forleng besøk	En knapp som inneholder denne handlingen vil ikke utløse retur til den forrige siden mens besøk er aktivert.
Gå tilbake	Gå tilbake til den forrige siden.
Gå hjem	Gå til Startsidene.

Handlinger for navigasjon	Beskrivelse
Kobling	Kobling til en annen side.
Åpne Kontrollpanel	Åpne Kontrollpanel-siden.
Åpne tastatur	Åpne tastatursiden.
Åpne tavle***	Åpne tavlen.
Gå tilbake til der besøk ble startet	Gå tilbake til den forrige siden, avbryt besøk.
Endre sidesett	Endre til et annet sidesett.

*** Se avsnitt 9.7.3 *Tavle, side 50*

Handlinger for Boardmaker-aktiviteter	Beskrivelse
Åpne en Boardmaker-aktivitet eller -mappe. †	Åpne en Boardmaker-aktivitet eller -mappe som en TD Snap®-side eller en popup.
Åpne Boardmaker-aktivitetsbibliotek †	Åpne Boardmaker-aktivitetsbiblioteket i TD Snap®. Fra biblioteket kan brukeren bla gjennom mapper og spille aktiviteter. Boardmaker-aktivitetsbiblioteket er Snap-aktiviteter-mappen på myBoardmaker.com
Åpne gjeldende Boardmaker-aktivitet †	Åpne Boardmaker-aktiviteten som pågår, om aktuelt.

† Denne handlingen krever en konto på myBoardmaker.com, og tilknyttet Boardmaker-innhold. Se avsnitt 9.7.5 *Spill av Boardmaker-aktiviteter i TD Snap®, side 53*

Handlinger for Støtte	Beskrivelse
Først Deretter	Vis en Først, Deretter-sekvens på en popup.
Miniplan	Vis en Miniplan på en popup.
Manus	Vis et manus på en popup.
Tidtaker	Vis en tidtaker i topplinjen, som teller ned den spesifiserte tiden.

Handlinger for tilgangsmåte	Beskrivelse
Kalibrer øyestyringsenhet	Start kalibrering av øyestyringsenheten.
Bytt tilgangsmåte	Hvis bare tilgangsmetode 1 er angitt, endres tilgangsmetoden til den som er spesifisert når knappen velges. Hvis både tilgangsmetode 1 og tilgangsmetode 2 er angitt, veksler knappen mellom tilgangsmetode 1 og tilgangsmetode 2. Knappeetiketten viser dynamisk "Endre til [tilgangsmetode]" for å indikere hva som vil skje når knappen velges.
Pause tilgangsmåte	Pauser og gjenopptar tilgangsmetoden. Knappeetikettteksten viser om tilgangsmetoden er midlertidig stoppet eller aktiv. Gjeldende tilgangsmetoder: Musedvelling, Øyestyling.
Angi tilgangstid	Angir tidsvariabelen for tilgangsmetoden til den angitte verdien. Den berørte tidsvariabelen bestemmes av den aktive tilgangsmetoden når handlingen <i>Angi tilgangstid er aktivert</i> † For eksempel legger du kanskje til handlingen når tilgangsmåten er satt til Berøring, men senere aktiverer brukeren den med tilgangsmåten Øyestyling for å endre fokuseringstiden
Vis status for øyestyringsenhet	Vis styringsstatusvinduet for øyestyringsenheten.
Veksle skrivebordstilgang	Bytt mellom skrivebordstilgang til øyestyling og TD Snap region-øyestyling. På Windows-enheter brukes TD Control for skrivebordstilgang. På iPad brukes AssistiveTouch for skrivebordstilgang.

† Liste over tidsvariabler som påvirkes av tilgangstid-handlingen.

Tabell 8: Tilgangstid-tabellen

Tilgangsmåte	Påvirket tidsvariabel
Øyestyling med fokusering	Fokuseringstid
Øyestyling med bryter	Holdetid for bryter

Tilgangsmåte	Påvirket tidsvariabel
Øyestyring med blunking	Minimum blunketid
Klikk ved berøring/Klikk ved slipp	Holdetid
1-bryters autoskanning	Skannehastighet
1-bryters skanning	Pausetid
1-bryters fokuseringsskanning	Pausetid
Klikk ved slipp-skanning	Hastighet
Musedveling	Fokuseringstid
Berøring	Ingen

Handlinger for Vokabularfilter	Beskrivelse
Veksle vokabularfilter	Vokabularfilter av eller på.

Handlinger for Volumkontroll	Beskrivelse
Veksle mellom tilbakemeldingslyd på eller av	Skru av eller på tilbakemeldingslyd.
Tilbakemeldingslyd ned	Skru ned volum for tilbakemeldingslyd.
Tilbakemeldingslyd opp	Skru opp volumet for tilbakemeldingslyd.
Angi volum	Angi systemvolumet til et spesifikt nivå.
Demp tale av/på	Slå av eller på demping av systemvolum.
Talevolum ned	Skru ned volumet.
Talevolum opp	Skru opp talevolumet.

Handlinger for omgivelseskontroll	Beskrivelse
Send Google-assistent-kommando	Send en tekstkommando til Google Assistant. Alternativer: Send knappmeldingstekst eller send meldingsvindutekst.
Send IR-signal	Send det spesifiserte IR-signalet.

Handlinger for AccessIT	Beskrivelse
Koble til AccessIT*	Koble fra den gjeldende tilkoblede AccessIT-enheten, vis deretter AccessIT enhetsvelger.
Tilbakestill AccessIT*	Stopp alle gjeldende AccessIT-handlinger.
Send knappetekst*	Send en knapps etikett eller melding til AccessIT-enheten.
Send tastaturtast*	Send en tastaturtast til AccessIT-enheten.
Send meldingsvindutekst*	Send den gjeldende meldingsvinduteksten til AccessIT-enheten. [‡]
Send museklikk*	Send museklikk til AccessIT-enheten.
Send musebevegelse*	Send musebevegelse til AccessIT-enheten.
Send tekst*	Send tekst til AccessIT-enheten.

* Denne handlingen krever en Tobii Dynavox AccessIT 3-enhet. Se avsnitt 9.7.4 AccessIT, side 51

[‡] «Gjeldende tekst» refererer til den valgte teksten i meldingsvinduet eller, hvis det ikke er gjort noe valg, all teksten i meldingsvinduet.

Handlinger for media	Beskrivelse
Spill YouTube-video [§]	Spill den spesifiserte YouTube-videoen i den integrerte tilgjengelige spilleren. Alternativer: Når videoen er fullført, kan du enten spille av neste video automatisk på TD Snap®-siden, lukke YouTube-spilleren eller ikke gjøre noe. Klipp video (spesifiser start- og/eller sluttider). Klippede videoer kan bare vises innenfor det angitte tidsrommet.

[§]Se avsnitt 9.7.6 Spill av YouTube-videoer i TD Snap®, side 57

Handlinger for Start andre applikasjoner	Beskrivelse
Start program	Start det spesifiserte programmet.

Handlinger for enhet	Beskrivelse
Minimér	Minimerer TD Snap®-appen.
Start enheten på nytt	Starter enheten på nytt.
Slå av enheten	Slår enheten av.
Fullskjermsmodus av/på	Slår fullskjermsmodus av eller på for enheten.

Handlinger for Partnervindu	Beskrivelse
Lysstyrke for partnervindu ned**	Reduserer lysstyrken på partnervinduet.
Lysstyrke for partnervindu opp**	Øker lysstyrken på partnervinduet.
Strøm av/på for partnervindu**	Slår partnervinduet av eller på.

** Denne handlingen krever en Tobii Dynavox I-13-, I-16- eller TD Pilot-enhet.

9.7.1 Slett en Handling



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg  **Slett**-knappen ved siden av en handling.
4. Velg den røde **Slett**-knappen for å bekrefte slettingen.


9.7.2 Endre rekkefølge på Knapphandlinger



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.



3. Velg og hold inne ikonet for en handling, og dra den så til en plassering i listen over Handlinger.

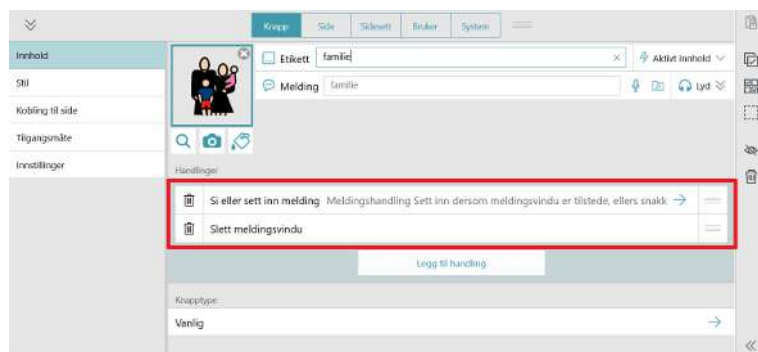


9.7.3 Tavle



Tavlen er kun tilgjengelig med tilgangsmåten berøring.

Tavlen er et område hvor du kan vise bilder og lage frihåndstegninger. Lag så mange tavler du vil. De vil eksistere til du sletter dem.

For å åpne tavlen, bruk Åpne tavle-handlingen på en knapp. I mange sidesett er en Åpne tavle-knapp tilgjengelig på Dashboard-siden.

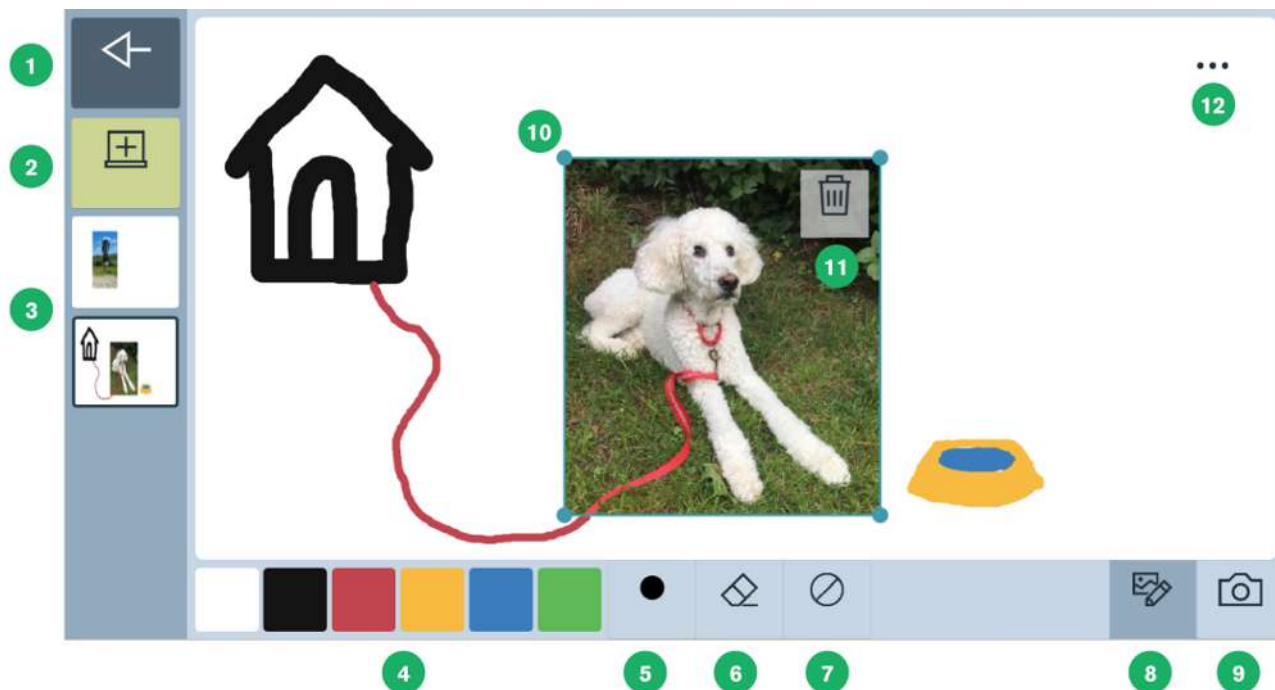

1. **Tilbake** – gå tilbake til sidesettet.
2. **Ny tavle** – opprett en ny tavle.
3. **Liste over eksisterende tavler** – velg en tavle for å vise og redigere den.
4. **Tegnepalet** – velg en farge, og tegn på frihånd på tavlen.
5. **Tykkelse** – Velg tykkelsen til tegneverktøyet.
6. **Sletteverktøy** – slett tegninger i spesifikke områder.
7. **Tøm** – fjern alle tegninger fra den gjeldende tavlen.
8. **Rediger bilder** – flytt, endre størrelse, eller slett bilder på tavlen.
9. **Legg til bilde** – Legg til et bilde på tavlen. Bruk det innebygde kameraet eller bla igjennom etter et bilde som er lagret på enheten din.
 Handlinger for Legg til bilde
 - Ta et bilde
 - Velg et bilde — Merk: Dialogboksen for denne handlingen er kun tilgjengelig ved berøring.
 - Avbryt
10. **Valgte bilde** – klikk og dra fra midten av bildet for å flytte på det. Klikk og dra på et hjørne for å endre størrelse.
11. **Slett bilde** – slett det valgte bildet.
12. **Mer** - Åpne en meny som inneholder følgende alternativer:
 - Slett tavle** – slett den gjeldende tavlen.
 - Del** - Dele eller lagre gjeldende tavle som et .jpeg-bilde.
 - Avbryt** - Lukk Mer-menyen.

9.7.4 AccessIT

TD Snap® støtter Tobii Dynavox AccessIT 3, en USB-Bluetooth-enhet som brukes til å sende tastetrykk, musebevegelser og museklikk til en standard Windows 10-datamaskin fra en enhet som kjører TD Snap®-appen. For å lære mer om Tobii Dynavox AccessIT 3 se <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



AccessIT-sider er inkludert i Core First-sidesett laget med versjon TD Snap® 1.7 og senere. AccessIT-sidebunter er tilgjengelig for import til dine eksisterende sidesett på <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



Heretter vil dette dokumentet henvise til datamaskinen som mottar kommandoer som «PC-en» og enheten som kommandoene vil bli sendt fra som «taleenheten».



AccessIT 3 benytter Bluetooth® trådløs teknologi. PC-en (med tilkoblet AccessIT 3) og taleenheten må være innenfor omtrent 10 meters avstand (32 fot) for å etablere og opprettholde Bluetooth-paring mens AccessIT 3 er i bruk.

Både taleenheten og PC-en må være slått på og låst opp før trinnene nedenfor kan påbegynnes.

9.7.4.1 Oppsett av AccessIT

Koble til AccessIT

1. (På PC-en) Sett inn AccessIT 3 i en USB-port.



AccessIT 3 krever USB 2.0 eller høyere.

Aktiver Bluetooth

Windows-taleenheter

1. (On the speech device) Velg **Start** menyen, og velg deretter **Settings**.
2. Velg **Devices**.
3. Velg **Bluetooth**.
4. Flytt **Bluetooth** veksle til PÅ-posisjon.

iPadOS-taleenheter (iPad)

1. (On the speech device) Gå til **Settings > Bluetooth** og aktiver Bluetooth

9.7.4.2 AccessIT-handlinger

AccessIT-handlingene er utformet for å bli brukt i kombinasjon med hverandre. Vanlige PC-handlinger som klikk og flytt vil kreve mer enn én handling. Individuelle handlinger er beskrevet nedenfor.




Dersom en AccessIT-enhet ikke er tilkoblet når en knapp som inneholder en AccessIT-handling velges, vil den (tilgjengelige) enhetsvelgeren for AccessIT åpnes automatisk.

Tabell 9: AccessIT-handlinger

Handling	Beskrivelse
Koble til AccessIT	Koble fra den gjeldende AccessIT-enheten (om aktuelt) og vis AccessIT enhetsvelger. Denne handlingen er nyttig når du bytter fra én AccessIT-enhet til en annen AccessIT-enhet. Det er ikke nødvendig å bruke denne handlingen for å starte alle AccessIT-økter ettersom alle AccessIT-handlinger automatisk åpner AccessIT enhetsvelger dersom en AccessIT-enhet ikke for øyeblikket er tilkoblet.
Tilbakestill AccessIT	Stopp de spesifiserte kommandotypene som for øyeblikket gjennomføres: tastaturtaster, museklikk, musebevegelser og/eller tekst.
Send knappetekst	Send en knappemelding til AccessIT-enheten. Dersom knappen ikke har noen melding, send knappeetiketten.
Send tastaturtast	Send den spesifiserte tastaturtasten. Valg: hold tasten nede og/eller vent en spesifisert tidsperiode etter sending av tastaturtasten (før utføring av den neste handlingen).
Send teksten i meldingsvinduet	Send den gjeldende meldingsvinduteksten til AccessIT-enheten. Dersom meldingsvinduet har symboler vil symbolene ikke bli sendt.
Send tekst	Send den spesifiserte teksten til AccessIT-enheten.
Send museklikk	Send den spesifiserte klikktypen (venstreklikk, høyreklikk, midtklikk, venstre dobbelklikk). Valg: vent en spesifisert tidsperiode etter sending av klikket (før utføring av den neste handlingen) og/eller hold klikket nede.

Handling	Beskrivelse
Send musebevegelse	Send en musebevegelse til AccessIT-enheten. Musebevegelser utføres fra gjeldende museplassering. Flytt den blå ballen til posisjonen på sirkelen som stemmer overens med retningen på den ønskede musebevegelsen, og angi deretter et tall i avstandsfeltet. Enheten for avstand er den minste merkbare musebevegelsen, mellom 1/300 og 1/200 tommer, avhengig av utstyret og innstillingen for musepekerhastighet på PC-en. Valg: kontinuerlig bevegelse (musen vil fortsette å bevege seg i den spesifiserte retningen frem til en annen handling stopper/gir ny retning til den, eller til den treffer kanten av skjermen) og/eller vent en spesifisert tidsperiode etter sending av musebevegelsen (før utføring av den neste handlingen).

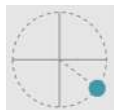

Illustrasjon 31: Mouse movement direction — Position the blue ball on the circle to set the mouse movement direction.



Noen brukere av AccessIT vil kanskje ha nytte av å aktivere Windows-innstillingen «Vis posisjonen til pekeren når jeg trykker på CTRL-tasten» på PC-en. Bruk Send tastaturtast-handlingen til å sende tastaturtasten CTRL fra TD Snap®, og animerte sirkler vil midlertidig vises rundt musepekeren på PC-en for å gjøre den mer synlig. For å få tilgang til denne Windows mus-innstillingen, gå til *Settings > Devices > Mouse > Additional Mouse Options > Pointer Options tab*.

9.7.4.3 PC-ens strøminnstillinger og AccessIT

PC-en din kan kun motta AccessIT-kommandoer når den er slått på og våken. For å sikre uforstyrret PC-tilgang justerer du PC-ens strømsparingsinnstillinger til å aldri sette datamaskinen (harddisken) i dvale mens den er tilkoblet strøm.

PC-en din kan fortsatt motta AccessIT-kommandoer dersom skjermen (displayet) har gått inn i strømsparingsmodus. Når en AccessIT-kommando (tastaturtast, musebevegelse eller museklikk) sendes fra TD Snap®, vil det «vekke» PC-skjermen.

Du finner strøminnstillingene for Windows i *Innstillinger > System > Strøm og hvilemodus*.

9.7.5 Spill av Boardmaker-aktiviteter i TD Snap®

Boardmaker-aktiviteter er interaktivt og utskriftsvennlig materiell utformet for læring, kommunikasjon og moro! Du kan spille av Boardmaker-aktivitetene dine rett i TD Snap®. Bruk handlingen Åpne Boardmaker-bibliotek for å bla gjennom og spille av aktiviteter. Eller bruk handlingen Åpne Boardmaker-aktivitet eller -mappe for å gå rett til en spesifikk aktivitet eller mappe. Du kan til og med lage aktiviteter til bruk når du ikke er på nett.




Boardmaker-aktiviteter som spilles av i TD Snap® er designet for bruk i hjemmet, der omsorgspersonen administrerer Tobii Dynavox-kontoen som brukes for både TD Snap® og myBoardmaker. Omsorgspersonen har i denne situasjonen direkte tilgang til mappen med Boardmaker-aktiviteter, der de kan plassere Boardmaker-aktiviteter for brukeren.

I en klasseroms- eller terapisetting, der en lærer eller terapeut deler ut Boardmaker-aktiviteter, bør eleven fullføre oppgavene sine ved hjelp av appen Boardmaker 7 Student Center. Appen Boardmaker 7 Student Center er gratis å installere, og den er kompatibel med de fleste enheter som støtter TD Snap®. Eleven vil sannsynligvis trenge en separat innlogging fra læreren for å få tilgang til oppgavene sine i Boardmaker 7 Student Center-appen.



Visse Boardmaker-innstillinger og -handlinger støttes ikke i TD Snap®. Se brukerveiledningen for Boardmaker 7 for listen over funksjoner som ikke støttes.

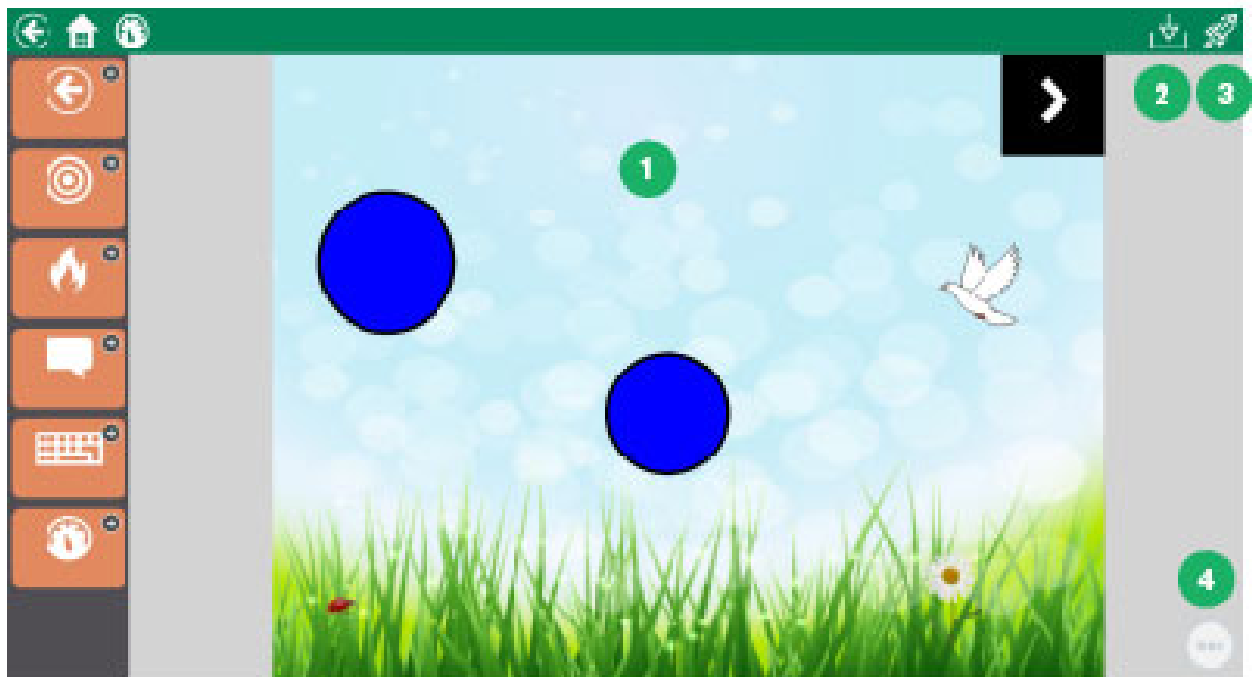

Illustrasjon 32: Avspilling av Boardmaker-aktiviteter i TD Snap®

	Element	Beskrivelse
1	Aktivitet	Som standard spilles Boardmaker-aktiviteter av i hovedsideområdet i TD Snap®. Du kan også spille av Boardmaker-aktiviteter i et popupvindu dersom du aktiverer <i>Spill av i popup</i> når du legger til en av Boardmaker-aktivitetene på en knapp.
2	Administrer avlogget tilgang	Velg de aktivitetene i den gjeldende visningen som skal lastes ned og gjøres tilgjengelige for tilgang uten internett. De valgte aktivitetene vil kunne spilles av i TD Snap®, selv uten internetttilkobling.
3	Gå til myBoardmaker	Åpne myBoardmaker.com i et nettleservindu.
4	Ikonet for Boardmaker-aktivitetsmenyen	Åpne Boardmaker-aktivitetsmenyen for å få tilgang til følgende knapper:  • Tilbake – Forlat aktiviteten og gå tilbake til forrige side. • Bibliotek – Gå til Boardmaker-biblioteket i TD Snap®. • Omstart – Begynn på nytt i den gjeldende aktiviteten. • Flytt – Flytt ikonet for Boardmaker-aktivitetsmenyen til et annet hjørne av skjermen.

9.7.5.1 Administrere aktiviteter i myBoardmaker

For å gjøre Boardmaker-aktiviteter tilgjengelige i TD Snap®, må du ha en konto på myBoardmaker.com. Kontoer på Community-nivå er gratis. Gå til myBoardmaker.com og logg inn med innloggingsinformasjonen fra Tobii Dynavox, som du også bruker i TD Snap®, for å opprette en gratis Community-konto på myBoardmaker.



Nettsiden myBoardmaker er per i dag kun på engelsk. Men Boardmaker-aktiviteter er tilgjengelig på mange språk.



Før du begynner bør du sørge for at du er tilkoblet internett, og at du er logget inn med Tobii Dynavox-kontoen din i TD Snap®.

1. I TD Snap® velger du **Kontrollpanel**, og deretter knappen **Boardmaker-aktiviteter**.

Hvis du ikke har knappen Boardmaker-aktiviteter på kontrollpanelet ditt, kan du lage en knapp med handlingen Åpne Boardmaker-aktivitetsbibliotek, og deretter velge denne knappen i bruksmodus. Den første gangen handlingen Åpne Boardmaker-aktivitetsbibliotek utføres, oppretter den den nødvendige mappen i Boardmaker Online-kontoen din.

2. Åpne en nettleser og gå til myBoardmaker.com
3. Velg **Logg inn**, og angi innloggingsinformasjonen din for Tobii Dynavox. Hvis du ikke har logget deg inn på myBoardmaker.com før, må du registrere deg for en gratis Community-konto eller starte et abonnement.
4. Velg **My Boardmaker**.
5. Velg mappen **Snap-aktiviteter**.
6. Legg til aktiviteter og mapper i Snap-aktiviteter-mappen for å gjøre dem tilgjengelige via handlinger i TD Snap®.



Mappen Snap-aktiviteter er forhåndslastet med mange gratis aktiviteter for å få deg i gang. Noen av de mer populære aktivitetene er kalkulator-, terning- og spinner-aktiviteter som du finner i Matteverktøy-mappen.



Mappen Snap-aktiviteter på myBoardmaker er Boardmaker-aktivitetsbiblioteket i TD Snap®.

9.7.5.2 Åpne Boardmaker-biblioteket

Bruk denne handlingen for å la brukeren bla gjennom alle Boardmaker-aktivitetene i Snap-aktiviteter-mappen på myBoardmaker rett i TD Snap®. Fra Boardmaker-aktivitetsbiblioteket kan de velge å spille av hvilken som helst aktivitet.



Alle aktiviteter i Biblioteket er tilgjengelige for avspilling dersom enheten har en aktiv internettilkobling. Uten internett er det kun aktiviteter som er lastet ned, eller som tidligere har blitt mellomlagret, som vi spilles av. Se avsnittet 9.7.5.5 *Frakoblet tilgang til Boardmaker-aktiviteter*, side 56.

1. Naviger til siden der du vil ha en knapp som er koblet til ditt Boardmaker-aktivitetsbibliotek.



2. Velg **Rediger**-knappen.
3. Velg knappen du vil bruke for å åpne Boardmaker aktivitetsbibliotek.
4. Velg **Legg til handling**.
5. Bla ned til Boardmaker-aktiviteter og velg **Åpne Boardmaker-aktivitetsbiblioteket**.

9.7.5.3 Åpne Boardmaker-aktivitet

Spill av en spesifikk aktivitet i Boardmaker-biblioteket.



Alle aktiviteter i Biblioteket er tilgjengelige for avspilling dersom enheten har en aktiv internettilkobling. Uten internett er det kun aktiviteter som er lastet ned, eller som tidligere har blitt mellomlagret, som vi spilles av. Se avsnittet 9.7.5.5 *Frakoblet tilgang til Boardmaker-aktiviteter*, side 56.

1. Naviger til siden der du vil ha en knapp som er koblet til Boardmaker-aktiviteten.



2. Velg **Rediger**-knappen.
3. Velg knappen du vil bruke for å åpne Boardmaker-aktiviteten.
4. Velg **Legg til handling**.
5. Bla ned til Boardmaker-aktiviteter og velg **Åpne en Boardmaker-aktivitet eller -mappe**. Dialogen Snap-aktiviteter åpnes.
6. Naviger gjennom mappene til den aktiviteten du ønsker å spille av. Velg aktiviteten.
7. Hvis du vil at aktiviteten skal åpnes i en popup aktiverer du **Åpne i popup**. Ellers vil aktiviteten åpnes som en side i TD Snap®.
Aktiviteter som åpnes i en popup lar ikke brukeren navigere bort for så å kunne komme tilbake og fortsette der de slapp. Popups er best egnet til korte aktiviteter som er enkle å starte på nytt fra begynnelsen av.
8. Velg **Velg aktivitet**. For å avslutte uten å lagre, velg Avbryt.



Knappetiketten oppdateres automatisk med navnet på den tilkoblede aktiviteten.

9.7.5.4 Åpne Boardmaker-mappe

Åpne en spesifikk mappe i Boardmaker-biblioteket ditt. Fra mappaen kan brukeren velge aktiviteter å spille av i TD Snap®.



Du kan tildele Boardmaker-aktiviteter til brukeren ved å lage en mappe til dem i Snap-aktiviteter-mappaen din på myBoardmaker.com, og deretter koble til den mappaen i TD Snap®-sidesettet deres. Flytt aktiviteter inn i mappaen etter behov, og brukeren vil se aktivitetene i TD Snap® (brukeren må være tilkoblet internett og innlogget på myTobiiDynavox-kontoen i TD Snap® for å få de oppdaterte aktivitetene).



Alle aktiviteter i Biblioteket er tilgjengelige for avspilling dersom enheten har en aktiv internetttilkobling. Uten internett er det kun aktiviteter som er lastet ned, eller som tidligere har blitt mellomlagret, som vi spilles av. Se avsnittet 9.7.5.5 *Frakoblet tilgang til Boardmaker-aktiviteter*, side 56.

1. Naviger til siden der du vil ha en knapp som er koblet til Boardmaker-aktiviteten.



2. Velg **Rediger**-knappen.
3. Velg knappen du vil bruke for å åpne Boardmaker-mappaen.
4. Velg **Legg til handling**.
5. Bla ned til Boardmaker-aktiviteter og velg **Åpne en Boardmaker-aktivitet eller -mappe**. Dialogen Snap-aktiviteter åpnes.
6. Naviger til mappaen du ønsker å koble til, slik at du er inne i den ønskede mappaen.
7. Velg **Velg mappe**. For å avslutte uten å lagre, velg Avbryt.



Knappetiketten oppdateres automatisk med navnet på den tilkoblede mappaen.

9.7.5.5 Frakoblet tilgang til Boardmaker-aktiviteter

Du kan laste ned Boardmaker-aktiviteter på enheten din slik at de er tilgjengelige for avspilling når enheten ikke er koblet til internett.



Frakoblede aktiviteter lastes ned separat for hver enhet. Dersom sidesettet er synkronisert eller delt med en annen enhet, må nedlastingen gjentas på den andre enheten for å gjøre aktivitetene tilgjengelige der uten internett.

1. Åpne Boardmaker-biblioteket i TD Snap®. Se avsnittet 9.7.5.2 *Åpne Boardmaker-biblioteket*, side 55.
2. Åpne en mappe for å se listen med aktiviteter.
3. Velg  Administrer avlogget tilgang.
4. Huk av i boksen ved siden av aktivitetene du ønsker å laste ned på enheten for avspilling uten internett.

Aktiviteter som viser ikonet  er lastet ned og tilgjengelige på enheten uten internett.

5. Velg **X** for å lukke dialogen når du er ferdig med å laste ned aktiviteter i denne mappaen.
6. Gjenta trinnene over for alle mapper som inneholder aktiviteter du vil gjøre tilgjengelige uten internetttilkobling.



Når en aktivitet er som ikke er markert for frakoblet bruk spilles av mens du er tilkoblet internett, lastes aktiviteten ned som en midlertidig fil. Av den grunn kan visse aktiviteter som har blitt avspilt tidligere, men som ikke er markert for frakoblet bruk, likevel være tilgjengelige for avspilling uten internett. Denne tilgjengeligheten er ikke garantert.

9.7.5.6 Åpne gjeldende Boardmaker-aktivitet

Dersom brukeren spiller av en Boardmaker-aktivitet i TD Snap®, og navigerer bort fra aktiviteten til en annen side, kan de komme tilbake til Boardmaker-aktiviteten i samme tilstand som de forlot den i.



Denne handlingen kan kun brukes med aktiviteter som spilles av i hovedvinduet i TD Snap®. Det fungerer ikke med aktiviteter som er åpnet som popups.

1. Naviger til siden der du vil ha en knapp som tar brukeren tilbake til den gjeldende Boardmaker-aktiviteten.



2. Velg **Rediger**-knappen.


3. Velg knappen du vil bruke for å navigere til den gjeldende Boardmaker-aktiviteten.
4. Velg **Legg til handling**.
5. Bla ned til Boardmaker-aktiviteter og velg **Åpne gjeldende Boardmaker-aktivitet**.

 Hvis ingen Boardmaker-aktivitet pågår for øyeblikket, blir knappen automatisk deaktivert. Når en Boardmaker-aktivitet er i gang, blir knappen automatisk aktivert, og etiketten viser navnet og miniatyrbildet til aktiviteten.

9.7.6 Spill av YouTube-videoer i TD Snap®

Du kan spille av YouTube-videoer i TD Snap® ved å bruke handlingen Spill YouTube Video. Den TD Snap® integrerte YouTube-spilleren er tilgjengelig med alle tilgangsmetoder.

Merk: En Wi-Fi-tilkobling kreves for å spille av YouTube-videoer.

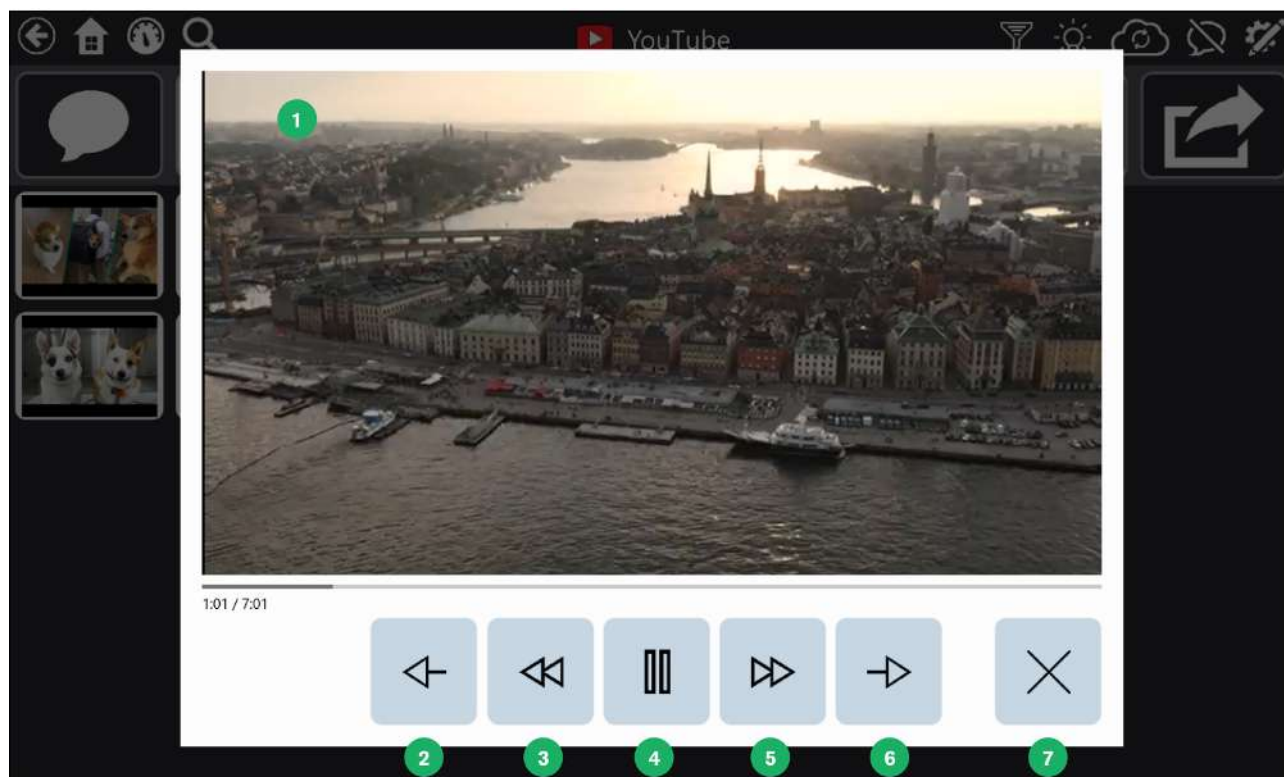


Illustrasjon 33: TD Snap® Integrated YouTube Player

	Element	Beskrivelse
1	YouTube-video	YouTube-videoen vises her og begynner å spille av automatisk.
2	Forrige video	Gå til forrige video på side TD Snap®.
3	Hopp tilbake	Hopp 30 sekunder tilbake.
4	Pause/spill av	Sett videoen på pause eller spill av.
5	Hopp videre	Hopp frem 30 sekunder.
6	Neste video	Gå til neste video på siden TD Snap®.
7	Lukk	Lukk YouTube-spilleren.

For å lage en videospilleliste i TD Snap®, legg til Play YouTube Video-handlingen på flere knapper på en enkelt side. Hvis du vil at hele spillelisten skal spilles av automatisk, aktiverer du alternativet "Spill av neste video automatisk" på hver knapp. YouTube-spillelister støttes ikke.

9.8 Knappestil

Endre utseendet på en knapp i Knappestil-kategorien.

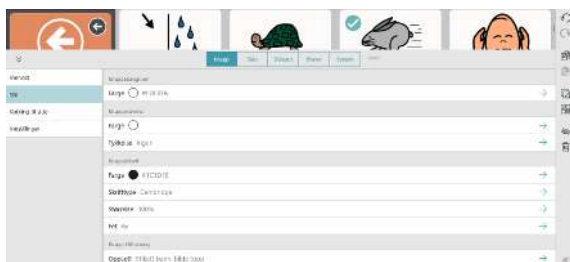

9.8.1 Knappebakgrunn



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Farge** under Knappebakgrunn.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

9.8.2 Knapperamme

9.8.2.1 Rammefarge



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Farge** under Knapperamme.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

9.8.2.2 Rammetykkelse



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Tykkelse** under Knapperamme.
5. Velg rammetykkelse – Ingen, Tynn, Medium eller Tykk. Du kan også angi en egendefinert tykkelse ved å bruke glidebryteren eller skrive inn en numerisk verdi mellom 0 og 12 i feltet Egendefinert tykkelse.



Illustrasjon 34: Knapperammer: Ingen, Tynn, Medium og Tykk.

9.8.3 Knappetikett

9.8.3.1 Farge



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Farge** under Knappetikett.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

9.8.3.2 Skrifttype



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skrifttype** under Knappetikett.
5. Velg en skrifttype.

9.8.3.3 Størrelse



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skriftstørrelse** under Knappetikett.
5. Velg en størrelse.

9.8.3.4 Fet



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Fet** under Knappetikett.
5. Angi fet til **På** eller **Av**.

9.8.4 Knapputforming




Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Utforming** under Knapputforming.
5. Velg en utforming fra listen.




Etikett topp, bilde bunn

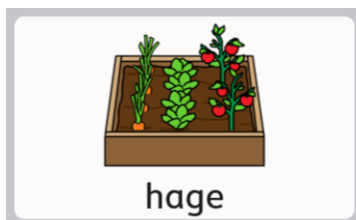


Etikett bunn, bilde topp

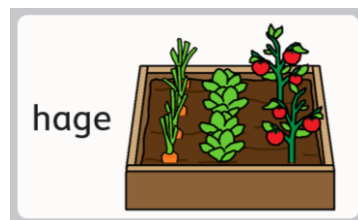

Etikett venstre, bilde høyre

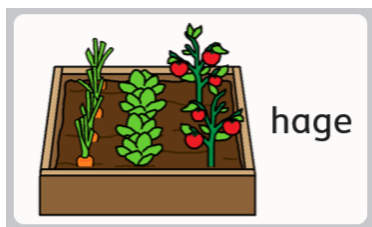

Etikett høyre, bilde venstre

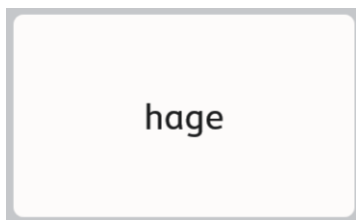

Kun etikett



Kun bilde

9.8.5 Visning av lenke for knapp



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.

Angi stilen for visning av lenken for den valgte knappen.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Visning av kobling** under Visning av lenke for knapp.
5. Velg en stil for visning av lenken fra listen.

Tabell 10: Koblingsvisningsstiler

Ingen	Viser ingen visning av koblingen.	
Navigasjonsikon	Et lite ikon vises i hjørnet på knappen, som indikerer hva den gjør (lenke til en annen side, besøk side eller gå tilbake).	
Mapper for lenke	Lenke-knappen er formet som en mappe. Stil gjelder kun Koblingsknapper, ikke Gå tilbake- eller Besøk-knapper.	
Fane i hjørnet for lenke	Lenke-knappen har en grå trekant i det ene hjørnet. Stil gjelder kun Koblingsknapper, ikke Gå tilbake- eller Besøk-knapper.	

9.9 Koble til side/Opprett ny side

Koblingsknapper åpner en annen side når de velges. Som standard er koblingsknapper identifisert med dette ikonet



eller besøksikonet




. For å endre utseendet på koblings- og besøksknapper, se avsnittet 10.3.6

Koblingsvisning i Sidesett, side 80.

9.9.1 Opprett en Koblingsknapp i en tom celle



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg kobling-ikonet i en tom celle.

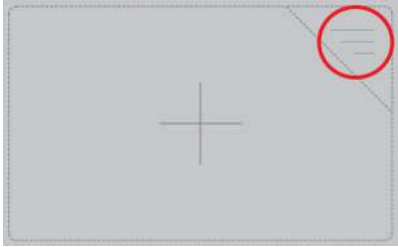

- For å koble til en helt ny side, se avsnittet *9.9.3 Kobling til en Ny side/Opprett ny side, side 62*.
- For å koble til en eksisterende side, se *9.9.4 Kobling til eksisterende side, side 62*.
- For å koble til en (ny) kopi av en eksisterende side, se avsnittet *9.9.5 Kobling til en Ny kopi av en eksisterende side, side 62*.
- For å importere og koble til en side, se avsnittet *9.9.6 Importer og koble til side, side 63*.

9.9.2 Opprett en kobling fra en eksisterende knapp



Rediger-knappen.

1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg den knappen du ønsker å opprette en kobling fra.
3. Velg **Knapp**-fanen.
4. Velg **Handling**-kategorien.
5. Velg **Legg til handling**.
6. Velg **Kobling**.
 - For å koble til en helt ny side, se avsnittet *9.9.3 Kobling til en Ny side/Opprett ny side, side 62*.
 - For å koble til en eksisterende side, se *9.9.4 Kobling til eksisterende side, side 62*.
 - For å koble til en (ny) kopi av en eksisterende side, se avsnittet *9.9.5 Kobling til en Ny kopi av en eksisterende side, side 62*.
 - For å importere og koble til en side, se avsnittet *9.9.6 Importer og koble til side, side 63*.

9.9.3 Kobling til en Ny side/Opprett ny side

1. Velg **Kobling til ny side**. Dialogen Ny side åpnes.
2. Tast inn sidenavnet i **Navn**-feltet. Velg et symbol, eller velg **X** dersom du ikke ønsker å angi et symbol for siden.
3. Velg **Opprett** for å opprette koblingen og den nye siden. Velg **Avbryt** for å gå tilbake uten å lagre.

9.9.4 Kobling til eksisterende side

1. Velg **Kobling til eksisterende side**. Dialogen Kobling til eksisterende side åpnes.
2. Velg en side fra listen.

Tast inn i søkefeltet for å finne en spesifikk side, eller velg Nylig åpnet for å finne en side du har besøkt nylig.
3. Velg **Lagre** for å opprette koblingen. Velg **Avbryt** for å gå tilbake uten å lagre.

For å lære mer om Besøk side, se avsnittet *9.9.7 Besøk side, side 63*.

9.9.5 Kobling til en Ny kopi av en eksisterende side

Denne koblingsmetoden lar deg bruke en side som mal for den nye siden du oppretter.

1. Velg **Kobling til kopi av side**. Dialogen Kobling til kopi av side åpnes.
2. Velg en side fra listen.
3. Angi et navn for den nye siden i Navn-feltet.
4. Velg **Lagre** for å opprette en kopi av den valgte siden og koblingen. Velg **Avbryt** for å gå tilbake uten å lagre.



Tast inn i søkefeltet for å finne en spesifikk side, eller velg Nylig åpnet for å finne en side du har besøkt nylig.

For å lære mer om Besøk side, se *9.9.7 Besøk side, side 63*.

9.9.6 Importer og koble til side

Dersom du har en sidebunt-fil som inneholder en side du ønsker å koble til kan du importere siden og koble til den i én operasjon ved å bruke Importer og koble til side.

1. Velg **Importer og koble til side**. Du kan velge å importere fra myTobiiDynavox eller fra en lokal fil:

Fra myTobiiDynavox

- Velg **Fra myTobiiDynavox**.

Du kan bli bedt om å logge deg på myTobiiDynavox. Dialogen Velg Sidebunt fra myTobiiDynavox åpnes.

- Velg den Sidebunten du ønsker å importere og velg så **Neste**.
- Velg den siden du ønsker å koble til og velg så **Importer**.

Fra en lokal fil

- Velg **Fra en lokal fil**. Dialogen Importer Sidebunt fra en lokal fil åpnes.
- Velg **Bla gjennom**. Naviger til den ønskede Sidebunten (.spb) og velg så **Apne**.
- Velg **Neste**.
- Velg den siden du ønsker å koble til og velg så **Importer**.



Sidekonflikter oppstår når sidebunten inneholder én eller flere sider som allerede eksisterer på enheten din, men



som ikke er identiske. Velg hvert sidekonflikt-ikon

og velg så om du skal beholde den eksisterende

siden eller erstatte med den importerte siden fra sidebunten. Du må løse alle sidekonflikter på denne måten før du kan gå videre med importen av Sidebunten.

9.9.7 Besøk side

Når den er aktivert setter Besøk side-innstillingen opp en kobling for å ta brukeren tilbake til den forrige siden etter at et valg som utløser en retur har blitt utført på den koblede siden. Koblingsknapper som har Besøk side aktivert viser dette



ikonet:

Hvordan Besøk side fungerer

1. Velg koblingsknappen Besøk side. Den koblede siden åpnes.
2. Gjør et valg på den koblede siden.*
Den forrige siden (som inneholder Besøk side-koblingsknappen) åpnes.



* For å utløse retur til den forrige siden må den valgte knappen *enten* inneholde en av de følgende handlingene:

- Si eller sett inn melding
- Les opp setning
- Gå tilbake til der besøk ble startet

Eller være én av de følgende knappetyperne, som også utløser retur til forrige side:

- Grammatikknapp
- Ordbøyingsknapp
- Prediksjonsknapp
- Skjerm tastatur-knapp programmert med Tastetype = mellomrom

De følgende handlingene og knappetyperne forlenger Besøksmodus og *utløser ikke* retur til den forrige siden:

- Forleng besøk
- Gå tilbake
- Kobling
- Antydte subjekt
- Pause tilgangsmåte
- Chat

Dersom en knapp inneholder flere handlinger (noen som utløser retur til den forrige siden, og noen som forlenger besøksmodus) vil retur til den forrige siden ikke utløses, unntatt dersom knappen også inneholder Gå tilbake fra besøk.

De følgende handlingene avbryter et besøk:

- Avbryt besøk
- Gå hjem
- Åpne Kontrollpanel
- Åpne tastatur

9.9.7.1 Aktiver Besøk side på en Koblingsknapp



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg Koblingsknappen.
3. Velg **Handling**-kategorien.
4. Velg **Kobling**-handlingen.
5. Angi **Besøk side** til På.

9.9.7.2 Forleng, avbryt eller gå tilbake fra besøk

Du kan bruke handlinger til å avbryte eller forlenge et sidebesøk som skjer etter valg av en Besøk-knapp. Dersom en valgt knapp på den besøkte siden inneholder en av de følgende handlingene vil den endre normal besøksadferd på den spesifiserte måten:

- Forleng besøk – forbli i Besøksmodus, uansett handling(er) på denne knappen.
- Avbryt besøk – gå ut av Besøksmodus, men bli på den gjeldende siden.
- Gå tilbake fra besøk – gå ut av Besøksmodus umiddelbart (før utførelse av påfølgende handlinger på denne knappen) og gå tilbake til den originale siden. Alle handlinger på knappen vil utføres.

9.10 Tilgangsmåteinnstillinger for knapp

Tilpass visse innstillinger for tilgangsmåte på individuelle knapper.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg kategorien **Tilgangsmåte**.
4. For hver innstilling for tilgangsmåte kan du velge å matche brukerinnstillingen eller angi en tilpasset verdi for den gjeldende valgte knappen.

Alternativer for øyestyring

- Fokuseringstid – angi fokuseringstiden som kreves for at øyestyringsbrukere skal kunne velge denne spesifikke knappen.

9.11 Språkregler for knapp

Innstillingen for språkregler for knapp lar deg spesifisere språket som vil brukes til symbolsøk, symbolering, ordprediksjon, bøyning, auto-morfing, og talestemme (dersom en språkspesifikk stemme er angitt for det språket) for den knappen.

Knapper overtar standard språkregelinstillinger fra Sidesettets nivåinnstillinger eller Sidenivåinnstillinger. Du kan manuelt angi språkreglene for en knapp ved å følge stegene nedenfor:



Rediger-knappen.

1. Velg
2. Velg en knapp.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Velg **Språkregler**.
5. Velg et språk fra listen:
 - **Fullt støttede språk** – påvirker symbolsøk, symbolisering, ordprediksjon, bøyning, auto-morfing og talestemme (dersom en språk-spesifikk stemme er angitt for det språket).

Det **Nøytrale** språket er primært for bruk med egennavn (for eksempel Harriet Tubman eller Amsterdam). Når ord som er tagget som Nøytrale sendes til Meldingsvinduet vil de bli lest opp i henhold til språkreglene for de andre ordene som da er i meldingsvinduet. Dersom meldingsvinduet ellers er tomt vil Nøytrale ord leses opp i henhold til språkregelinstillingene for den nåværende eller mest nylige ikke-nøytrale siden.

- **Andre språk** – språkene i denne kategorien har varierende nivåer av støtte i TD Snap®-appen.

9.12 Suffiks og prefiks


Bruk knapper med prefiks eller suffiks rett før eller etter et annet ord for å lage nye ord i meldingsvinduet.



Suffiks og prefiks fungerer kun på engelske språk for øyeblikket.

Brukerinnstillingen «Lag sammentrekninger automatisk» må være aktivert. Se avsnittet *14.12.2 Innstillinger for meldingsvindu, side 104*.

- Lag en separat knapp for hvert suffiks eller prefiks.
- Legg til en bindestrek der suffikset eller prefikset settes sammen med det andre ordet for å lage et nytt ord uten bindestrek. For eksempel «trist» + «-het» = «tristhet»
- Legg til to bindestreker der suffikset eller prefikset settes sammen med det andre ordet for å lage et nytt ord med bindestrek. For eksempel «ikke--» + «røyker» = «ikke-røyker»
- Stavereregler blir ikke brukt, så det er også mulig med feilstavede ord og ord som ikke finnes. For eksempel «glad» + «-het» = «gladhet», og «hopp» + «-ing» + «-else» = «hoppingelse»
- Både prefikset eller suffikset og det andre ordet må legges inn i Meldingsvinduet ved hjelp av Standardknapper, ikke tastaturtaster.

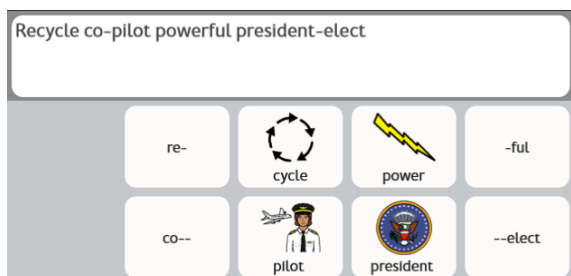

Illustrasjon 35: Knappeksempler med prefiks og suffiks

9.13 Redigering av støtte

Emnene inneholder forhåndslaget støtte som hjelp til selvregulering og sosial kommunikasjon. Du kan redigere støtte for å tilpasse det til dine egne behov. Se avsnittet 7.4.2 Støtte, side 24 for å lære mer om de ulike typene støtte.

1. Gå til siden som inneholder støtten du ønske å endre.



2. Velg **Rediger**-knappen.
3. Velg knappen for støtten som skal redigeres.
4. Velg **handlingen** (Miniplan, Timer, Først deretter eller Manus).
5. Velg blyant-ikonet på en av radene for å gjøre endringer.
6. Velg **Forhåndsvis**-knappen på bunnen av redigeringspanelet for støtte for å forhåndsvis endringene av støtten.
7. Når du er ferdig med å redigere, velger du **Ferdig**.

9.14 Fjernkontroller

Noen Tobii Dynavox-enheter, slik som Indi og I-110, er utstyrt med en IR-sender som kan kontrolleres gjennom TD Snap®-programvaren, slik at disse enhetene kan brukes som fjernkontroller for utstyr som TV-er og stereoanlegg. Sidesettet Core First kommer med forhåndslagde fjernkontroller-sider i Kontrollpanelet. Disse fjernkontroller-sidene inneholder knapper som er klare for at du kan programmere dem med dine fjernkontroll-kommandoer.



TD Snap®-fjernkontroller fungerer ikke på enhetene Tobii Dynavox I-12(+) eller I-15(+).

9.14.1 Programmer en Fjernkontrollknapp



Prosessen med å programmere fjernkontroll trenger kun å gjøres én gang per knapp.

Ha fjernkontrollen din tilgjengelig. Du vil trenge den for å lære enheten din IR-kommandoen.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg den knappen på skjermen som du ønsker å programmere til å sende IR-kommandoen.
3. Velg **Knapp**-fanen.
4. Velg **Handling**-kategorien.
5. Velg **Legg til handling**.
6. Velg **Send IR-signal**.
7. Velg **Spill inn**, og pek så fjernkontrollen mot IR-panelet på din Tobii Dynavox-enhet, og trykk inn knappen på fjernkontrollen.
8. Dersom du ser meldingen «Opptak vellykket!» velger du **Ferdig**.
Dersom du ser meldingen «Innspilling mislyktes. Vennligst prøv igjen.», går du tilbake til steg 7.

9.14.2 Bruk av fjernkontroller



Fjernkontroller er kun tilgjengelig for compatible Tobii Dynavox-enheter.

Du må sette opp fjernkontrollen din på forhånd ved å programmere hver knapp med den rette IR-kommandoen. Se 9.14.1 Programmer en Fjernkontrollknapp, side 66.



Illustrasjon 36: Kontrollpanel – fjernkontroller-knapp

1. Naviger til den fjernkontroll-siden som samsvarer med det utstyret (TV, stereoanlegg, etc.) som du ønsker å kontrollere.
2. Pek IR-vinduet på din Tobii Dynavox-enhet mot utstyret du ønsker å kontrollere.

3. Velg knappen for den ønskede kommandoen.

9.15 Rediger side

Endringer som gjøres i Side-fanen vil påvirke *kun den gjeldende siden*. Du kan bruke innstillingene i Side-fanen til å overstyre noen Sidesett-innstillinger. For eksempel, dersom du ønsker å ha Meldingslinjen synlig for de fleste sider, men ikke Kontrollpanel-siden, kan du gjøre det følgende: 1. Aktiver Meldingslinje i Sidesett-innstillinger. 2. Gå til Kontrollpanel-siden. 3. Velg Side-fanen. 4. Velg Valg 5. I Synlighet for meldingslinje på side, deaktiverer du Match sidesett-innstilling: På. 6. Angi Synlighet for meldingslinje til Av.


9.15.1 Sidenavn



Illustrasjon 37: Sidenavn



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Tast inn i **Etikett**-feltet for å redigere Sidenavnet.

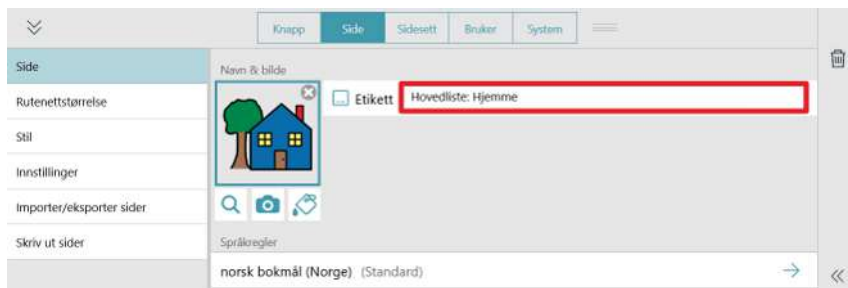

9.15.2 Sidesymbol



Illustrasjon 38: Sidesymbol



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Legg til eller endre Sidesymbolet:


For å søke etter et symbol i symbolsettet:

- Velg  **Symbolsøk**-knappen.
- Symbolsøk-dialogen vil åpnes.
- Tast inn i tekstfeltet for å avgrense søkebegrepene.




Valgfritt: Du kan filtrere søkeresultatene ved å velge egenskapene du ønsker å se i symbolsøkeresultatene (voksen, barn, kvinnelig, mannlig).

- Velg det ønskede symbolet.
- Velg **Ferdig**.

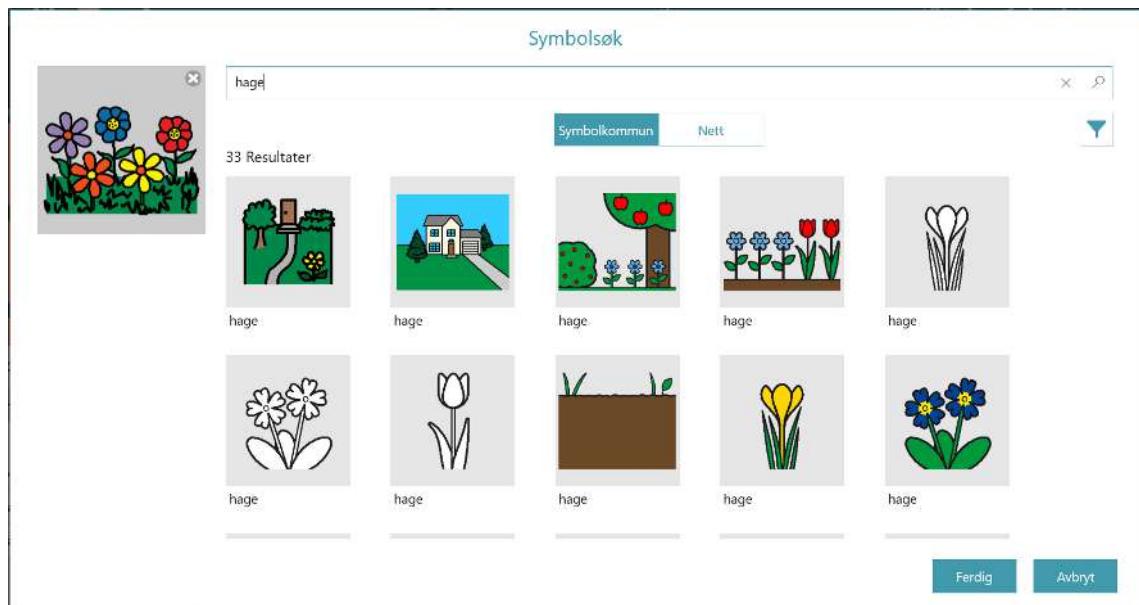

Slik søker du etter et bilde på nett (krever internettilkobling):

- Velg  **Symbolsøk**-knappen.
- Symbolsøk-dialogen vil åpnes.
- Velg fanen **Nett** og skriv inn et søkeord i tekstfeltet.
- Velg det ønskede bildet.
- Velg **Ferdig**.

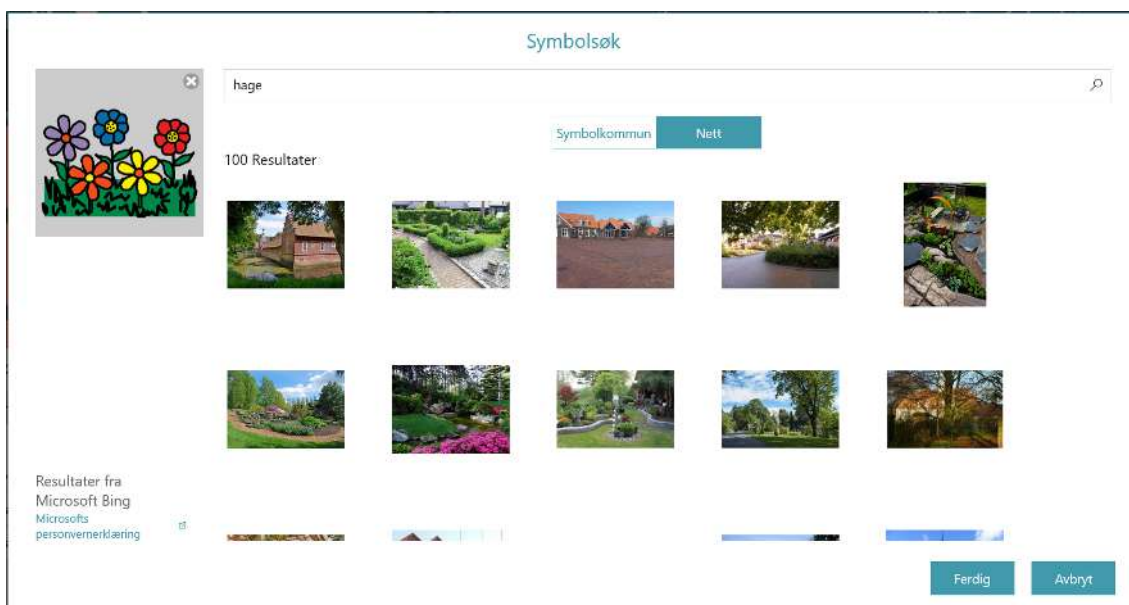

For å bruke kameraet til å ta et bilde til sidebildet:



- Velg **Kamera**-knappen.
- Velg **Fra kamera**.
- Bruk kameraet på enheten din for å ta et bilde.

For å bruke et bilde som er lagret på din lokale enhet:



- Velg **Kamera**-knappen.
- Velg **Fra fotogalleri**.
- Bruk filutforskeren for å navigere til den ønskede bildefilen.



Dersom du ikke ønsker å bruke et sidesymbol velger du **X** på Sidesymbolet.

9.15.3 Språkregler for side

Innstillingen for språkregler for side angir de standard språkreglene for knapper på siden. Innstillingen for språkregler kontrollerer språket som vil brukes til symbolsøk, symbolering, ordprediksjon, bøyning, auto-morfing, og talestemme (dersom en språkspesifikk stemme er angitt for det språket).

Knapper overtar standard språkregelinnstillinger fra Sidesettets nivåinnstillinger eller Sidenivåinnstillinger. Når du angir Språkreglene for side vil alle eksisterende knapper på siden overta den innstillingen, og nye knapper som opprettes på den siden vil også ha den innstillingen som standard. For å endre språkreglene for spesifikke knapper, se avsnittet 9.17 *Språkregler for knapp*, side 65.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Språkregler**.
4. Velg et språk fra listen:
 - **Fullt støttede språk** – påvirker symbolsøk, symbolisering, ordprediksjon, bøyning, auto-morfing og talestemme (dersom en språkspesifikk stemme er angitt for det språket).

Det **Nøytrale** språket er primært for bruk med egennavn (for eksempel Albert Einstein eller Coca-Cola). Når ord som er tagget som Nøytrale sendes til Meldingsvinduet vil de bli lest opp i henhold til språkreglene for de andre ordene som da er i meldingsvinduet. Dersom meldingsvinduet ellers er tomt vil Nøytrale ord leses opp i henhold til språkregelinnstillingene for Sidesettet.

- **Andre språk** – språkene i denne kategorien har varierende nivåer av støtte i TD Snap®-appen.

9.15.4 Rutenettstørrelse på side



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.

9.15.4.1 Endre side Rutenettstørrelse



1. Velg **Rediger-knappen**.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Rutenettstørrelse**-kategorien.
4. Angi **Match sidesett-innstilling** til **Av**.
5. Velg **Rutenettstørrelse**.
6. Velg en rutenettstørrelse fra Optimaliserte rutenettstørrelser eller angi antall rader og kolonner for å opprette en tilpasset rutenettstørrelse.



Om du ikke oppretter en fullstendig tilpasset side anbefales det på det sterkeste at du bruker Sidesettets Optimaliserte rutenettstørrelser. De optimaliserte rutenettstørrelsene vil vise det ferdig utfylte sideinnholdet slik det er utformet av ditt kliniske team, mens andre rutenettstørrelser kanskje ikke vil gjøre det.



Dersom du ønsker å vise Meldingslinjen og/eller Verktøylinjen må du velge en rutenettstørrelse på minst 3x3 eller større.

For å endre på størrelsen på mellomrommet mellom knappene, se avsnittet *10.3.7 Rutenettmarg i Sidesett*, side 81.

Tabell 11: Eksempler på rutenettstørrelser (ikke uttømmende)



2x3



3x4



6x6

9.15.5 Bakgrunnsfarge på side



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.

1. Naviger til siden som du ønsker skal ha en annen bakgrunnsfarge.



2. Velg **Rediger-knappen**.
3. Velg **Side**-fanen.
4. Velg **Stil**-delen.
5. Angi Sidebakgrunnsfarge match sidesett-innstilling til **Av**.
6. Velg **Farge**. Listen over Sidebakgrunnsfarger vil åpnes.
7. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

9.15.6 Vis/Skjul Meldingslinje



Denne innstillingens standard angis på Sidesett-fanen. Dersom du ønsker å overstyre Sidesettets standard i dette tilfellet angir du Match sidesett-innstillingen til **Av**. For å justere denne innstillingen til resten av Sidesettet angir du Match sidesett-innstillingen til **På**.

9.15.6.1 Endre Meldingslinjens synlighet



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Angi **Match sidesett-innstilling** til **På** for å matche den indikerte innstillingen, eller til **Av** for å gjøre Meldingslinjens synlighet ulik på denne siden i forhold til resten av Sidesettet.

9.15.7 Slett side



Sletting er en permanent operasjon. Slett kun en side dersom du er sikker på at du ikke kommer til å bruke den igjen i fremtiden.

1. Naviger til siden du ønsker å slette.



2. Velg **Rediger**-knappen.
3. Velg **Side**-fanen.
4. Velg  **Slett**. Dialogen Slett side åpnes.
5. Velg **Slett**-knappen for å slette siden permanent, eller **Avbryt** for å gå tilbake til Sideinnstillinger uten å slette siden.

9.15.8 Importer/eksporter sider

Se avsnittet 13.3 *Sidebunter*, side 94.

9.16 Skanngrupper

En skanngruppe er et område som inneholder knapper som skannes som en enkelt enhet. Når skanngruppen velges skannes knappene i det området. Bruk av skanngrupper kan gjøre bruk av tilgangsmåten skanning mye raskere.

For å bruke skanngrupper må tilgangsmåten Skanning være aktiv med Gruppeskann-innstillingen aktivert. For mer informasjon, se avsnittet 14.13.8 *Skanningsvalg*, side 112.

Opprett og rediger skanngrupper



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.



3. Velg **Skanngrupper**-verktøyet.
Den første skanngruppen opprettes automatisk for deg.




4. For å legge til områder i skanngruppen din velger du **Tegneverktøyet**, deretter klikker du på (eller klikker og drar over) områder på skjermen for å legge dem til i skanngruppen. Områdene kan være hvor som helst på siden, de trenger ikke være ved siden av hverandre.



5. For å fjerne områder fra skanngruppen velger du **Sletteverktøyet**, deretter klikker du på hvert område du vil fjerne fra gruppen.
- Du kan ikke legge til Meldingslinjen eller Verktøylinjen i en skanngruppe. Dette er fordi Meldingslinjen og Verktøylinjen alltid er sine egne skanngrupper.
- Skanngrupper defineres som områder på siden, ikke spesifikke knapper. Dersom du flytter en knapp kan den havne i en annen skanngruppe i den nye posisjonen.
- Skannerekkefølgen går fra venstre til høyre, fra øverst til nederst. Numrene på skanngruppene har ingen betydning for skannerekkefølgen.
- Knapper på siden som ikke er i en skanngruppe vil bli skannet hver for seg.
- Skanngrupper er spesifikke for rutenettstørrelsen.



6. For å opprette en ny skanngruppe velger du **+**-knappen i nedre venstre hjørne.
7. For å navigere mellom skanngrupper velger du den fargede sirkelen som matcher fargen på skanngruppen du ønsker å redigere.

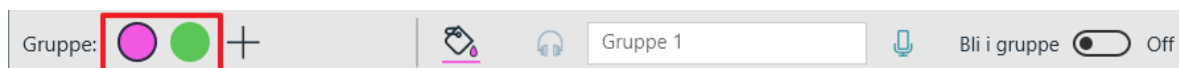

8. For å slette en skanngruppe velger du først skanngruppen slik det ble beskrevet i forrige steg, deretter velger du



Slett skanngruppe.



Bruk **Skroll opp**- og **Skroll ned**-pilene for å skrolle på siden.



9.16.1 Alternativer for skanngrupper


Farge på skanngruppe



- Velg fargeverktøyet for å velge en farge for den gjeldende skanngruppen. Fargene på skanngruppene vises kun i Redigeringsmodus, ikke i Bruksmodus.

Lydsignal for skanngruppe

- Tekst som legges til i lydsignalfeltet vil leses opp når gruppen skannes (dersom Les opp lyd-innstillingen er aktivert).

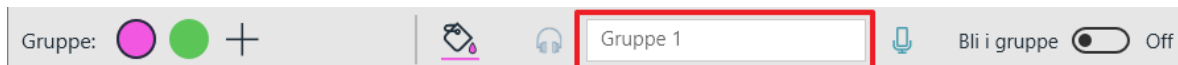

- Dersom du ønsker å ta opp en skreddersydd Auditiv tilbakemelding, se avsnittet 9.6.3.2 *Lag et opptak*, side 41.

Bli i gruppe

- Når denne er aktivert vil skanningen starte på nytt inne i skanngruppen etter at et valg er gjort. Dette gjør at brukere enkelt kan gjøre flere valg i samme gruppe. Når Bli i gruppe er deaktivert, vil skannerekkefølgen starte på nytt øverst på siden etter at et valg er gjort.

9.17 Rediger Meldingslinjen

Endringer av Meldingslinjen gjelder for hele sidesettet.

9.17.1 Flytte og endre størrelse på objekter i Meldingslinjen



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg det objektet (knapp eller meldingsvindu) i Meldingslinjen som du ønsker å endre størrelse på.
3. For å endre størrelse på objektet, velg og hold på en av de blå prikkene i hjørnene av objektet, og dra deretter for å justere til ønsket størrelse.
For å flytte objektet, velg og hold i midten av objektet, og dra det deretter til venstre eller høyre i Meldingslinjen.



Meldingsvinduet kan kun gjøres større inn i tomme celler.

9.17.2 Legg til knapper i Meldingslinjen




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en tom celle i Meldingslinjen.

Hvis det ikke er noen tomme celler i Meldingslinjen har du tre alternativer:

- Gjør Meldingsvinduet mindre. Se avsnittet 9.17.1 *Flytte og endre størrelse på objekter i Meldingslinjen*, side 73.
- Slett én eller flere knapper i Meldingslinjen. Se avsnittet 9.17.3 *Fjern knapper i Meldingslinjen*, side 74.
- Øk rutenettstørrelsen. Se avsnittet 10.2 *Rutenettstørrelse*, side 77.

- Velg en knapp fra menyen for å legge den til i Meldingslinjen. For å lære om Meldingslinje-knappene, se avsnittet 6 *Meldingslinjen*, side 19.

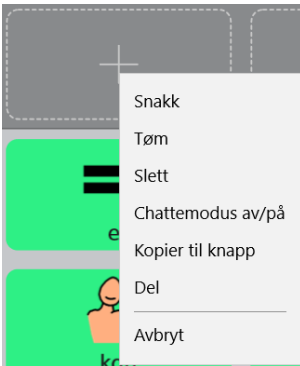

Illustrasjon 39: Knappemeny for Meldingslinje


9.17.3 Fjern knapper i Meldingslinjen



- Velg **Rediger**-knappen.
- Velg en knapp i Meldingslinjen.
- Velg  **Slett**.

 Meldingsvinduet kan ikke slettes.

9.18 Rediger Verktøylinjen

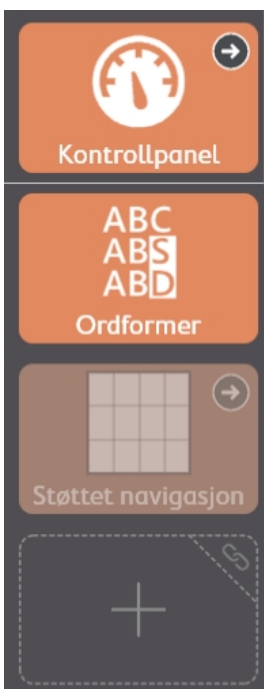

Illustrasjon 40: Verktøylinjen i Core First, vist i Redigeringsmodus, med knapper, skjulte knapper, og en tom celle.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg hvilken som helst knapp i verktøylinjen for å redigere den.
Du vil kanskje måtte skrolle for å se hele innholdet i verktøylinjen eller for å få tilgang til tomme celler i verktøylinjen.
3. Klikk og hold, og dra så knapper for å endre rekkefølgen på knappene i verktøylinjen.



Du kan ikke dra knapper mellom siden og verktøylinjen.

9.19 Tilpassede farger

Du kan opprette, redigere og lagre tilpassede farger fra alle fargemenyene i TD Snap®.

1. I Redigeringsmodus velger du objektet du ønsker å endre fargen på.
2. Velg **Stil**.
3. Velg det elementet du ønsker å endre farge på (knapperamme, knappbakgrunn, knappetikett, etc.).



4. Velg **Rediger farge**-knappen.
5. Velg **Lagre** for å lagre den nye fargen din. Velg **Avbryt** for å gå tilbake uten å lagre.
6. Lagrede tilpassede farger er tilgjengelige i den øverste delen av fargemenyen hver gang du åpner den.

For å slette en lagret tilpasset farge velger du fargen og deretter  **Slett**.



For å bruke fargeendringene på objekter i hele sidesettet velger du **Sidesett**-fanen.

10 Sidesettinnstillinger

10.1 Sidesett

10.1.1 Velg sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg raden under **Brukernavns Sidesett**.
4. Velg et Sidesett fra listen.

10.1.2 Opprett nytt sidesett

Opprett sidesett fra Forhåndsinstallert, Kopi av eksisterende brukers Sidesett, eller en lokal fil



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg raden under **Brukernavns Sidesett**.
4. Velg **Opprett sidesett**.
Dialogen Velg sidesett åpnes.
5. Velg et sidesett:
Forhåndsinstallerte sidesett-fanen
– Dette er forhåndsinstallerte sidesett installert i TD Snap® på enheten din.
Bruker-sidesett
– Velg et av de eksisterende Sidesettene dine til å bruke som mal (opprett en kopi).
Lokale filer
– Importer en Sidesett-fil (.sps) lagret på din lokale enhet eller på en tilkoblet disk.
6. Velg **Neste** for å opprette det nye Sidesettet.
7. Angi et navn for det nye Sidesettet.
8. Velg **Opprett** for å opprette Sidesettet. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til Sidesettinnstillinger uten å opprette det nye Sidesettet.

Last ned Sidesett fra myTobiiDynavox



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg det gjeldende Sidesettet.
4. Skroll ned og velg **Last ned sidesett**.
Du kan bli bedt om å logge deg på myTobiiDynavox.
5. Velg et Sidesett fra listen og velg så **Last ned**.
6. Når nedlastingen er fullført angir du et navn for Sidesettet, og velger så **Lagre**.

10.1.3 Gi nytt navn til Sidesett og Rediger beskrivelse



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.



3. I listen over Brukers Sidesett velger du **Rediger**-knappen ved siden av navnet på Sidesettet du ønsker å gi nytt navn. Dialogen Rediger sidesett-info åpnes.
4. Rediger teksten i **Navn**-feltet og/eller **Beskrivelse**-feltet.
5. Velg **Lagre** for å lagre endringene dine. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til listen over Sidesett uten å lagre.

10.1.4 Slett sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. I listen over Brukers Sidesett velger du  **Slett**-knappen ved siden av navnet på Sidesettet du ønsker å slette.
4. Velg den røde **Slett**-knappen.
5. Velg **Slett** for å permanent fjerne Sidesettet. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til listen over Sidesett uten å slette.



Du kan ikke slette det gjeldende aktive Sidesettet.

10.1.5 Angi Hjemmesiden



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Hjem-side**.
4. Velg en side fra listen.



Tast inn i søkefeltet for å finne en spesifikk side, eller velg Nylig åpnet for å finne en side du har besøkt nylig.

Den anbefalte Hjem-siden for rutenettstørrelser på 1x1 til 2x3 er Støttet navigasjon. For rutenettstørrelser på 3x3 og større er Kjernevokabular den foreslåtte Hjem-siden.

10.1.6 Angi Tastaturside



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Tastaturside**.
4. Velg en side fra listen.



Tast inn i søkefeltet for å finne en spesifikk side, eller velg Nylig åpnet for å finne en side du har besøkt nylig.

Bruk søkeordet «tastatur» for å hjelpe til med å begrense søkeresultatene til Tastatursider.

10.2 Rutenettstørrelse



Noen sidesett, for eksempel Motorplan og P.O.D.D., knytter bestemte rutenettstørrelser til bestemte versjoner av sidesettet. Du må velge en annen versjon av sidesettet for å bruke andre rutenettstørrelser med disse sidesettene.

Rutenettstørrelsen som er valgt i Sidesettinnstillinger er standard rutenettstørrelse for brukeren. Alle sider vil som standard ha den rutenettstørrelsen som er valgt i Sidesettinnstillinger om ikke annet er spesifisert i Sideinnstillinger.



1. Velg **Rediger**-knappen.

2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Rutenettstørrelse**-kategorien.
4. Velg en rutenettstørrelse fra listen over Optimaliserte rutenettstørrelser eller velg antall rader og kolonner for å opprette en tilpasset rutenettstørrelse.



Om du ikke oppretter en fullstendig tilpasset side anbefales det på det sterkeste at du bruker Sidesettets Optimaliserte rutenettstørrelser. De optimaliserte rutenettstørrelsene vil vise det ferdig utfylte sideinnholdet slik det er utformet av ditt kliniske team, mens andre rutenettstørrelser kanskje ikke vil gjøre det.



Dersom du ønsker å vise Meldingslinjen og/eller Verktøylinjen må du velge en rutenettstørrelse på minst 3x3 eller større.

For å endre på størrelsen på mellomrommet mellom knappene, se avsnittet *10.3.7 Rutenettmarg i Sidesett*, side 81.

Tabell 12: Eksempler på rutenettstørrelser (ikke uttømmende)



2x3



3x4



6x6

10.3 Sidesettstil

Innstillingene som angis i Sidesettstil definerer utseendet på Sidesettet. Alle sider i Sidesettet, inkludert nye sider, vil bruke disse stilinnstillingene om ikke de manuelt overstyres på side- eller knappenivå.

10.3.1 Hudfarge og hårfarge for symbol

Angi hudfarger og hårfarger som brukes på symboler som viser folk. Innstillingen Forskjellige har en rekke hudfarger og hårfarger og brukes som standard. Hvis du velger en bestemt hudfarge eller hårfarge, brukes disse valgene for alle symboler.



Innstillinger for symbolenes hudfarge og hårfarger gjelder **ikke** for:


- symboler som viser bestemte personer (kjendiser, historiske figurer osv.)
- symboler som vises i Boardmaker-aktiviteter som spilles i TD Snap
- symbolsettet Snap afasibilder
- Symboler som har blitt redigert i Symbolredigering

Innstillingen for hårfarge er ikke tilgjengelig hvis METACOM-symboler brukes i det gjeldende sidesettet.




Rediger-knappen.


1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Hudfarge** eller **Hårfarge** under Stil.
5. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Ikke angitt** – vis symbolene slik de ble designet av symbolartistene.
 - **Diverse** – bruk en rekke farger i symbolene.
 - **Ny** – lag en egendefinert farge som skal brukes på alle symboler.
 - **Farge** – velg en farge fra delen Farger som skal brukes på alle symboler.

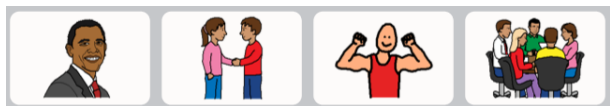

Illustrasjon 41: Hudtone og Hårfarge ikke angitt

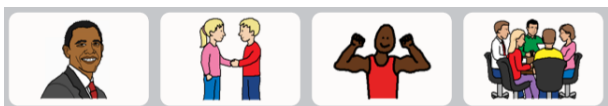

Illustrasjon 42: Hudtone og Hårfarge satt til Forskjellige

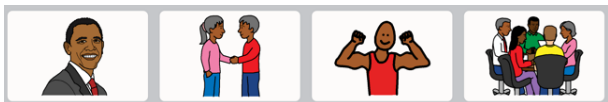

Illustrasjon 43: Hudtone og Hårfarge satt til spesifikke farger



Du kan redigere individuelle symboler ved hjelp av Symbolredigering. Se avsnittet 9.6.6 *Rediger symbol*, side 44.

10.3.2 Skrifttype på knappetiketter i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skrifttype** under Stil.
5. Velg en skrifttype.

10.3.3 Skriftstørrelse på knappetiketter i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skrifttype** under Stil.
5. Velg en skriftstørrelse.

10.3.4 Fet på knappetiketter i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Fet** under Stil.
5. Angi fet til På eller Av.


10.3.5 Knapputforming i Sidesett




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Knappeoppsett** under Stil.
5. Velg en utforming fra listen.




Etikett topp, bilde bunn

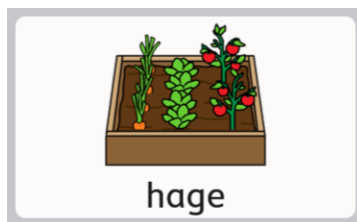

Etikett bunn, bilde topp

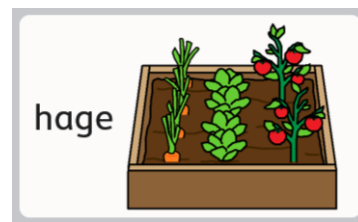

Etikett venstre, bilde høyre

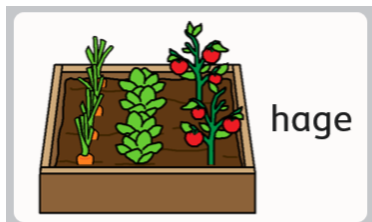

Etikett høyre, bilde venstre



Kun etikett



Kun bilde

10.3.6 Koblingsvisning i Sidesett

Angi utseendet på knapper som går til andre sider.

Tabell 13: Koblingsvisningsstiler

Ingen	Viser ingen visning av koblingen.	
Navigasjonsikon	Et lite ikon vises i hjørnet på knappen, som indikerer hva den gjør (lenke til en annen side, besøk side eller gå tilbake).	
Mapper for lenke	Lenke-knappen er formet som en mappe. Stil gjelder kun Koblingsknapper, ikke Gå tilbake- eller Besøk-knapper.	

Fane i hjørnet for lenke	Lenke-knappen har en grå trekant i det ene hjørnet. Stil gjelder kun Koblingsknapper, ikke Gå tilbake- eller Besøk-knapper.	
---------------------------------	---	--

10.3.7 Rutenettmarg i Sidesett

Angi størrelsen på mellomrommet mellom knappene.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Rutenettmarg-faktor** under Rutenettmarg.
5. Velg en størrelse for Rutenettmarg-faktor.

10.3.8 Standard bakgrunnsfarger i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg en av de følgende radene for å endre den spesifiserte bakgrunnsfargen:
 - **Sidebakgrunn** – standard farge for sidebakgrunn.
 - **Verktøylinje-bakgrunn** – standard farge for bakgrunnen i Verktøylinjen.
 - **Meldingslinje-bakgrunn** – standard farge for bakgrunnen i Meldingslinjen (ikke Meldingsvinduet).



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

10.3.9 Skrifttype for Meldingsvindu i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skrifttype** under Meldingsvindu.
5. Velg en skrifttype.

10.3.10 Skriftstørrelse på Meldingsvindu i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Skriftstørrelse** under Meldingsvindu.
5. Velg en skriftstørrelse.

10.3.11 Tekstfarge for Meldingsvindu i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Tekstfarge** under Meldingsvindu.
5. Velg en tekstfarge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger, side 75*.

10.3.12 Bakgrunnsfarge for meldingsvindu i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Bakgrunn** under Meldingsvindu.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger, side 75*.

10.3.13 Markeringsfarge for tale for meldingsvindu i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Markeringsfarge for tale** under Meldingsvindu.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger, side 75*.

10.3.14 Bakgrunnsfarge for meldingslinje i Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Meldingslinje-bakgrunn** under Meldingsvindu.
5. Velg en farge.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger, side 75*.

10.3.15 Navigasjonsknappens stil



1. Velg **Rediger**-knappen.

2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Stil**-kategorien.
4. Velg **Navigasjonsknappens stil** under Navigasjonsknapper.
5. Når Automatisk er aktivert, konfigureres fargene automatisk for kontrast og synlighet i forhold til bakgrunnsfargen på siden. Når Automatisk er deaktivert, angir du bakgrunnsfarge, rammefarge, pilfarge og rammetykkelse som skal brukes for navigasjonsknappen i hele sidesettet.



Du kan lage dine egne tilpassede farger! Se avsnittet 9.19 *Tilpassede farger*, side 75.

10.4 Sidesettvalg



1. Velg **Rediger**-knappen.

2. Velg **Sidesett**-fanen.

3. Velg **Innstillinger**.

4. Velg en av de følgende for å endre den spesifiserte innstillingen:

Grensesnitt

- **Meldingslinje på:** Når denne er aktivert, vil Meldingslinjen som standard vises på hver side.
- **Plassering av verktøylinje:** Velg å vise verktøylinjen på venstre eller høyre side av hver side, eller å slå av verktøylinjen.

Verktøylinje-rader

- **Match sidesett-innstilling:** Når denne er aktivert vil antallet rader som er tilgjengelig i verktøylinjen matche antallet rader i det valgte sidesettet. For å endre antallet rader i verktøylinjen separat fra rutenettstørrelsen på siden deaktiverer du denne innstillingen og angir ønsket antall rader.

Meldingsvindu

- **Bøy grammatikk-knapper automatisk:** Når dette er aktivert, vil grammatikkknapper dynamisk oppdateres for å matche den grammatiske konteksten av innholdet i Meldingsvinduet.
- **Lag sammentrekninger automatisk:** Når dette er aktivert, vil ord etter hverandre kombineres for å danne vanlige motsigelser eller sammensatte ord.

Sidesett-skanngrupper


- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz:** Angi rekkefølgen for hvordan sidesettets skanngrupper; siden, verktøylinjen og meldingslinjen skal skannes. Angi skannerekkefølgen, lydsignalene og Bli i gruppe-innstillingene for sidesettets skanngrupper; siden, verktøylinjen og meldingslinjen.

10.5 Tilpassbare knapper



Dette avsnittet gjelder kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheter.

De tilpassbare knappene som du finner på forsiden av Tobii Dynavox I-13 og I-16-enheter, kan velges med Berøring eller

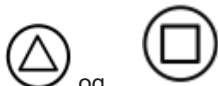

Øyestyling. To av disse knappene, og , kan programmeres med TD Snap®-handler som vil utføres dersom de velges med Øyestyling ved bruk av TD Snap®.

Angi Øyestyling-handler for tilpassbare knapper



1. Velg **Rediger**-knappen.

2. Velg **Sidesett**-fanen.

3. Velg **Tilpassbare knapper**.



4. Velg eller fra listen.

5. Velg **Legg til handling**.

6. Velg en handling.



For å legge til ytterligere handlinger, gjenta steg 5 og 6.

Angi berøringshandlinger for tilpassbare knapper



Berøringsadferden for tilpassbare knapper angis i appen Tobii Dynavox Hardware Settings. Du kan starte denne appen med en gang ved å bruke snarveien som ligger på skrivebordet ditt, eller via TD Snap®, slik det beskrives nedenfor.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Tilpassbare knapper**.
4. Velg **Angi handlinger for berøring**. Appen Tobii Dynavox Hardware Settings vil starte.
5. Bruk nedtrekksmenyene i Hardware Settings-appen for å velge handlinger for de tilpassbare knappene når de velges ved bruk av berøring.



Berøringsadferden for tilpassbare knapper angis i appen Tobii Dynavox Hardware Settings. Du kan starte denne appen med en gang ved å bruke snarveien som ligger på skrivebordet ditt, eller via TD Snap®, slik det beskrives nedenfor.

10.6 Om Sidesett

Denne delen viser versjonsnummeret for Sidesettet og innstillinger for innholdsutvikler.

10.6.1 Innstillinger for innholdsutvikler i Sidesett

Spesielle innstillinger for avanserte Sidesett-skapere.

10.6.1.1 Angi optimaliserte rutenettstørrelser

Angi hvilke rutenettstørrelser som vises i listen over Optimaliserte rutenettstørrelser for dette Sidesettet.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Om**.
4. Velg **Innstillinger for innholdsutvikler**.
5. Velg **Rutenettstørrelser**.
6. For å legge til en ny rutenettstørrelse i listen skroller du til høyre og velger **Legg til ny størrelse**. Dialogen Legg til optimalisert rutenettstørrelse åpnes.
7. Velg antall **Rader** og **Kolonner** for den nye Optimaliserte rutenettstørrelsen (opp til 15x15), og velg så **Lagre**.
8. For å fjerne en Optimalisert rutenettstørrelse velger du **Slett**-ikonet på rutenettstørrelsen i listen. Dialogen Advarsel om sletting av rutenettstørrelse vises. Dersom du er sikker på at du ønsker å slette rutenettstørrelsen velger du **Slett**. Ellers velger du **Avbryt** for å lukke advarselen uten å slette.

10.6.1.2 Språkregler for sidesett

Innstillingen for språkregler for sidesett angir de standard språkreglene for knapper og sider i Sidesettet. Innstillingen for språkregler kontrollerer språket som vil brukes til symbolsøk, symbolering, ordprediksjon, bøyning, auto-morfing, og talestemme (dersom en språkspesifikk stemme er angitt for det språket).

Knapper overtar standard språkregelinnstillinger fra Sidesettets nivåinnstillinger eller Sidenivåinnstillinger. Når du angir Språkreglene for sidesett vil alle eksisterende knapper i Sidesettet overta den innstillingen, og nye knapper som opprettes i Sidesettet vil også ha den innstillingen som standard. For å endre språkreglene for spesifikke sider i Sidesettet, se 9.15.3 *Språkregler for side*, side 69. For å endre språkreglene for spesifikke knapper, se avsnittet 9.11 *Språkregler for knapp*, side 65.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg **Om**.
4. Velg **Innstillinger for innholdsutvikler**.
5. Velg **Språkregler**.
6. Velg et språk fra listen:
 - **Fullt støttede språk** – påvirker symbolsøk, symbolisering, ordprediksjon, bøying, auto-morfing og talestemme (dersom en språk-spesifikk stemme er angitt for det språket).
 - **Andre språk** – språkene i denne kategorien har varierende nivåer av støtte i TD Snap®-appen.

11 Print

Skriv ut én eller flere sider på papir eller til PDF.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.



3. Velg **Skriv ut** i redigeringsverktøylinjen på høyre side av skjermen. Dialogen Velg sider for utskrift åpnes. Du kan også skrive ut fra **Skriv ut sider**-delen på Side-fanen.
4. Den gjeldende siden legges automatisk til i utskriftskøen. Velg flere sider fra listen for å legge dem til i utskriftskøen.
 - Skriv i Søkefeltet for å søke etter sidenavn.
 - For å legge alle sider i det gjeldende søkeresultatet til i utskriftskøen, huk av for **Velg alle**.
 - Hvis du huker av for Velg alle og deretter fjerner haken på Velg alle, vil utskriftskøen nullstilles.
 - For å fjerne sider fra utskriftskøen, velg **X** ved siden av sidenavnet.
5. Når ønsket antall sider er lagt til i utskriftskøen, velg **Neste**.



6. Velg utskriftsalternativer. Forhåndsvisningen oppdateres for å reflektere de gjeldende innstillingene.



- **Meldingslinje:** Deaktiver denne innstillingen for å skjule meldingslinjen på de utskrevne sidene.
 - **Verktøylinje:** Deaktiver denne innstillingen for å skjule verktøylinjen på de utskrevne sidene.
 - **Visning av kobling:** Deaktiver denne innstillingen for å skjule koblingsindikator-ikoner på koblingsknapper på de utskrevne sidene.
 - **Brukstallere for knapper:** Aktiver denne innstillingen for å vise gjeldende brukstallere for knapper på de utskrevne sidene. Merk: Datasporing må være aktivert for å kunne se brukstallere for knapper.
7. Når du er ferdig med å velge utskriftsalternativer velger du **Skriv ut**.
 8. Velg skriver (eller skriv ut til PDF), fargeinnstillinger og papirretning. Innstillinger for papirstørrelse er tilgjengelig under **Flere innstillinger**.

Merk: Denne dialogen vil variere avhengig av plattformen din og standard skriverinnstillinger.

Når du er ferdig med å konfigurere skriverinnstillingene, velger du **Skriv ut**.



12 Google Assistant

Oppdag fordelene ved en smartassistent takket være integreringen med Google-assistenten i TD Snap®. Få umiddelbar tilgang til informasjon, underholdning, omgivelseskontroll og mer, direkte gjennom programvaren.



Kontraindikasjon: TD Snap®, Google-assistenten, og andre tilknyttede smarte apparater bør aldri være det eneste midlet for kommunisering av viktig informasjon for brukeren.



TD Snap®, Google-assistenten og andre tilknyttede smarte apparater eller høyttalere må ikke brukes som livsoppretholdende utstyr eller til andre kritiske formål, og de må ikke stoles på i tilfelle funksjonsfeil som resultat av strømbrytning eller andre årsaker.



Tobii Dynavox tar ikke ansvar for noen brukers adferd, og frasier seg alt ansvar for tap og/eller skade (inkludert, men ikke begrenset til skade på eiendom, personskade og død) i forbindelse med bruken av TD Snap®, Google-assistenten, smarte apparater, -høyttalere, eller noen kombinasjon av disse.



Dersom du bruker annet utstyr i tillegg til en ekstern Google-høyttaler, må du ha en åpen kommunikasjonsenhet. Kontakt Tobii Dynavox teknisk support dersom du trenger hjelp til å åpne enheten.

12.1 Koble til Google-kontoen din

For å bruke Google-assistenten, smarthøyttalere og smarte apparater, må du først logge inn på Google-kontoen din i TD Snap®. Se avsnittet *14.11 Google-konto, side 104*.

12.2 Oppsett av Google-enhetene dine

Følg instruksjonene som fulgte med enhetene dine for å fullføre oppsettet før du bruker dem sammen med TD Snap®.

12.3 Språkstøtte for Google-assistenten

Det er viktig at du setter opp din Google-assistent med de samme språkene som brukes med TD Snap®.



Før du endrer språk for Google-assistenten må du sørge for at mobilenheten eller nettbrettet er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket, eller koblet til den samme kontoen, som din Google Nest, Google Home-høyttaler eller annen Google-assistent-aktivert enhet.

For å endre språket for Google-assistenten:

1. På mobilenheten din åpner du appen **Google Home** eller **Google-assistent**.
2. Øverst i høyre hjørne velger du kontoen din > **Assistant-innstillinger**.
3. Velg **Assistant** > **Språk**.
4. Velg ditt gjeldende språk.
5. Velg et nytt språk.

For å legge til et andre språk for Assistant:

1. På mobilenheten din åpner du appen **Google Home** eller **Google-assistent**.
2. Øverst i høyre hjørne velger du kontoen din > **Assistant-innstillinger**.
3. Velg **Assistant** > **Språk** > **Legg til et språk**.
4. Velg et språk til.



Du kan snakke til Google-assistenten på begge språkene, men ikke en blanding av begge språk i én og samme ytring.

12.4 Snakk med Google-assistenten

Vi oppfordrer deg til å begynne med våre Google-assistent-sider*. Disse sidene finner du i Kontrollpanelet for de fleste sidesett, eller du kan laste ned og importere sidene fra mytobiidynavox.com/PagesetCentral. Google-assistent-sidene inneholder knapper som gjør at du kan bruke Google-assistenten til å finne informasjon, spille av musikk, ta telefonsamtaler, styre hjemmekontroller og mer.

**Google-assistenten og Google-assistent-sidene er ikke tilgjengelig i alle markeder og på alle språk.*

Se nedenfor for å opprette dine egne Google-assistent-knapper.



For å bruke Google-assistenten må du være tilkoblet internett, og logget inn med Google-kontoen din i TD Snap® og på alle Google-assistent-tilkoblede enheter som du planlegger å bruke.

Du kan sende kommandoer til Google-assistenten på litt ulike måter, avhengig av utstyret ditt. Sørg for at du følger instruksjonene for utstyret du bruker. Se etter ikonene nedenfor for å finne trinnene som gjelder for deg.



Kun Google-assistent-konto, ikke noe ytterligere utstyr.



Google Nest Mini eller annen Google-høytaler.



Opprett en knapp som sender en forhåndsprogrammert Google-assistent-kommando til en Google-høytaler

Dette alternativet er best for Google-assistent-kommandoer som skal brukes mer enn én gang.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.



3. I meldingsfeltet skriver du kommandoen du ønsker å sende til Google-assistenten. Denne meldingen må begynne med «OK Google», etterfulgt av et spørsmål eller en kommando.
4. I Handler-delen velger du handlingen **Les opp- eller sett inn melding**.
5. Velg **Alltid snakk**.



For å sende unike Google-assistent-kommandoer på farten følger du trinnene over for å opprette en knapp som kun inneholder meldingen «OK Google». I Brukermodus kan du komponere en Google-assistent-kommando i meldingsvinduet, velge OK Google-knappen, og deretter lese opp meldingsvinduet for å sende kommandoen.



Opprett en knapp som sender knappmeldingsteksten til Google-assistenten på enheten din

Dette alternativet er best for Google-assistent-kommandoer som skal brukes mer enn én gang.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.



3. I meldingsfeltet skriver du spørsmålet eller kommandoen du ønsker å sende til Google-assistenten. Ikke skriv «OK Google» før spørsmålet eller kommandoen.
4. Velg **Legg til handling**.
5. Bla ned til Omgivelseskontroll-delen og velg **Send Google-assistent-kommando**.
6. Velg **Send knappmeldingstekst til Google-assistenten**.



Opprett en knapp som sender meldingsvinduteksten til Google-assistenten på enheten din

Denne typen knapp gjør at brukeren kan komponere unike Google-assistent-kommandoer i meldingsvinduet, og deretter sende dem til Google-assistenten.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg en knapp.
3. Velg **Legg til handling**.
4. Bla ned til Omgivelseskontroll-delen og velg **Send Google-assistent-kommando**.
5. Velg **Send meldingsvindutekst til Google-assistenten**.



Hvis du ikke får resultatet du forventet, kan du prøve å formulere deg annerledes. For eksempel, «OK Google, slå på lyset», slo ikke på smartpæren. I stedet fungerte «OK Google, slå på lyset i stuen», fordi smartpæren var satt opp i stuen i Google Home-appen.

13 Deling og lagring

TD Snap® tilbyr flere praktiske måter å dele og lagre brukere, sidesett og sider på. Uansett om du ønsker å beholde Sidesettet ditt likt på tvers av alle enhetene dine, eller om du vil sende noen nye sider til en venn - vi har løsningene!

- **Eksporter/importer lokalt** (Bruker, Sidesett, Sidebunt) – brukes når du lagrer en fil på din lokale maskin, når du skal dele på en USB-enhet, eller med personer som ikke har en myTobiiDynavox-konto.
- **Eksporter/importer gjennom myTobiiDynavox*** (Sidesett, Sidebunt) – del Sidesett og Sidebunter med andre myTobiiDynavox-brukere. Lagre og få tilgang til filer privat på din egen myTobiiDynavox-konto.
- **Synkroniser*** (Sidesett) – del pågående endringer på et Sidesett på tvers av enhetene dine og med spesifiserte myTobiiDynavox-brukere. Et Sidesett som deles via Synkroniser oppbevarer en oppdatert versjon av Sidesettet i skyen, slik at endringer som gjøres i Sidesettet på en hver godkjent enhet/konto deles på tvers av alle synkroniserte enheter/kontoer for det Sidesettet.

*Disse delingsmetodene krever en aktiv internettilkobling.

Tabell 14: Filtyper for deling og lagring – hva de inneholder

Filtype	Sider	Sidevalg	Sidesettvalg	Brukervalg	Systemvalg
Bruker	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Sidesett	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Sidebunt	Ja (spesifiserte sider)	Ja	Nei	Nei	Nei

13.1 Brukere

Sikkerhetskopierte brukerfiler inneholder Sidesettene og innstillingene som er tilknyttet den brukeren. Sikkerhetskopierte brukerfiler inneholder ikke stemmer. Stemmeinnstillinger er imidlertid ivaretatt, og den valgte stemmen vil lastes ned automatisk dersom den ikke er tilgjengelig på enheten (internettilkobling kreves).

Sikkerhetskopier en bruker

Se avsnittet 14.3 Sikkerhetskopier en bruker, side 97.

Gjenopprett en bruker

Se avsnittet 14.4 Gjenopprett en bruker, side 98.

13.2 Sidesett

En Sidesett-fil inneholder alle sidene som er knyttet til det Sidesettet. Den inneholder ingen brukerinformasjon eller innstillinger på brukernivå.

13.2.1 Importer et Sidesett

Fra myTobiiDynavox



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg det gjeldende Sidesettet.
4. Skroll ned og velg **Last ned sidesett**.
Du kan bli bedt om å logge deg på myTobiiDynavox.
5. Velg et Sidesett fra listen og velg så **Last ned**.
6. Når nedlastingen er fullført angir du et navn for Sidesettet, og velger så **Lagre**.

Fra en lokal fil



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg det gjeldende Sidesettet.
4. Velg **Opprett sidesett**.
5. Velg **Lokale filer**-fanen.
6. Velg **Bla gjennom**.
7. Navigér til den ønskede .sps-filen, velg den, og velg deretter **Apne**.
8. Velg **Neste**.
9. Tast inn et unikt navn for Sidesettet, og velg så **Opprett**.

13.2.2 Lagre en kopi av et Sidesett

13.2.2.1 Lagre Sidesett i myTobiiDynavox

Sidesett lagret i myTobiiDynavox finner du på myTobiiDynavox.com i Mine ting > Snap > Sidesett



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg det gjeldende Sidesettet.
4. Velg  **Lagre**-ikonet ved siden av Sidesettet du ønsker å lagre.
5. Velg **Lagre en kopi i myTobiiDynavox**.
6. Tast inn et unikt navn for Sidesettet, og (eventuelt) en beskrivelse, og velg så **Lagre**.
7. En statuslinje viser lagringsfremgangen. Når den er fullført, velg **Ferdig**.



Du kan bli bedt om å logge deg på myTobiiDynavox.

13.2.2.2 Lagre Sidesett lokalt



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg det gjeldende Sidesettet.
4. Velg  **Lagre**-ikonet ved siden av Sidesettet du ønsker å lagre.
5. Velg **Lagre en kopi til en lokal fil**.
6. Tast inn et unikt navn for Sidesettet, og (eventuelt) en beskrivelse, og velg så **Neste**.
7. Velg **Bla gjennom**. Naviger til katalogen der du ønsker å lagre Sidesett-filen, og velg så **Lagre**.
8. Velg **Lagre**.
9. En statuslinje viser lagringsfremgangen. Når den er fullført, velg **Ferdig**.

13.2.3 Del en kopi av et Sidesett (via myTobiiDynavox)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Sidesett**-fanen.
3. Velg  **Del Sidesett**-ikonet ved siden av Sidesettet du ønsker å dele.
4. Velg **Del en kopi**.

5. Tast inn et unikt navn for Sidesettet, og (eventuelt) en beskrivelse, og velg så **Neste**.
6. Tast inn myTobiiDynavox-brukernavnet eller e-postkontoen til den personen du skal sende Sidesettet til, og velg så + for å legge dem til i mottakerlisten. Gjenta denne prosessen for å legge flere mottakere. Når du har lagt til alle mottakerne velger du **Del**.
7. En statuslinje viser delingsfremgangen. Når den er fullført, velg **Ferdig**.



Dersom du ønsker å lagre en kopi av et Sidesett lokalt (for å dele via en USB-disk, e-post osv.), se 13.2.2.2 Lagre Sidesett lokalt, side 91.

13.2.4 Synkroniser sidesett

Synkroniser er en enkel måte å bevare den samme versjonen av et Sidesett på tvers av flere enheter. Synkronisering lagrer en oppdatert versjon av Sidesettet ditt i skyen. Når du trykker på Synkroniser-knappen, sender du endringene du har gjort på Sidesettet på din lokale enhet, og du mottar også endringer som har blitt gjort på andre (synkroniserte) enheter*. Når alle enheter er synkroniserte, vil de alle ha den samme versjonen av Sidesettet.

Synkroniser-knappen i topplinjen gir deg beskjed når en oppdatert versjon av Sidesettet er tilgjengelig, eller når du har lokale endringer å sende til skyen.

*Synkroniser støtter ikke sammenslåing av endringer fra flere enheter i den samme Synkroniseringen. Dersom endringer gjøres på den samme siden samtidig på flere enheter, vil den siste enheten som synkroniserer overskrive med sin versjon av siden. Personene som er involvert i redigering av et synkronisert Sidesett bør kommunisere sammen om hvilke sider de redigerer, og synkronisere ofte, slik at man unngår synkronisering av den samme siden samtidig.



Ved synkronisering på tvers av flere enheter eller brukere må innstillingen for navigeringstype stemme overens for alle synkroniserende enheter/brukere. Se avsnittet 14.13 Tilgangsmåte, side 105.



Synkronisering fungerer med sidesett på opptil 1 GB. Sidesett på over 1 GB synkroniseres ikke.

13.2.4.1 Synkroniser Sidesett til myTobiiDynavox

Når du synkroniserer et Sidesett til myTobiiDynavox vil du ha en kopi av Sidesettet ditt lagret på serveren til myTobiiDynavox. Du kan bruke dette som et raskt og enkelt system for sikkerhetskopiering av sidesett, og hvis du har andre enheter som kjører TD Snap®, kan du synkronisere sidesettet på de enhetene også.

Oppsett av Sidesett for synkronisering



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen. Du kan bli bedt om å oppgi ditt brukernavn og passord for myTobiiDynavox.
2. Velg **Synkroniser**.
3. Det var alt! Sidesettet ditt er nå synkronisert med din myTobiiDynavox-konto.



Hver gang du redigerer Sidesettet ditt må du velge Synkroniser-knappen i Topplinjen for å sende de endringene til skyen.

Synkroniser Sidesettet på ytterligere enheter

Dersom et Sidesett allerede er satt opp til å Synkronisere på en av enhetene dine kan du synkronisere ytterligere enheter ved å følge stegene nedenfor på hver enhet.



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen. Du kan bli bedt om å oppgi ditt brukernavn og passord for myTobiiDynavox.



2. Velg **Last ned Sidesett**-ikonet.
3. Velg det Sidesettet du ønsker å laste ned og synkronisere, og velg så **Last ned**.
4. Når nedlastingen er fullført, velger du **Ferdig**.
Det nedlastede synkroniserte Sidesettet angis automatisk til å være det aktive Sidesettet.

 Hver gang du redigerer Sidesettet ditt må du velge Synkroniser-knappen i Topplinjen for å sende de endringene til skyen og gjøre det oppdaterte Sidesettet tilgjengelig for Synkronisering på de andre enhetene. Beste praksis er å synkronisere før du gjør endringer i Sidesettet, og så synkronisere igjen så snart du er ferdig med å redigere.

13.2.4.2 Inviter noen til å synkronisere med ditt Sidesett

Når andre myTobiiDynavox-brukere synkroniserer med ditt Sidesett er de i stand til å gjøre endringer på Sidesettet på sin(e) enhet(er) og synkronisere de endringene til skyen. Neste gang du synkroniserer på din enhet vil du motta deres endringer. På samme måte, når du gjør endringer på Sidesettet og så synkroniserer, vil de endringene bli tilgjengelige for de andre brukerne som du har tillatt å synkronisere med ditt Sidesett.

Synkroniser kan ikke sammenslå endringer fra flere brukere som har redigert den samme siden samtidig. I så tilfelle vil den siste brukeren som Synkroniserer overskrive siden med sin versjon. Du bør synkronisere umiddelbart før og etter du gjør endringer på Sidesettet og kommunisere med andre brukere som synkroniserer med ditt Sidesett for å unngå å redigere den samme siden samtidig.

Du bør bare synkronisere med personer du stoler på at vil gjøre passende endringer på Sidesettet ditt.

 Hver gang du redigerer Sidesettet ditt må du velge Synkroniser-knappen i Topplinjen for å sende de endringene til skyen og gjøre det oppdaterte Sidesettet tilgjengelig for Synkronisering for andre enheter eller brukere.

 Beste praksis er å synkronisere før du gjør endringer i Sidesettet, og så synkronisere igjen så snart du er ferdig med å redigere.



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen. Du kan bli bedt om å oppgi ditt brukernavn og passord for myTobiiDynavox.



2. Velg **Del Sidesett**-ikonet.
3. Tast inn myTobiiDynavox-brukernavnet eller e-postadressen til den personen du deler Sidesettet med, og velg så **+** for å legge dem til i mottakerlisten. Gjenta denne prosessen for å legge flere mottakere. Når du har lagt til alle mottakerne velger du **Del**.
4. Når delingsprosessen er fullført, velger du **Ferdig**. Mottaker(ne) vil motta delingsvarsler per e-post og i TD Snap®-appen.

 Det kan ta opp til en time etter invitasjonen er sendt før synkroniseringsvarsler vises. Du kan sjekke etter varsler når som helst ved å velge Synkronisering-ikonet.

13.2.4.2.1 Inndra synkroniseringstillatelser

Du kan når som helst fjerne brukere fra Synkroniserte Sidesett (som du eier).



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen.
2. Velg **Del Sidesett**-ikonet.
3. Brukere med synkroniseringstillatelse for det gjeldende Sidesettet er listet opp i den blå boksen. For å fjerne en bruker velger du **X** ved siden av navnet/e-postadressen deres, og velger så **Oppdater**.
4. Velg **Ferdig**.

13.2.4.3 Synkroniser med Sidesett som er eid av andre

Når noen deler et Sidesett for synkronisering med deg vil Sykroniser-ikonet i topplinjen vise et varselikon



. Følg stegene nedenfor for å akseptere eller avvise invitasjonen.

Det kan ta opp til en time etter invitasjonen er sendt før synkroniseringsvarsler vises.

Aksepter Synkroniseringsinvitasjonen



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen.



2. Velg **Last ned Sidesett**-ikonet.
3. Velg **Bla gjennom Sidesett tilgjengelige på din myTobiiDynavox-konto**.
4. Velg det Sidesettet du ønsker å laste ned og synkronisere, og velg så **Last ned**.
5. Når nedlastingen er fullført, velger du **Ferdig**.

Avvis Synkroniseringsinvitasjonen



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen.



2. Velg **Last ned Sidesett**-ikonet.
3. Velg **Bla gjennom Sidesett tilgjengelige på din myTobiiDynavox-konto**.
4. Velg det Sidesettet du ønsker å avvise, og velg så  **Slett**-ikonet.
5. Velg **Avvis**.

13.2.4.4 Tilbakestill synkronisert Sidesett til en tidligere lagret versjon

Du kan gå tilbake til en tidligere versjon av et synkronisert Sidesett. Denne funksjonen er nyttig dersom du har gjort endringer på Sidesettet som du ønsker å forkaste eller angre.



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen.
2. Velg **Lagrede versjoner**.
3. Finn den synkroniseringsdatoen du ønsker å gjenopprette i listen, og velg så **Gjenopprett**.

13.2.4.5 Overskriv synkronisert Sidesett

Bruk Overskriv for å garantere at den gjeldende versjonen av Sidesettet er den versjonen av Sidesettet som også er lagret i skyen (uavhengig av endringer som kan ha blitt synkronisert av andre brukere).



1. Klikk på **Synkroniser**-knappen i Topplinjen.
2. Velg **Avansert**.
3. Velg **Overskriv**.

13.2.4.6 Kun-trekk-synkronisering

Når du synkroniserer i Kun-trekk-modus vil du motta Sidesett-endringer (gjort på andre enheter) men du vil ikke sende noen Sidesett-endringer gjort på den gjeldende enheten. For å bruke Kun-trekk-modus må tilgang til Redigeringsmodus begrenses med et passord. For å sette opp Kun-trekk-modus og et passord, se avsnittet *15.1.1 Passord, side 119*.

13.3 Sidebunter

Du kan dele et undersett av Sidesettet ditt (én eller flere sider etter eget valg) som en Sidebunt. Sidebunter inneholder kun de spesifiserte sidene. Dersom sidene inneholder knapper med koblinger til sider som ikke eksisterer på mottakerenheten vil koblingene ikke gjøre noe som helst.

13.3.1 Eksporter sidebunt

Eksporter sidebunt til myTobiiDynavox



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Importer/eksporter sider**.
4. Velg **Eksporter sidebunt**.
5. Velg **Til myTobiiDynavox**.
6. Velg de sidene du ønsker å inkludere i Sidebunten. Valgte sider viser en hake i listen og vises i den blå boksen. Den gjeldende siden inkluderes automatisk i Sidebunten. For å fjerne den eller en annen side fra Sidebunten velger du X ved siden av sidenavnet i den blå boksen.
7. Når du har lagt til de ønskede sidene i Sidebunten velger du **Neste**. Dialogen Gi navn til Sidebunten åpnes.
8. Tast inn et navn for Sidebunten i Navn-feltet og (eventuelt) beskriv sidene i Beskrivelse-feltet.
9. Velg **Eksporter** for å lagre Sidebunten til myTobiiDynavox.
10. Når eksporten er fullført, velger du **Ferdig**.

Eksporter Sidebunt til en lokal fil



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Importer/eksporter sider**.
4. Velg **Eksporter sidebunt**.
5. Velg **Til en lokal fil**.
6. Velg de sidene du ønsker å inkludere i Sidebunten. Valgte sider viser en hake i listen og vises i den blå boksen. Den gjeldende siden inkluderes automatisk i Sidebunten. For å fjerne den eller en annen side fra Sidebunten velger du X ved siden av sidenavnet i den blå boksen.
7. Når du har lagt til de ønskede sidene i Sidebunten velger du **Neste**. Dialogen Gi navn til Sidebunten åpnes.
8. Tast inn et navn for Sidebunten i Navn-feltet og (eventuelt) beskriv sidene i Beskrivelse-feltet.
9. (Kun Windows) Velg **Neste**.
10. (Kun Windows) Velg **Bla igjennom**. Naviger til katalogen der du ønsker å lagre Sidesett-filen, og velg så **Lagre**.
11. Velg **Eksporter**.
12. Når eksporten er fullført, velger du **Ferdig**.

Eksporter Sidebunt for deling (gjennom myTobiiDynavox)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Importer/eksporter sider**.
4. Velg **Eksporter sidebunt**.
5. Velg **For deling**.
6. Velg de sidene du ønsker å inkludere i Sidebunten. Valgte sider viser en hake i listen og vises i den blå boksen. Den gjeldende siden inkluderes automatisk i Sidebunten. For å fjerne den eller en annen side fra Sidebunten velger du X ved siden av sidenavnet i den blå boksen.
7. Når du har lagt til de ønskede sidene i Sidebunten velger du **Neste**. Dialogen Gi navn til Sidebunten åpnes.
8. Tast inn et navn for Sidebunten i Navn-feltet og (eventuelt) beskriv sidene i Beskrivelse-feltet.
9. Velg **Neste**. Dialogen Del Sidebunt åpnes.
10. Tast inn myTobiiDynavox-brukernavnet eller e-postkontoen til den personen du skal sende Sidesettet til, og velg så **+** for å legge dem til i mottakerlisten. Gjenta denne prosessen for å legge flere mottakere. Når du har lagt til alle mottakerne velger du **Del**.
11. Når eksporten er fullført, velger du **Ferdig**.

13.3.2 Importer Sidebunt

Importer Sidebunt fra myTobiiDynavox

Bruk dette alternativet for å importere en Sidebunt som du har lagret på din egen myTobiiDynavox-konto eller en Sidebunt som en annen myTobiiDynavox-bruker har delt med deg.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Importer/eksporter sider**.
4. Velg **Importer Sidebunt**.
5. Velg **fra myTobiiDynavox**. Dialogen Velg Sidebunt fra myTobiiDynavox vil åpnes.
6. Velg en Sidebunt fra listen.
7. For å laste ned den valgte Sidebunten velger du **Neste**.
8. Se gjennom listen over sidene som Sidebunten inneholder. For å fortsette med importen av Sidebunten velger du **Importer**. For å avbryte importen av Sidebunten velger du **Avbryt**.



Sidekonflikter oppstår når sidebunten inneholder én eller flere sider som allerede eksisterer på enheten din, men



som ikke er identiske. Velg hvert sidekonflikt-ikon

og velg så om du skal beholde den eksisterende siden eller erstatte med den importerte siden fra sidebunten. Du må løse alle sidekonflikter på denne måten før du kan gå videre med importen av Sidebunten.

Importer Sidebunt fra en lokal fil



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg **Side**-fanen.
3. Velg **Importer/eksporter sider**.
4. Velg **Importer Sidebunt**.
5. Velg **fra en lokal fil**.
6. Velg **Bla gjennom**. Naviger til den Sidebunt-filen (.spb) du ønsker å importere, og velg den. Velg så **Åpne**.
7. Velg **Neste**. Dialogen Se gjennom Sidebunt åpnes.
8. Se gjennom listen over sidene som Sidebunten inneholder. For å fortsette med importen av Sidebunten velger du **Importer**. For å avbryte importen av Sidebunten velger du **Avbryt**.



Sidekonflikter oppstår når sidebunten inneholder én eller flere sider som allerede eksisterer på enheten din, men



som ikke er identiske. Velg hvert sidekonflikt-ikon

og velg så om du skal beholde den eksisterende siden eller erstatte med den importerte siden fra sidebunten. Du må løse alle sidekonflikter på denne måten før du kan gå videre med importen av Sidebunten.

Importer Sidebunt og koble

Du kan importere en Sidebunt og opprette en kobling samtidig ved bruk av Importer og koble!

Se avsnittet 9.9.6 *Importer og koble til side, side 63*.

14 Brukerinnstillinger

Brukerinnstillinger hjelper deg med å tilpasse brukeropplevelsen i TD Snap®-programvaren. Hver bruker kan ha sine egne tilpassede innstillinger som aktiveres når du laster brukeren i programvaren.

14.1 Endre bruker



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg den gjeldende brukeren.
4. Velg en bruker fra Velg en bruker-listen.



Brukeren med haken er den gjeldende brukeren.

14.2 Opprett en ny bruker



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Ny bruker**.
4. Følg stegene i veiviseren for Brukeroppsett for å opprette en ny bruker. Velg **X** for å avbryte opprettingen av en ny bruker.

14.3 Sikkerhetskopier en bruker


Sikkerhetskopier til myTobiiDynavox



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg pilen til høyre for den gjeldende brukeren.
4. Velg  **Sikkerhetskopi**-knappen ved siden av navnet på den brukeren du ønsker å sikkerhetskopierte.
5. Velg **Sikkerhetskopiér til myTobiiDynavox**.
Dersom du ikke allerede er logget inn på din myTobiiDynavox-konto vil du bli bedt om å gjøre det nå.
6. Angi et navn for brukersikkerhetskopi-filen, og velg **Neste**.
Det kan være nyttig å inkludere sikkerhetskopi-datoen i filnavnet.
7. Velg **Ferdig**.



Lokale brukersikkerhetskopi-filer kan også flyttes til myTobiiDynavox manuelt. Bruk nettleseren din for å gå til myTobiiDynavox.com og logge inn, og gå så til *Snap > Sikkerhetskopier* og velg **Last opp sikkerhetskopi**.

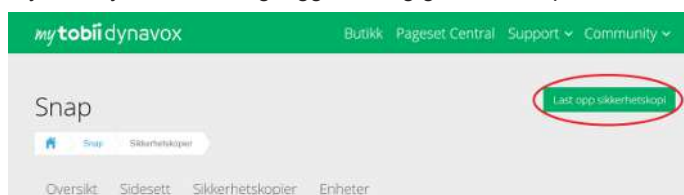

Sikkerhetskopier til en lokal fil



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg pilen til høyre for den gjeldende brukeren.



4. Velg **Sikkerhetskopi**-knappen ved siden av navnet på den brukeren du ønsker å sikkerhetskopiere.
5. Velg **Sikkerhetskopiér til en lokal fil**.
6. (Windows) **Bla igjennom** til den katalogen der du skal lagre sikkerhetskopi-filen, og velg så **Lagre**.
(iOS) Tast inn et navn for sikkerhetskopi-filen.
7. Velg **Sikkerhetskopi**.

14.4 Gjenopprett en bruker

Gjenopprett en bruker fra myTobiiDynavox




1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg pilen til høyre for den gjeldende brukeren.
4. Velg **Ny bruker**.
5. Velg **Gjenopprett eksisterende bruker**.
6. Dersom du ikke allerede er logget inn på myTobiiDynavox taster du inn e-posten din og passordet ditt og velger deretter **Neste**.
7. Velg en brukersikkerhetskopi fra listen, og velg deretter **Neste**.

Gjenopprett en bruker fra en lokal fil



På iPadOS må lokale sikkerhetskopierte brukerfiler som ble opprettet på en annen enhet først flyttes inn i TD Snap®-appen via iTunes:

- Åpne iTunes på din Mac eller PC.
- Koble iPaden din til datamaskinen ved å bruke USB-kabelen som fulgte med enheten din.
- Velg enheten din i iTunes.

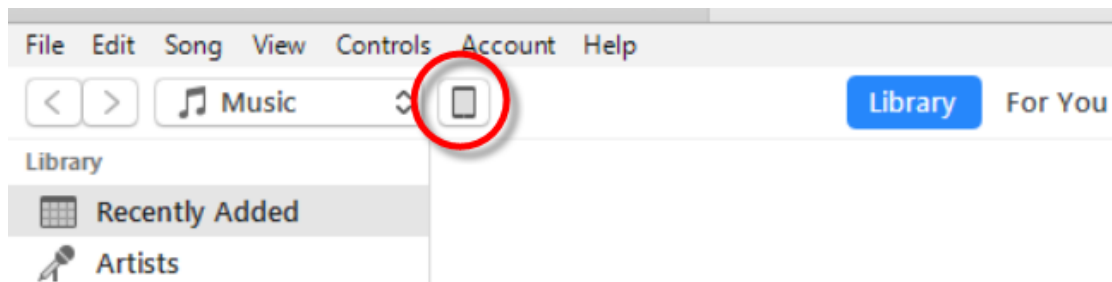


- I den venstre sidelinjen velger du **Apper**. Skroll så til Fildelings-delen på bunnen av siden.
- Velg **TD Snap®**.

File Sharing

The apps listed below can transfer documents between your iPad and this computer.

Apps

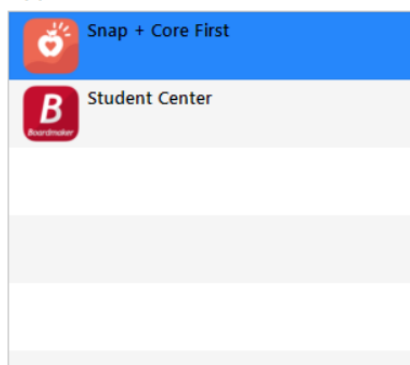

Snap + Core First Documents

DateTimePrefs.data	4 KB	Yesterday 4:12 PM
GlobalSettings.ssf	12 KB	Today 9:40 AM
QA_2017-04-20-17-39-12.sub	264.7 MB	4/20/2017 1:40 PM
Symbols	zero KB	5/31/2017 9:54 AM
UserBackups	545.5 MB	Yesterday 12:54 PM
Users	664.9 MB	Today 9:40 AM
VoiceBundle_v1_0.json	4 KB	5/31/2017 9:27 AM
Voices	244.7 MB	5/31/2017 9:53 AM

- Dra de(n) sikkerhetskopierte brukerfilen(e) inn i Dokumenter-området for TD Snap®.
- Følg stegene under for å gjenopprette brukeren på iPaden din.



Rediger-knappen.

1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg pilen til høyre for den gjeldende brukeren.
4. Velg **Ny bruker**.
5. Velg **Gjenopprett eksisterende bruker**.
6. Velg **Gjenopprett fra en lokal fil**.
7. (Windows) Naviger til den sikkerhetskopierte brukerfilen og velg den. Velg så **Åpne**.
(iPadOS) Velg en sikkerhetskopierte brukerfil fra listen, og velg så **Gjenopprett bruker**.

14.5 Rediger/Gi nytt navn til en bruker



Rediger-knappen.

1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.



3. Velg **Rediger**-knappen ved siden av navnet på den brukeren du ønsker å redigere.
4. Tast inn i **Navn**-feltet.
5. Velg **Lagre** for å lagre endringene eller **Avbryt** for å forkaste endringene.

14.6 Slett en bruker



Det å slette en bruker fra enheten er en permanent operasjon. Dersom du tror du vil kunne trenge brukeren senere bør du opprette en sikkerhetskopi av brukeren (*14.3 Sikkerhetskopier en bruker, side 97*) før du gjennomfører slettingsoperasjonen.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg  **Slett**-knappen ved siden av navnet på den brukeren du ønsker å slette.
4. Velg den røde **Slett**-knappen.
5. Velg **Slett** for å permanent fjerne brukeren. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til Innstillinger-menyen uten å slette brukeren.



Du kan ikke slette den gjeldende aktive brukeren.

14.7 Innlogging på myTobiiDynavox-konto



Innlogging på en myTobiiDynavox-konto krever en aktiv internettforbindelse.


Noen tjenester i TD Snap®, slik som Synkroniser, krever at du logger inn med myTobiiDynavox-kontoen din. Velg **Logg inn** for å oppgi din myTobiiDynavox innloggingsinformasjon eller for å opprette en ny myTobiiDynavox-konto. Dersom du allerede er logget inn vil ditt myTobiiDynavox-brukernavn eller e-post vises i delen myTobiiDynavox-konto.

14.8 Stemme

14.8.1 Talestemme

Talestemmen er den stemmen som leser innholdet i meldingsvinduet og knappmeldinger.

Talestemmen er standardstemmen; den er ikke knyttet til noe spesifikt språk. Dersom språk-spesifikke stemmer er angitt vil de språk-spesifikke stemmene bli brukt i stedet - for de språkene. For å angi språk-spesifikke stemmer, se *14.10 Språkspesifikke stemmer, side 103*.

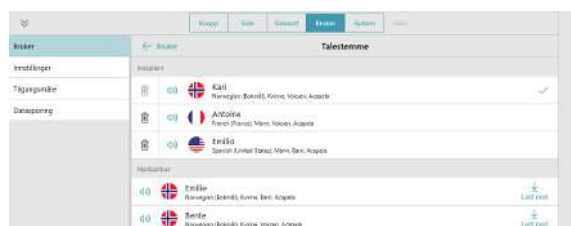

Illustrasjon 44: Bruker-fanen – talestemme



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Talestemme**.

14.8.1.1 Installerte stemmer

Dette er stemmene som nå er tilgjengelig for umiddelbar bruk på enheten. De inkluderer både forhåndsinstallerte stemmer og stemmer lastet ned på enheten.



Du kan slette stemmer i Installert-listen, men du kan ikke slette den gjeldende aktive stemmen.

14.8.1.2 Flere stemmer

Se tjenestene for talemotorer og tilpassede stemmer som støttes i TD Snap®.

- Tilpassede stemmer – TD Snap® (full) støtter noen tjenester for tilpassede syntetiske stemmer. Velg Logg på for å begynne å bruke tjenesten for tilpasset syntetisk stemme med TD Snap®.
- Talemotor – TD Snap® (fullversjon) inkluderer en stemmemotor og tilgang til alle stemmene i den stemmemotoren.

14.8.1.3 Personlige stemmer

TD Snap® støtter personlige stemmer for iOS. iPadOS-innstillingen Gi apper tillatelse til å be om å bruke må være aktivert og gitt tillatelse til TD Snap®.

Du kan opprette en personlig stemme ved å følge instruksjonene fra Apple: <https://support.apple.com/en-us/104993>. Hvis du bruker en annen Apple-enhet til å opprette den personlige stemmen, må du aktivere innstillingen Del på tvers av enheter for å bruke stemmen på andre enheter som er logget på med samme Apple- ID. *iOS-innstillinger > Tilgjengelighet > Personlig stemme > Del på tvers av enheter*

Aktiver Gi apper tillatelse til å be om å bruke Personlig stemme

1. Avslutt TD Snap®.
2. Gå til *iPadOS-innstillinger > Tilgjengelighet > Personlig stemme*.
3. Aktiver **Gi apper tillatelse til å be om å bruke**
4. Lukk Innstillinger-appen på iPadOS.

Gi TD Snap tillatelse til å bruke Personlig stemme

1. Start TD Snap®.
2. Når du blir bedt om å gi TD Snap® tillatelse til å bruke Personlig stemme, velger du **OK**.



3. Velg **Rediger**-knappen.
4. Velg fanen **Bruker**.
5. Velg **Talestemme**.
6. I delen Personlige stemmer på listen over stemmer velger du den personlige stemmen din.

14.8.1.4 Nedlastbare stemmer

Last ned nye stemmer.



Du må ha en aktiv internettilkobling for å laste ned stemmer.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Talestemme**.
4. I listen over Nedlastbare stemmer velger du **Last ned** ved siden av den ønskede stemmen.



I iPadOS settes nedlastingen av stemmer på pause når TD Snap®-appen minimeres.

14.8.1.5 Plattformstemmer

Dette er stemmer som er inkludert i ditt operativsystem, og SAPI5-stemmer.



Noen stemmer kan vises to ganger dersom de har både en innebygget plattformsversjon og en SAPI5-versjon. SAPI5 er kun for Windows

14.8.2 Stemmem hastighet

Stemmem hastigheten er hastigheten ord uttales i.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Flytt **Stemmem hastighet-spaken** til venstre for å snakke saktere, eller til høyre for å snakke raskere.

14.8.3 Stemmeleie

Stemmeleie viser til hvor høy eller lav stemmen høres ut.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Flytt **Stemmeleie-indikatoren** til venstre for å sette stemmeleiet lavere, eller til høyre for å sette stemmeleiet høyere.

14.8.4 Uttaleunntak

Uttaleunntak er ord eller forkortelser som du lærer stemmen å uttale på en spesifikk måte. Uttaleunntak er tilknyttet den stemmen som er aktiv når Uttaleunntakene opprettes. Dersom du bytter til en annen stemme og ønsker å bruke de samme uttaleunntakene må du importere Uttaleunntakene fra den forrige stemmen.

Uttaleunntak er også tilgjengelige for språk-spesifikke stemmer. Se avsnittet *14.10 Språkspesifikke stemmer, side 103*.



Uttaleunntak kan ikke importeres på tvers av plattformer (Windows ⇔ iPadOS).

Opprett nytt Uttaleunntak



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Uttaleunntak**.
4. Velg **Legg til uttaleunntak**.
Dialogen Legg til uttaleunntak åpnes.

Legg til uttaleunntak

Ord

Uttalelse

Ferdig

Avbryt

5. I **Ord**-feltet skriver du ordet slik det skrives.
6. I **Uttale**-feltet skriver du inn ordet fonetisk slik du ønsker at det skal uttales.
For å teste uttalen velger du **Forhåndsvis**-knappen.
7. Velg **Ferdig** for å lagre Uttaleunntaket. Velg **Avbryt** for å forkaste endringene dine og gå tilbake til Brukerinnstillinger.




Acapela-stemmer godtar også uttaleunntak ved bruk av det fonetiske SAMPA-alfabetet. I feltet Uttale skriver du *lprn=fonetiske koder legges inn her!*, men bytter «fonetiske koder legges inn her» med SAMPA-kodene for ordet ditt. Du må inkludere anførselstegnet (") på slutten.

Velg språk for Acapela-stemmen din for å se fonetiske koder og andre detaljer om bruk av SAMPA som uttaleunntak: [arabisk](#), [tsjekkisk](#), [dansk](#), [tysk](#), [australsk-engelsk](#), [skotsk engelsk](#), [britisk-engelsk](#), [amerikansk-engelsk](#), [katalansk](#), [latin-amerikansk-spansk](#), [nordamerikansk-spansk](#), [finsk](#), [kanadisk-fransk](#), [fransk](#), [italiensk](#), [japansk](#), [norsk](#), [belgisk-nederlandsk](#), [nederlandsk](#), [brasiliansk-portugisisk](#), [portugisisk](#), [svensk](#), [finsk-svensk](#), [nordsamisk](#), [tyrkisk](#), [forenklet kinesisk](#).

Importer et uttaleunntak



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Uttaleunntak**.
4. Velg **Importer fra en annen stemme**.

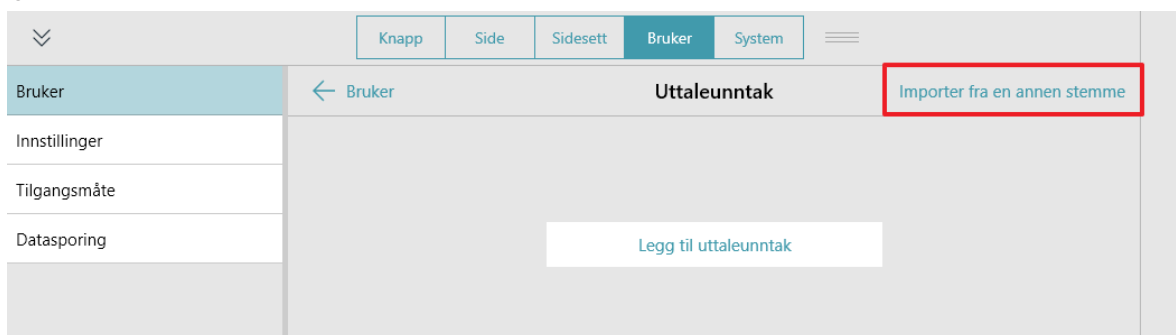

5. Velg den stemmen som har de Uttaleunntakene du ønsker å importere. Kun stemmer som har Uttaleunntak tilknyttet dem vil vises i listen.
6. Velg **Importer** for å importere alle Uttaleunntak tilknyttet den valgte stemmen. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til Brukerinnstillinger uten å importere.



Når du har importert Uttaleunntak fra en annen stemme er det anbefalt at du tester dem med den gjeldende stemmen. Velg  Forhåndsvisning-knappen på et Uttaleunntak for å høre den lest opp med den gjeldende stemmen.

14.9 Utgangsenhet for tale



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Utgangsenhet for tale**.
4. Angi Bruk standard enhet til **på** for å bruke Windows' standard utgangsenhet. Angi Bruk standard enhet til **av** for å se listen over tilgjengelige utgangsenheter.
 - Velg en utgangsenhet fra listen for å bruke den enheten som taleutgang. For å forhåndsvisne en enhet, velger du spill av-knappen for den enheten.

14.10 Språkspesifikke stemmer

Du kan angi en stemme til et språk, slik at innhold i det språket leses opp med korrekt uttale.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Språkspesifikke stemmer**.
4. Velg **Legg til en stemme for et annet språk**.
5. Velg **Språk**, og velg så et språk fra Stemmespråk-listen. Velg **Ny stemme** etter at du har valgt ditt språk.
6. Velg **Stemme**, og velg så en stemme fra Installert-delen av Stemmelisten. Velg **Ny stemme** etter at du har valgt din stemme.
7. (Valgfritt) Juster Stemme-hastigheten for det/den valgte språket/stemmen.
8. (Valgfritt) Legg til Uttaleunntak for stemmen. Se avsnittet *14.8.4 Uttaleunntak, side 102*.



Noen stemmer er tilgjengelige som en gratis nedlasting (internettilkobling kreves). Velg **Last ned** ved siden av den ønskede stemmen. Når nedlastingen er fullført kan du finne og velge stemmen i Installert-delen av Stemmelisten.

14.11 Google-konto

Koble til Google-kontoen din for å bruke Google-assistenten, smarthøytalere og smarte apparater med TD Snap®.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Bla ned og velg **Koble til Google**. Din standard nettleser åpnes.
4. Logg deg inn på Google-kontoen din.
5. Når du blir spurt om det, velger du **Tillat** for å gi TD Snap® tillatelse til å kommunisere med Google-assistenten på dine vegne.
6. Gå tilbake til TD Snap®.



For å logge deg ut av Google-kontoen din i TD Snap®, velger du **Koble fra**.

14.12 Brukervalg

14.12.1 Taleinnstillinger



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Angi Alltid avbryt tale for ny tale til **På** (pågående tale vil stoppe for å lese opp en ny kommando) eller **Av** (talekommandoer vil legges i kø slik at den pågående talen vil fullføres, og så lese opp den nyere talekommandoen).

14.12.2 Innstillinger for meldingsvindu



Illustrasjon 45: Bruk symboler i meldingsvindu aktivert



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Angi de følgende valgene til enten **På** (aktivert) eller **Av** (deaktivert):

- **Bruk symboler i meldingsvindu** – når denne er aktivert, vil ord og fraser i meldingsvinduet symboliseres.
 - **Alltid vis markøren i meldingsvinduet** – når denne er aktivert, er markøren alltid synlig i meldingsvinduet. Når den er deaktivert, er markøren kun synlig når den flyttes fra standardposisjonen på slutten av meldingsvinduteksten.
 - **Les opp ved innsettelse i meldingsvinduet** – når denne er aktivert, vil hvert ord eller frase leses opp idet det/ den settes inn i Meldingsvinduet.
 - **Les opp bokstaver** – når denne er aktivert, vil hver(t) bokstav/tegn leses opp idet det/den settes inn i Meldingsvinduet.
- For å aktivere «Les opp bokstaver» må innstillingen «Les opp ved innsettelse i Meldingsvinduet» være aktivert.
- **Tøm etter tale** – etter at teksten i Meldingsvinduet har blitt lest opp, fjernes teksten ved innsettelse av ny tekst.
 - **Automatisk stor forbokstav** – når dette er aktivert, blir den første bokstaven i det første ordet i hver setning automatisk skrevet med stor bokstav. Når den er deaktivert, må brukeren skrive store bokstaver manuelt.

14.12.3 Prediksjonsinnstillinger



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Angi Vis symboler på Prediktor-knapper til **På** (Prediksjonsknapper viser et symbol for det gjeldende predikerte ordet) eller **Av** (Prediksjonsknapper viser kun tekst).

14.12.4 Tilbakestill ordprediksjon

Ordprediksjon i TD Snap® lærer av meldingene som snakkes for å lage personlige ordprediksjoner. Tilbakestill ordprediksjon gjenoppretter den standard ordprediksjonen i alle språk for gjeldende bruker.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Velg **Tilbakestill ordprediksjon**.
5. Velg **Tilbakestill**.
6. Velg **Tilbakestill** i bekreftelsesvinduet.

14.12.5 Synkroniser-innstillinger



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg **Innstillinger**-kategorien.
4. Angi Aktiver synkronisering i Bruksmodus til **På** (Synkroniser-knappen er synlig i Topplinjen både i Bruksmodus og i Redigeringsmodus) eller **Av** (Synkroniser-knappen er skjult i Topplinjen i Bruksmodus, men synlig i Redigeringsmodus).

14.13 Tilgangsmåte

Berøring

Objekter aktiveres ved at du berører objektet på skjermen med en finger. Bruker du mus, klikker du på objektet med musepekeren. Denne tilgangsmåten passer for brukere som klarer å berøre skjermen raskt og nøyaktig, eller kontrollere og venstreklikke en vanlig datamus. Objektene aktiveres så snart de berøres eller klikkes på.

Klikk ved berøring

Objekter aktiveres ved at du berører og holder objektet på skjermen i en viss tid. Bruker du mus, klikker og holder du objektet i en viss tid. Brukeren definerer holdetiden. Denne tilgangsmåten er nyttig for brukere som berører eller klikker på objekter ved et uhell.

Klikk ved slipp

Denne metoden ligner på Klikk ved berøring, men det valgte objektet aktiveres når det slippes. Denne tilgangsmåten lar brukeren opprettholde kontakten med berøringsskjermen uten å foreta et valg ved et uhell. Det betyr at brukeren kan la fingeren eller musepekeren gli over berøringsskjermen, eller holde museknappen nede mens markøren beveges. Valget utføres ikke før fingeren eller pekeren forlater berøringsskjermen, eller når museknappen slippes. Klikk ved slipp-metoden passer derfor for personer som synes det er enklere å dra fingeren eller pekeren over berøringsskjermen mens den flyttes fra valg til valg.

Auditiv berøring

Brukeren berører skjermen for å aktivere audiosignaler for knapper, som hjelper dem med å identifisere hver knapp for å trygt kunne foreta valg. Innstillingene for tilgangsmåten kan konfigureres til å berøre og dra for å høre lydsignaler, og deretter enten løfte fingeren fra skjermen for å velge eller trykke én gang for å høre lydsignalet og så trykke igjen for å velge. Denne tilgangsmåten er nyttig for brukere som har dårlig syn eller de som har nytte av å høre lydsignaler.

Musedveling

Tilgangsmåten Musedveling krever at en datamus, sporingsball eller hodemus styrer markøren på skjermen. Et objekt velges når markøren pauses på et objekt i en viss tid eller når brukeren aktiverer en bryter. Denne tilgangsmåten er fin for brukere som kan bevege musen, men som mangler evnen til å trykke ned museknappen for å velge.

Blikkpeking

Denne metoden lar brukeren kontrollere TD Snap® kun ved bruk av øynene. Valg gjøres enten ved å feste blikket på et objekt i en spesifisert tidsperiode (fokusering), eller ved å aktivere en bryter. Øyestyring krever en øyestytingsenhet fra Tobii Dynavox.

Skanning

Når skanning er den aktive tilgangsmåten, markeres objektene på skjermen i et bestemt mønster. Skanning krever en bryter eller tastaturtast for å velge når det ønskede elementet markeres. Denne tilgangsmåten er ment for personer som har motoriske ferdigheter som forhindrer dem i å bruke direkte valgmetoder.



For å lære mer om tilgangsmåter, kan du se på videoen Tilgangsmåter, som du finner i *System — Help & Tutorials*.

14.13.1 Angi Tilgangsmåte



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg kategorien **Tilgangsmåte**.
4. Velg den gjeldende Tilgangsmåten.
5. Velg en Tilgangsmåte fra listen.

14.13.2 Berøringsalternativer



Berøring er standard tilgangsmåte.

Ved bruk av tilgangsmåten Berøring aktiveres objekter ved at du berører objektet på skjermen med en finger. Bruker du mus, klikker du på objektet med musepekeren. Denne tilgangsmåten passer for brukere som klarer å berøre skjermen raskt og nøyaktig, eller kontrollere og venstreklikke en vanlig datamus. Objektene aktiveres så snart de berøres eller klikkes på.

Navigation Type

Navigasjonstypen er måten brukeren kan skrolle på siden og i verktøylinjen på. Du kan velge å skrolle ved å sveipe fingeren din på skjermen, ved å velge navigeringsknapper, eller begge deler.

Sveip

- Skroll siden og verktøylinjen opp og ned ved å sveipe/dra fingeren din på berøringsskjermen. (Kun med tilgangsmåten Berøring.)

Navigasjonsknapper

- Piltaster vises på siden og i verktøylinjen når det er ytterligere innhold ovenfor eller nedenfor. Navigeringsknappene i form av piler er tilgjengelige i alle Tilgangsmåter.



Sveiping og navigasjonsknapper

- Både sveiping og navigeringsknapper er aktivert, slik at begge navigeringstypene kan brukes til bevegning gjennom innholdet. (Kun med tilgangsmåten Berøring.)

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

14.13.3 Alternativer for Klikk ved berøring

Når Klikk ved berøring er den valgte Tilgangsmåten aktiveres objekter ved at du berører og holder objektet på skjermen i en viss tid. Bruker du mus, klikker og holder du objektet i en viss tid. Brukeren definerer holdetiden. Denne tilgangsmåten er nyttig for brukere som berører eller klikker på objekter ved et uhell.

Holdtid

Holdetiden er den minimale tiden du trenger å velge og holde på et objekt for å aktivere det.

Koble sammen flere trykk

Denne innstillingen merker flere trykk som skjer innenfor en viss tidsramme og kobler dem sammen, slik at de registreres som ett langt trykk og hold. Denne innstillingen er nyttig dersom brukeren har vanskeligheter med å holde et valg jevnt inne.

Når Koble sammen flere trykk er aktivert kan du velge tidsrammen som klikk skal sammenkobles innenfor. For eksempel hvis den angis til Medium vil alle klikk som skjer innenfor et intervall på 0,3 sekunder (fra første klikk) registreres som ett langt trykk og hold.


Forsinkelse mellom valg

Denne innstillingen lar deg angi et tidsrom der TD Snap® ignorerer valgforsøk etter at et valg har blitt utført. Aktivering av Forsinkelse mellom valg kan hjelpe til med å forhindre utilsiktede gjentatte valg i programvaren.

Når Forsinkelse mellom valg er aktivert kan du velge tidsrommet som valgforsøk ignoreres i etter at et valg har blitt utført. For eksempel, når den er satt til Medium, vil TD Snap® ignorere alle valgforsøk som skjer innen 2 sekunder etter et valg.

Markering

Velg din ønskede markeringstype og -farge. Markering er et visuelt varsel som viser deg når et objekt er valgt. Markeringen stopper når objektet har blitt aktivert.

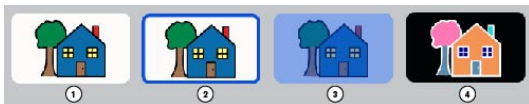

1. Ingen markering
2. Kant
Alternativer: Farge, markeringstykkelse
3. Overlegg
Alternativ: Farge
4. Inverter

Tilbakemeldingslyd ved valg

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

Tilgjengelige navigasjonsknapper på topplinjen

Når dette er aktivert, kan Tilbake-, Hjem- og Kontrollpanel-knappene i topplinjen velges ved å bruke Klikk ved berøring eller Berøring som tilgangsmåte. Når det er deaktivert, kan disse knappene bare velges ved å bruke Berøring som tilgangsmåte.

14.13.4 Alternativer for Klikk ved slipp

Når du bruker Klikk ved slipp blir et valgt objekt aktivert når valget slippes. Denne tilgangsmåten lar brukeren opprettholde kontakten med berøringsskjermen uten å foreta et valg ved et uhell. Det betyr at brukeren kan la fingeren eller musepekeren gli over berøringsskjermen, eller holde museknappen nede mens markøren beveges. Mens markøren beveges over knappene vil den gjeldende valgte knappen markeres. En knapp aktiveres ikke før fingeren eller pekeren forlater berøringsskjermen, eller når museknappen slippes opp. Klikk ved slipp-metoden passer derfor for personer som synes det er enklere å dra fingeren eller pekeren over berøringsskjermen mens den flyttes fra valg til valg. Den er også nyttig for personer som drar nytte av visuell feedback for å kunne gjøre nøyaktige valg.

Hold Time

Holdetiden er den minimale tiden du trenger å velge og holde på et objekt for å aktivere det ved slipp.

Connect Multiple Taps

Denne innstillingen merker flere trykk som skjer innenfor en viss tidsramme og kobler dem sammen, slik at de registreres som ett langt trykk og hold. Denne innstillingen er nyttig dersom brukeren har vanskeligheter med å holde et valg jevnt inne.

Når Koble sammen flere trykk er aktivert kan du velge tidsrammen som klikk skal sammenkobles innenfor. For eksempel hvis den angis til Medium vil alle klikk som skjer innenfor et intervall på 0,3 sekunder (fra første klikk) registreres som ett langt trykk og hold.


Delay Between Selections

Denne innstillingen lar deg angi et tidsrom der TD Snap® ignorerer valgforsøk etter at et valg har blitt utført. Aktivisering av Forsinkelse mellom valg kan hjelpe til med å forhindre utilsiktede gjentatte valg i programvaren.

Når Forsinkelse mellom valg er aktivert kan du velge tidsrommet som valgforsøk ignoreres i etter at et valg har blitt utført. For eksempel, når den er satt til Medium, vil TD Snap® ignorere alle valgforsøk som skjer innen 2 sekunder etter et valg.

Highlighting

Velg din ønskede markeringstype og -farge. Markering er et visuelt varsel som viser deg når et objekt er valgt. Markeringen stopper når objektet har blitt aktivert.

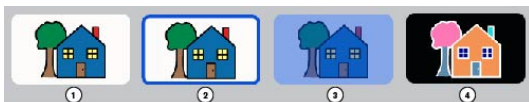

1. Ingen markering

2. Kant
Alternativer: Farge, markeringstykkelse
3. Overlegg
Alternativ: Farge
4. Inverter

Audio Feedback

Konfigurer stemmen som brukes til å lese opp auditive tilbakemeldinger. Et lydsignal er et ord eller en kort melding som hjelper deg å identifisere et objekt. Du kan velge stemme for Lydsignal, språkspesifikke respons-stemmer og tilpasset stemmehastighet, volum, stemmeleie og uttaleunntak.

Innstillingen Bland tilbakemelding og tale gjør det mulig å spille av tilbakemeldingslyder samtidig som tale hvis innstillingen for taleutgangsenhet og innstilling for lydsignal-enhet er de samme.

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Når dette er aktivert, kan Tilbake-, Hjem- og Kontrollpanel-knappene i topplinjen velges ved å bruke Klikk ved slipp eller Berøring som tilgangsmåte. Når det er deaktivert, kan disse knappene bare velges ved å bruke Berøring som tilgangsmåte.

14.13.5 Alternativer for Auditiv berøring

Med Auditiv berøring berøres skjermen for å aktivere audiosignaler for knapper, som hjelper dem med å identifisere hver knapp for å trykt kunne foreta valg. Innstillingene for tilgangsmåten kan konfigureres til å berøre og dra for å høre lydsignaler, og deretter enten løfte fingeren fra skjermen for å velge eller trykke én gang for å høre lydsignalet og så trykke igjen for å velge. Denne tilgangsmåten er nyttig for brukere som har dårlig syn eller de som har nytte av å høre lydsignaler.

Hold Time

Holdetiden er den minimale tiden du trenger å velge og holde på et objekt for å aktivere det.

Connect Multiple Taps

Denne innstillingen merker flere trykk som skjer innenfor en viss tidsramme og kobler dem sammen, slik at de registreres som ett langt trykk og hold. Denne innstillingen er nyttig dersom brukeren har vanskeligheter med å holde et valg jevnt inne.

Når Koble sammen flere trykk er aktivert kan du velge tidsrammen som klikk skal sammenkobles innenfor. For eksempel hvis den angis til Medium vil alle klikk som skjer innenfor et intervall på 0,3 sekunder (fra første klikk) registreres som ett langt trykk og hold.


Delay Between Selections

Denne innstillingen lar deg angi et tidsrom der TD Snap® ignorerer valgforsøk etter at et valg har blitt utført. Aktivisering av Forsinkelse mellom valg kan hjelpe til med å forhindre utilsiktede gjentatte valg i programvaren.

Når Forsinkelse mellom valg er aktivert kan du velge tidsrommet som valgforsøk ignoreres i etter at et valg har blitt utført. For eksempel, når den er satt til Medium, vil TD Snap® ignorere alle valgforsøk som skjer innen 2 sekunder etter et valg.

Highlighting

Velg din ønskede markeringstype og -farge. Markering er et visuelt varsel som viser deg når et objekt er valgt. Markeringen stopper når objektet har blitt aktivert.

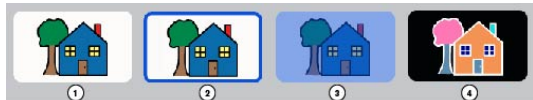

1. Ingen markering
2. Kant
Alternativer: Farge, markeringstykkelse
3. Overlegg
Alternativ: Farge
4. Inverter

Audio Feedback

Konfigurer stemmen som brukes til å lese opp auditive tilbakemeldinger. Et lydsignal er et ord eller en kort melding som hjelper deg å identifisere et objekt. Du kan velge stemme for Lydsignal, språkspesifikke respons-stemmer og tilpasset stemmehastighet, volum, stemmeleie og uttaleunntak.

Innstillingen Bland tilbakemelding og tale gjør det mulig å spille av tilbakemeldingslyder samtidig som tale hvis innstillingen for taleutgangsenhet og innstilling for lydsignal-enhet er de samme.

Button Boundary Feedback Sound

Spill av en lyd når du beveger deg over kanten av en knapp.

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

Play audio cue on first selection

Når dette er aktivert, vil knappen bli uthevet og spille av auditiv tilbakemelding første gang den velges. Knappen aktiveres andre gang den velges. Når dette deaktivert, kan du trykke og holde inne (eller trykke og dra) for å spille av auditiv tilbakemelding. Knappen aktiveres når du slipper den (løfter fingeren fra skjermen).

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Når dette er aktivert, kan Tilbake-, Hjem- og Kontrollpanel-knappene i topplinjen velges ved å bruke Auditiv berøring eller Berøring som tilgangsmåte. Når det er deaktivert, kan disse knappene bare velges ved å bruke Berøring som tilgangsmåte.

14.13.6 Alternativer for musedveling

Tilgangsmåten Musedveling krever at en datamus, sporingsball eller hodemus for å kontrollere markøren på skjermen. Et objekt velges når markøren stopper på et objekt i en viss tid eller når en bryter aktiveres.

Selection Type

Fokusering

- Brukeren velger ved å holde markøren på et objekt i en viss tid (fokuseringstid).
 - Dwell time — set the amount of time that the cursor must remain on an object in order to select it.

Bryter


- Valg gjøres ved å aktivere en bryter mens markøren er på det ønskede objektet.
 - Switch input — set the keyboard key that acts as the switch input.

Highlighting

Velg din ønskede markeringstype og -farge. Markering er et visuelt varsel som viser deg når et objekt er valgt. Markeringen stopper når objektet har blitt aktivert.



For denne tilgangsmåten er «Ingen markering» ikke et alternativ.

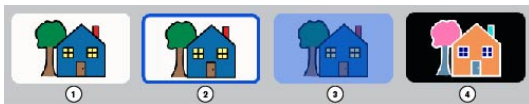

1. Ingen markering
2. Kant
Alternativer: Farge, markeringstykkelse
3. Overlegg
Alternativ: Farge
4. Inverter

Audio Feedback

Konfigurer stemmen som brukes til å lese opp auditive tilbakemeldinger. Et lydsignal er et ord eller en kort melding som hjelper deg å identifisere et objekt. Du kan velge stemme for Lydsignal, språkspesifikke respons-stemmer og tilpasset stemmehastighet, volum, stemmeleie og uttaleunntak.

Innstillingen Bland tilbakemelding og tale gjør det mulig å spille av tilbakemeldingslyder samtidig som tale hvis innstillingen for taleutgangsenhet og innstilling for lydsignal-enhet er de samme.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Når aktivert, vil en Pause/gjenoppta tilgangsmåte-knapp vises i topplinjen i bruksmodus. Når deaktivert, er knappen skjult.

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Når dette er aktivert, kan Tilbake-, Hjem- og Kontrollpanel-knappene i topplinjen velges ved å bruke Musedveling eller Berøring som tilgangsmåte. Når det er deaktivert, kan disse knappene bare velges ved å bruke Berøring som tilgangsmåte.

14.13.7 Alternativer for øyestyring

Denne tilgangsmåten lar brukeren kontrollere TD Snap® kun ved bruk av øynene. Valg gjøres enten ved å feste blikket på et objekt i en spesifisert tidsperiode (fokusering), eller ved å aktivere en bryter. Tilgangsmåten øyestyring krever en øyestyrringsenhet fra Tobii Dynavox.

Selection Type

Fokusering

- Lar brukeren velge ved å fokusere blikket på et objekt i en viss tid (fokuseringstid).
 - Dwell time — set the amount of time that the gaze must remain on an object in order to select it.
 - Look away before reselecting — when enabled, the user is unable to make multiple selections on the same target unless they look away from the last selected region between selections. This setting is helpful for users who accidentally select targets repeatedly.

Bryter

- Brukeren flytter på markeringen på skjermen ved bruk av blikket, og utfører så et valg ved bruk av en bryter.
 - Switch input — set the keyboard key that acts as the switch input.
Switch selection with a keyboard key or Bluetooth switch may not work outside the TD Snap® software.
 - Switch press duration — the amount of time that the switch must be activated to select the currently highlighted object.
 - Switch repeat duration — the amount of time the user must wait between switch activations. Before this time is met, any additional switch activations are ignored.

Gaze Feedback

Blikkrespons er et visuelt signal som viser brukeren hvor blikket deres registreres på skjermen, hvor konsekvent det registreres, og i hvor lang tid.

Angi stilen, fargen og størrelsen på din Blikkrespons.

Delay After Page Change

Etter du går til en ny side kan valg ikke utføres i det angitte tidsrommet. Denne innstillingen hjelper til med å forhindre valg når du først åpner en side.

Windows Control Type

Angi modus for skrivebordstilgang for navigering utenfor TD Snap®-programvaren. Ikke tilgjengelig på alle enheter.

- Gaze Selection – dette er en to-steps valgmetode som reduserer risikoen for utilsiktede klikk.
- Mouse Emulation – emuler og kontroller en standard PC-musepeker på skjermen.

Audio Feedback

Konfigurer stemmen som brukes til å lese opp auditive tilbakemeldinger. Et lydsignal er et ord eller en kort melding som hjelper deg å identifisere et objekt. Du kan velge stemme for Lydsignal, språkspesifikke respons-stemmer og tilpasset stemmehastighet, volum, stemmeleie og uttaleunntak.

Innstillingen Bland tilbakemelding og tale gjør det mulig å spille av tilbakemeldingslyder samtidig som tale hvis innstillingen for taleutgangsenhet og innstilling for lydsignal-enhet er de samme.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Når aktivert, vil en Pause/gjenoppta tilgangsmåte-knapp vises i topplinjen i bruksmodus. Når deaktivert, er knappen skjult.

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Når dette er aktivert, kan Tilbake-, Hjem- og Kontrollpanel-knappene i topplinjen velges ved å bruke Øyestyring eller Berøring som tilgangsmåte. Når det er deaktivert, kan disse knappene bare velges ved å bruke Berøring som tilgangsmåte.

Offscreen Pause

Når dette er aktivert, kan brukere av øyestyring se under skjermen for å åpne en meny med en Pause/gjenoppta øyestyring-knapp.

14.13.8 Skanningsvalg

Når skanning er den aktive tilgangsmåten, markeres objektene på skjermen i et bestemt mønster. Brukeren vil aktivere en bryter eller tastaturtast for å velge når det ønskede elementet markeres. Denne tilgangsmåten er ment for personer som har motoriske ferdigheter som forhindrer dem i å bruke direkte valgmetoder.

Scan Type

Innstillingen for type skanning avgjør hvordan skanningsmarkeringen skal bevege seg fremover (automatisk eller ved bruk av bryter) og hvordan valg utføres.

1-bryters autoskanning

- Når du bruker 1-bryters autoskanning vil programvaren skanne elementene på siden ved bruk av den angitte skanneadferden. Brukeren utfører valg ved bruk av en bryter.
 - Switch input — choose either a screen tap or keyboard key.

- Speed — set how quickly the autoscan progresses.
 - Transition time — set the length of time between making a selection and autoscan continuing.
 - Scan after — select when autoscan should restart: Selection, Page Change, Speaking.
 - Scan After Speaking Begins has three options: Wait for switch activation (resume scanning after speaking begins only when the switch has been activated), Immediately (continue scanning regardless of speech), Wait for speech to finish (resume scanning after speech has finished).
- If Audio Feedback is enabled, audio feedback is not heard if scanning occurs while other speech is playing.
- Speak full audio cue before advancing — when enabled, long audio cues delay the scanning highlight advancement until the full audio cue has been spoken.

2-bryters trinnvis skanning

- Når du bruker 2-bryters trinnvis skanning vil brukeren trigge én bryter for å aktivere skanningsmarkeringen og en annen bryter for å gjøre valg.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Switch 2 Input — choose either a screen tap or keyboard key to make selections.
- Switch 1 Input and Switch 2 Input must be different.

1 bryter skanning

- Når 1 bryter skanning er aktiv, vil brukeren trykke på bryteren for å bevege markeringen (hvert valg flytter markeringen ett intervall). For å velge det markerte objektet, vil brukeren trykke på bryteren og holde valget inne i den spesifiserte Pausetiden.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Pause Time — the minimum amount of time needed to select and hold on an object in order to activate it.

1 bryter fokuseringsskanning

- Når 1 bryter fokuseringsskanning er aktiv, vil brukeren trykke på bryteren for å bevege markeringen (hvert valg flytter markeringen ett intervall). For å velge det markerte objektet, vil brukeren stoppe opp (ikke gjøre noen ting) i den spesifiserte Pausetiden.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Pause Time — the minimum amount of time needed to dwell on an object in order to activate it.

Klikk ved slipp-skanning

- Et individ som bruker klikk ved slipp-skanning vil holde inne bryteren for å bevege skanningsmarkeringen (markeringen fortsetter å bevege seg fremover så lenge bryteren holdes inne). Når individet slipper bryteren, vil det markerte objektet velges.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Speed — how fast the scanning highlight advances (while the switch is held).
 - Speak full audio cue before advancing — when enabled, long audio cues delay the scanning highlight advancement until the full audio cue has been spoken.

Scan Behaviors

Skanneadferden er den rekkefølgen som objekter på skjermen markeres for valg i. Denne delen inneholder også innstillinger for hvilke typer objekter som skannes.

Mønster

- Rad/kolonne — skann rader fra toppen og nedover. Når en rad velges skannes elementene i raden fra venstre mot høyre.
- Kolonne/rad — skann kolonner fra venstre mot høyre. Når en kolonne velges skannes elementene i kolonnen fra toppen og nedover.
- Lineær — objekter skannes individuelt fra venstre mot høyre, fra toppen og nedover.

Antall passeringer

- Passeringer — angi hvor mange ganger skanningen skal skanne en rad eller kolonne uten at et valg gjøres.
- Etter siste passering — velg hva som skjer når autoskann har fullført det angitte antallet passeringer (ikke tilgjengelig for uendelige passeringer).

Gruppeskann

- Når denne er aktivert vil sideknapper skannes i grupper.

Skanngrupper må være forhåndsdefinerte. Se avsnittet 9.16 *Skanngrupper*, side 71.

Skann fra siste valg

- Når den er aktivert vil skanningen fortsette på siden der siste valg ble utført. Når den er deaktivert fortsetter skanningen på toppen av siden etter at et valg er utført.

Skann topplinje

- Når den er aktivert, skannes de skannings-tilgjengelige elementene i Topplinjen (Tilbake, Hjem og Kontrollpanel). Når den er deaktivert skannes ikke elementene i topplinjen.



Knappene Søk, Synkroniser, Pause tilgangsmåte og Rediger i topplinjen skannes ikke. De er tilgjengelige via berøring når som helst.


Skann tomme knapper

- Når den er aktivert vil knapper som ikke har noe innhold skannes. Når den er deaktivert vil tomme knapper ikke skannes.

Highlighting

Velg din ønskede markeringstype og -farge. Markering er et visuelt varsel som viser når et objekt skannes. Markeringen stopper når objektet har blitt aktivert.

For denne tilgangsmåten er «Ingen markering» ikke et alternativ.

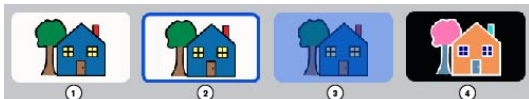

1. Ingen markering
2. Kant
Alternativer: Farge, markeringstykkelse
3. Overlegg
Alternativ: Farge
4. Inverter

Hold Time

Holdetiden er den minimale tiden du trenger å velge og holde på et objekt for å aktivere det.

Delay Between Selections

Forsinkelse mellom valg bidrar til å forhindre utilsiktede gjentatte brytervalg. Når et brytervalg gjøres, så kan ikke det neste brytervalget skje før tiden som er angitt i Forsinkelse mellom valg har passert. Dersom bryteren trykkes inn mens forsinkelsen pågår, så vil nedtellingen tilbakestilles.

Audio Feedback

Konfigurer stemmen som brukes til å lese opp auditive tilbakemeldinger. Et lydsignal er et ord eller en kort melding som hjelper deg å identifisere et objekt. Du kan velge stemme for Lydsignal, språkspesifikke respons-stemmer og tilpasset stemmehastighet, volum, stemmeleie og uttaleunntak.

Innstillingen Bland tilbakemelding og tale gjør det mulig å spille av tilbakemeldingslyder samtidig som tale hvis innstillingen for taleutgangsenhet og innstilling for lydsignal-enhet er de samme.

Zoom

Når aktivert, forstørres skjermobjekter idet de skannes. Ved skanning av flere objekter (rader eller kolonner), vil objektet som er først i mønsteret forstørres, og de andre objektene vil markeres slik det er spesifisert i innstillingen for Markeringsstil.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Når aktivert, vil en Pause/gjenoppta tilgangsmåte-knapp vises i topplinjen i bruksmodus. Når deaktivert, er knappen skjult.

Selection Feedback Sound

Spill av en lyd når en ikke-talende knapp velges.


14.14 Datasporing

14.14.1 Overvåk knappebruk

Når Overvåk knappebruk er aktivert vil informasjon om knappebruk i TD Snap® registreres. Denne informasjonen inkluderer tidspunktet for bruk av knappen, melding, språk, Sidesett, side, rutenettposisjon, tilgangsmåte (f.eks. Øyestyring), modelleringsmodus og om knappen ble snakket eller satt inn i Meldingsvinduet.



Knappebruksinformasjon registreres ikke når du er i Redigeringsmodus.

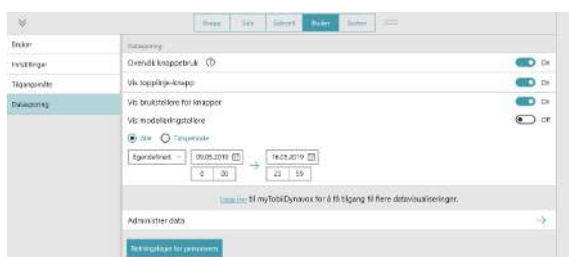

Aktiver Overvåking av knappebruk



1. Velg **Rediger**-knappen.

2. Velg fanen **Bruker**.

3. Velg kategorien **Datasporing**.

4. Sett **Overvåk knappebruk** til På.

5. Les personvernvarselen og velg **Ja** for å aktivere Overvåking av knappebruk. Dersom du ikke ønsker å aktivere Overvåking av knappebruk velger du **Nei**.



Du kan se brukstallene for knappebruk rett i TD Snap®-programvaren ved å aktivere Vis brukstallene for knapper og/eller Vis modelleringstallene. Se avsnittene *14.14.3 Vis brukstallene for knapper, side 116* og *14.14.4 Vis modelleringstallene, side 117* for mer informasjon. Ytterligere datavisualiseringer er tilgjengelige i **Bruksrapporter**-delen av din myTobiiDynavox.com-konto.

Sporing av knappebruk, når det er aktivert, skjer når TD Snap®-programvaren er i bruk. For nøyaktige bruksdata er det viktig å skille mellom knappevalg gjort av brukeren og modelleringsvalg gjort av en omsorgsperson eller kommunikasjonspartner. Dersom brukeren samhandler med TD Snap® med en ikke-berøringsbasert metode (Musedveling, Øyestyring eller Skanning), vil eventuelle knappevalg foretatt ved bruk av berøring automatisk registreres som modellering. Dersom brukeren samhandler med TD Snap® med en berøringsbasert tilgangsmåte må omsorgspersonen aktivere Modelleringsmodus før de foretar eventuelle modelleringsvalg, og så deaktivere den igjen før brukeren gjør sitt neste valg.



Dersom Overvåking av knappebruk er aktivert, og brukeren har en berøringsbasert tilgangsmåte, pass på at Vis topplinje-knappen også er aktivert. Se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.



Når du deler et Sidesett som inneholder bruksdata vil du få valget om å inkludere eller ikke inkludere bruksinformasjonen.

Aktiver Modelleringsmodus (kun nødvendig dersom tilgangsmåten er satt til Berøring, Klikk ved berøring, Klikk ved slipp eller ved bruk av Skjerm som bryter)



Dersom din nåværende tilgangsmåte inkluderer Pause tilgangsmåte-knappen i topplinjen velger du å pause



tilgangsmåten

før du begynner trinnene nedenfor. Gjenoppta tilgangsmåten



når du

går ut av Modelleringsmodus.



1. Klikk på **Datasporing**-knappen i Topplinjen.

For å aktivere Datasporing-knappen i Topplinjen, se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.

2. Aktiver **Modelleringsmodus**.

Når du er ferdig med å modellere, husk å deaktivere Modelleringsmodus.



Du kan også skru Modelleringsmodus av og på ved å holde inne (trykk og hold) på Datasporing-knappen i



topplinjen. Når Modelleringsmodus er aktivert ser Datasporing-knappen slik ut

. Når



Modelleringsmodus er deaktivert ser Datasporing-knappen slik ut


.

14.14.2 Vis topplinje-knapp



Når den er aktivert vil

Datasporing-knappen vises i Topplinjen. Datasporing-knappen i Topplinjen gir rask tilgang til de følgende innstillingene: Modelleringsmodus, Vis brukstallere for knapper, Vis modelleringstallere og Administrer data.

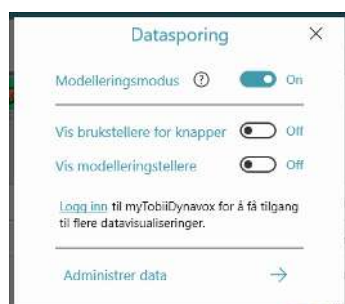

14.14.3 Vis brukstallere for knapper

Når denne er aktivert vil knapper vise et hvitt merke med antallet ganger knappen ble valgt av brukeren (mens Overvåking av knappebruk var aktivert) i den spesifiserte tidsperioden. Standard tidsperiode er All tid.

Aktiver Vis brukstallere for knapper (via Brukerinnstillinger)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg kategorien **Datasporing**.
4. Sett **Vis brukstallere for knapper** til På.



For å endre tidsperioden for brukstelling velger du **Tidsperiode**, og bruker deretter drop-down-menyen eller dato/tid-feltene for start og slutt.

Aktiver Vis brukstellere for knapper (via Datasporing-knappen i Topplinjen)



For å aktiviserer Datasporing-knappen i Topplinjen, se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.




1. Klikk på **Datasporing**-knappen i Topplinjen.
2. Aktiver **Vis brukstellere for knapper**.



For å aktiviserer Datasporing-knappen i Topplinjen, se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.



For å endre tidsperioden for brukstelling velger du **Tidsperiode**, og bruker deretter drop-down-menyen eller dato/tid-feltene for start og slutt.

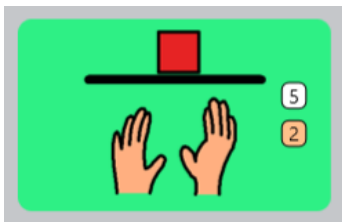

Illustrasjon 46: Knapp som viser brukstelling (hvit) og modelleringstelling (oransje).

14.14.4 Vis modelleringstellere

Når denne er aktivert vil knapper vise et oransje merke med antallet ganger knappen ble valgt i modelleringsmodus (mens Overvåking av knappebruk var aktivert) i den spesifiserte tidsperioden. Standard tidsperiode er All tid.

Aktiver Vis modelleringstellere (via Brukerinnstillinger)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg kategorien **Datasporing**.
4. Sett **Vis modelleringstellere** til På.



For å endre tidsperioden for modelleringstelling velger du **Tidsperiode**, og bruker deretter drop-down-menyen eller dato/tid-feltene for start og slutt.

Aktiver Vis modelleringstellere (via Datasporing-knappen i Topplinjen)



For å aktiviserer Datasporing-knappen i Topplinjen, se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.



1. Klikk på **Datasporing**-knappen i Topplinjen.
2. Aktiver **Vis modelleringstellere**.



For å endre tidsperioden for modelleringstelling velger du **Tidsperiode**, og bruker deretter drop-down-menyen eller dato/tid-feltene for start og slutt.

14.14.5 Administrer data

Tilbakestill brukstellere og modelleringstellere til null for den aktuelle siden, for Meldingslinje-knapper, Verktøylinje-knapper eller hele Sidesettet.



Tilbakestilling av brukstellere for knapper sletter ikke tidligere bruksdata. Dersom du ønsker å permanent slette alle bruksdata som har blitt lagret på din mytobiidynavox-konto, bruker du en nettleser for å gå til *mytobiidynavox.com* > *Snap* > *Bruksrapporter*.

Tilbakestill brukstellere (via Brukerinnstillinger)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **Bruker**.
3. Velg kategorien **Datasporing**.
4. Velg **Administrer data**.
5. Velg det området der du ønsker å tilbakestille brukstillerne for knapper og modellering til null.
6. Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille bruks- og modelleringstellere for det valgte området. For å avbryte tilbakestillingen, velg Avbryt.

Tilbakestill brukstellere (via Datasporing-knappen i Topplinjen)



For å aktivere Datasporing-knappen i Topplinjen, se avsnittet *14.14.2 Vis topplinje-knapp, side 116*.



1. Klikk på **Datasporing**-knappen i Topplinjen.
2. Velg **Administrer data**.
3. Velg det området der du ønsker å tilbakestille brukstillerne for knapper og modellering til null.
4. Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille bruks- og modelleringstellere for det valgte området. For å avbryte tilbakestillingen, velg Avbryt.

15 Systeminnstillinger

15.1 Valg

15.1.1 Passord

Når dette er aktivert, må man angi et firesifret passord for å få tilgang til kjøp i appen og de spesifiserte funksjonene i topplinjen. Aktivering av passord kan bidra til å forhindre uautoriserte endringer på Sidesettet og innstillingene.

Aktiver passord



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Passord**.
4. Angi Bruk Passord-bryteren til **På**.
5. Angi en firesifret kode som bare du kan, og som ikke er lett å gjette.

6. Angi passordet igjen for å bekrefte det.
7. Når du aktiverer Bruk passord, er passord aktivert for kjøp i appen, redigeringsmodus, synkronisering, datasporing, søkemodus, lypspære og navigasjonsknappene på topplinjen (Tilbake, Hjem og Instrumentpanel) som standard. Bytt om innstillingen for hvilken som helst av disse til Av dersom du ønsker å ha dem tilgjengelige uten et passord. Dersom Passord er aktivert og passord for Synkronisering er deaktivert vil Synkroniser kun operere i Kun-trekk-modus. Når du synkroniserer i Kun-trekk-modus vil du motta Sidesett-endringer (gjort på andre enheter) men du vil ikke sende noen Sidesett-endringer gjort på den gjeldende enheten.
8. Når du går ut av Redigeringsmodus vil passordet kreves for tilgang til kjøp i appen og alle funksjonene som er slått på i menyen for passordpreferanser.



Dersom du allerede har passord aktivert kan du tilbakestille passordet ved å velge



Rediger-

knappen. Glemmer du passordet, kan du bruke masterpassordet (0520) for å få tilgang til Redigeringsmodus og umiddelbart tilbakestille passordet.

15.1.2 Skjerminnstilling (Kun Windows)

Når Fullskjermmodus er aktivert vil TD Snap®-programvaren fylle hele skjermen på enheten din. Når Fullskjermmodus er deaktivert vil TD Snap®-programvaren kjøres inne i et justerbart vindu.

15.1.3 Språk for Redigeringsmodus

Velg et språk for grensesnittet i Redigeringsmodus.

15.2 Enhet



Funksjonene i avsnittet Enhet er kun tilstede på Tobii Dynavox I-13-, I-16- og TD Pilot-enheter.

15.2.1 Innstillinger for partnervindu

Partnervinduet er en skjerm på baksiden av Tobii Dynavox I-13-, I-16- og TD Pilot-enheter. Partnervinduet informerer samtalepartneren om at brukeren forbereder seg på å si noe, og viser tekst som partneren kan lese.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Enhet**.
4. Gjør et valg i Alternativer for partnervindu:
 - **Vis meldingsvindutekst** – vis meldingsvinduteksten i partnervinduet i sanntid.
 - **Vis tekst som leses opp** – vis tekst i partnervinduet kun når den leses opp. Når du skriver i meldingsvinduet vil partnervinduet vise en rekke med prikker, for å indikere at brukeren forbereder meldingen sin. Når meldingsvinduet leses opp, blar partnervinduet nedover i teksten idet den leses opp.Partnervinduet viser kun tekst. Det viser ikke symboler.
5. Gjør et valg i Indikatorstil for partnervindu:
 - **Speil** – vis en miniatyrversjon av partnervinduet i topplinjen.
 - **Ikon** – vis et ikon når partnervinduet er slått på. Skjul ikonet når partnervinduet er slått av.
6. Angi Partnervindu av/på til **På** eller **Av**. Partnervinduet viser ingen tekst når det er satt til Av.



Du kan også bruke knappehandlinger til å kontrollere partnervinduskjermens lysstyrke og for å slå partnervinduet av og på. Se avsnittene 9.6.2 *Aktivt innhold*, side 38 og 9.7 *Knappehandlinger*, side 46.

15.3 Butikk

Kjøp produkter (kun iPadOS) og administrer din aktiveringsnøkkel.

Merk: Hvis du bruker en Windows-enhet, kan du gjennomføre kjøp ved å ringe kundestøtte hos Tobii Dynavox. <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

15.3.1 Gjennomføre et kjøp (kun iPadOS)



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Butikk**.
4. Velg **Kjøp** på produktet du ønsker å kjøpe.
5. Fullfør den sikre transaksjonen.



En internettkobling kreves for å gjennomføre kjøp i butikken.

15.3.2 Gjenopprett kjøp (kun for Windows)

Dersom produktene du har kjøpt ikke vises i Windows-versjonen av TD Snap®-appen, kan du gjenopprette kjøpene dine med aktiveringsnøkkelen din.

 En internettilkobling kreves for å gjenopprette kjøp.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Butikk**.
4. Velg **Gjenopprett kjøp**.
5. Skriv inn din **aktiveringsnøkkel**.
6. Velg **Ferdig**.

15.3.3 Deaktiver nøkkel (kun for Windows)

Fjern aktiveringsnøkkelen din fra den gjeldende Windows-enheten slik at den kan brukes på en annen enhet.



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Butikk**.
4. Velg **Deaktiver nøkkel**. En bekreftelsesdialogboks åpnes.
5. Bekreft at du ønsker å deaktivere nøkkelen din på denne enheten.

15.4 Symbolsett

15.4.1 Søkinnstillinger

Når Sikker symbolsøk er aktivert vil eksplisitte symboler ikke vises i symbolsøk, i meldingsvinduet (symbolert) eller i Søkemodus. Når Sikker symbolsøk er deaktivert vil symbolsøk, symboler i meldingsvinduet, og Søkemodus bruke alle tilgjengelige symboler.

15.4.2 Installerte og nedlastbare symboler

Symbolsettene som er listet i Installerte symboler er de Symbolsettene som per i dag er installerte og tilgjengelige på enheten din.

For å slette et installert Symbolsett velger du  **Slett**-knappen, og velger så **Slett** for å bekrefte.

 Snap Core-symbolene kan ikke slettes.

Symbolsettene som er listet i Nedlastbare symboler er de gratis Symbolsettene som per i dag ikke er installerte på enheten din. For å laste ned og installere et gratis Symbolsett velger du **Last ned** ved siden av det ønskede Symbolsettet.

 Du må ha en aktiv internettilkobling for å laste ned Symbolsett.

 Noen tredjeparts Symbolsett er kun tilgjengelige for kjøp via butikken. Se avsnittet *15.3 Butikk, side 120*.

15.4.3 Endre rekkefølge på Symbolsett


Rekkefølgen på symbolsøkeresultater avhenger av rekkefølgen på symbolsettene som er i listen over Installerte symboler. Dersom du for eksempel bruker mest av høykontrast-symboler i Sidesettet ditt kan du flytte Høykontrast-symbolsettet til toppen av listen over Installerte symboler, for å prioritere høykontrast-symboler i symbolsøk (når de er tilgjengelige).



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg kategorien **Symbolsett**.



4. Velg og hold inne ikonet for et symbolsett i listen Installerte symboler.
5. Dra symbolsettet til en ny plassering i listen.

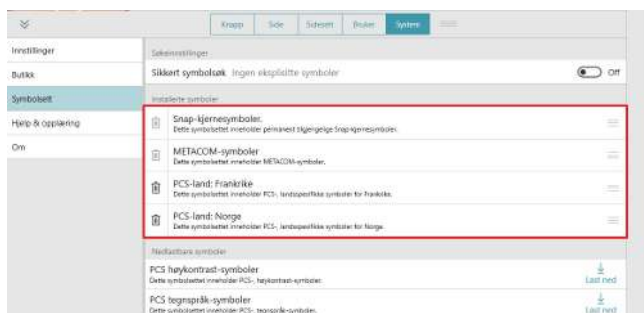

15.5 Hjelp & opplæring

15.5.1 Videoer

Se videoer for å lære mer om bruk av TD Snap®.

15.5.2 Pathways for Core First

	Pathways for Core First er gratisappen som lærer deg de mest effektive og kraftfulle metodene for bruk av TD Snap® Core First til kommunikasjon, lese- og skriveferdigheter, adferdsstøtte og mer! Følg koblingene i denne delen for å lære mer.
---	--

15.5.3 Hurtigomvisning

Start hurtigomvisningen på nytt for å bli bedre kjent med TD Snap®-programvaren.

15.5.4 Ekstern hjelp

Få tilgang til brukermanualen, opplæringskort, ytterligere videoer, den nettbaserte kunnskapsbasen og lisensavtalen for sluttbrukere.

15.6 Om

Versjonsopplysninger om TD Snap®.

15.6.1 Send tilbakemelding

Bruk Send tilbakemelding-knappen for å rapportere et problem med TD Snap® eller sende inn en funksjonsforespørsel til utviklingsteamet. Dette er ikke en live chat eller en teknisk støttelinje.

15.6.2 Programvareoppdateringer



Kun gyldig for Windows

TD Snap®-applikasjonen oppdateres automatisk i regelmessige intervaller.

For å manuelt se etter en ny versjon og laste ned oppdateringen:



1. Velg **Rediger**-knappen.
2. Velg fanen **System**.
3. Velg **Om**-kategorien.
4. Dersom en oppdatering er tilgjengelig, vil den vises under EAN-nummeret. For å få den oppdaterte versjonen velger du **Installerer oppdatering**.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene våre på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt din hjelpemiddelkonsulent eller forhandler

Kontakt din Tobii Dynavox-hjelpemiddelkonsulent eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål eller problemer med produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.