

Sada stránek TD Snap® Core First

Tréninkové karty



Obsah

1	Často kladené dotazy
2	Glosář TD Snap® Core First
4	Začněme je používat!
6	Aktivity: Čtení knihy
6	Aktivity: Hraní her
7	Aktivity: Sledování sportu
7	Aktivity: Návštěva restaurace
8	Používání Google Assistant s TD Snap®
10	Úprava vizuální podpory
11	Změna velikostí mřížky
12	Dodatečná podpora

Často kladené dotazy

Co je to Core First?

Core First je sada nástrojů komunikace, které umožňují jednotlivcům komunikovat účinným a přesným způsobem. Úroveň obtížnosti sady stránek roste s uživatelem a lze ji snadno přizpůsobit. Je založena na základních slovech, malém souboru flexibilních slov, která tvoří zhruba 80 % ze slov, která používáme v mnoha každodenních situacích.

Jaký je účel všech různých nástrojů?

Nástroje v Core First společně podporují zapojení (nástroje Témata, Podpora a Rychlé zprávy), gramotnost (nástroje Jádru, Seznamy slov a Klávesnice) a růst (různé velikosti mřížky).

Jaké jsou výhody vizuální podpory?

Vizuální podpora pomáhá jednotlivcům vědět, co se děje během aktivity, porozumět očekáváním a usměrnit se. Podpora v Core First zahrnuje: Nejprve-Pak, Harmonogram Mini, Příběh ze života, Scénáře a Vizuální hodiny. Vizuální podporu naleznete na každé stránce Témat.

Jak funguje nástroj Témata?

Témata podporují interakce v konkrétních prostředích nebo v souvislosti s konkrétními tématy. Jedná se především o zprávy založené na frázích, které jednotlivci umožňují komunikovat rychle a efektivně. Doporučujeme v tématech mít jen takové zprávy, které jsou pro uživatele smysluplné, aby komunikace byla co nejúčinnější.

Témata umožňují jednotlivcům zapojit se do smysluplných konverzací a ukázat, co vědí, ještě více, než dovolují jejich současné jazykové dovednosti a gramotnost.

Jak funguje Panel nástrojů?

Panel nástrojů umožňuje přístup ke všem různým nástrojům komunikace, které mohou být potřebné na každé stránce. Tlačítka můžete skrýt nebo přidat na panel nástrojů.


Jak mohu rozšířit slovní zásobu?

Existují dva různé způsoby, jak rozšířit slovní zásobu v Core First. Prvním je zvětšit velikost mřížky. Slovní zásoba zůstává na relativně stejném místě, ale možná budete muset provést nějaké úpravy. Dalším způsobem, jak rozšířit slovní zásobu, je začít s větší velikostí mřížky, než si myslíte, že je potřeba, a skrýt tlačítka. Jak se jedinec zdokonaluje, můžete odkrýt tlačítka, abyste rozšířili jeho slovní zásobu.

Glosář TD Snap® Core First


Jádro

Malá skupina často používaných slov, kterou lze kombinovat pro vytvoření jedinečných zpráv.

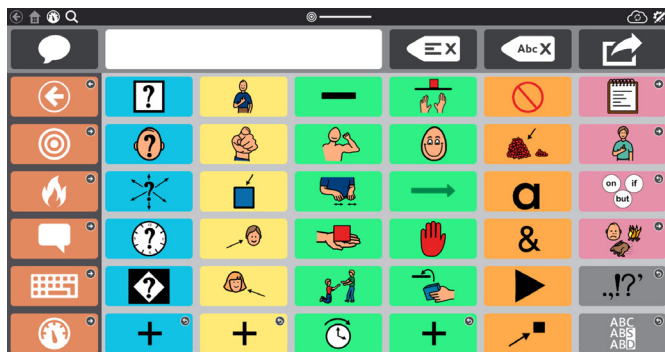

Rychlé zprávy

Krátká slova a fráze, které se používají v každodenním prostředí k udržení konverzace, získání pozornosti nebo komentářů.

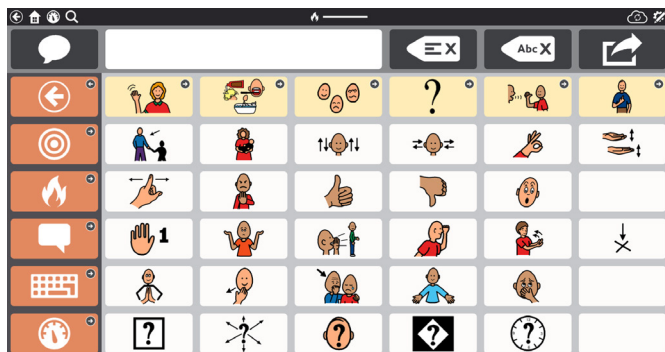


Témata

Předem uložené zprávy, uspořádané podle komunikačního záměru, související s konkrétní situací nebo prostředím.




Panel nástrojů

Panel nástrojů je místo, kde jsou umístěny všechny nástroje komunikace. Můžete zde najít nástroje jako Jádro, Témata a Rychlé zprávy.

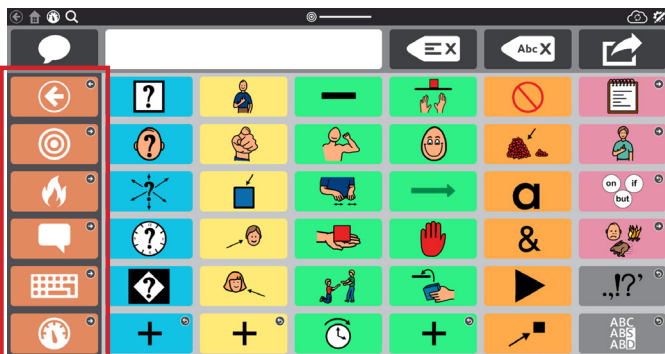

Seznamy slov a Slova z tématu

Seznamy slov jsou uspořádány podle kategorií (např. jídlo, mazlíčci atd.). Slova z tématu jsou uspořádána podle kategorií a vztahují se k určitému tématu.

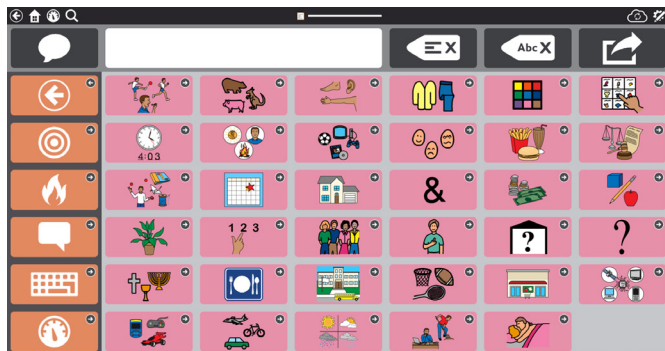



Podpora

Podporu najdete v každém tématu. Pomáhá jednotlivcům se seberegulací tím, že očekávání jsou konkrétnější, trvalejší a jasnější.

Nejprve...Pak

Ukazuje jedinci, co se stane jako první a co bude potom.



Harmonogram Mini

Ukazuje pořadí malého souboru aktivit.




Příběh ze života (Scénář)

Příběhy, které popisují situaci a ukazují, jak se může dotyčná osoba cítit a jak se s tím vypořádat pozitivním způsobem.


Vizuální hodiny

Ukazují, kolik času zbývá do konce aktivity.

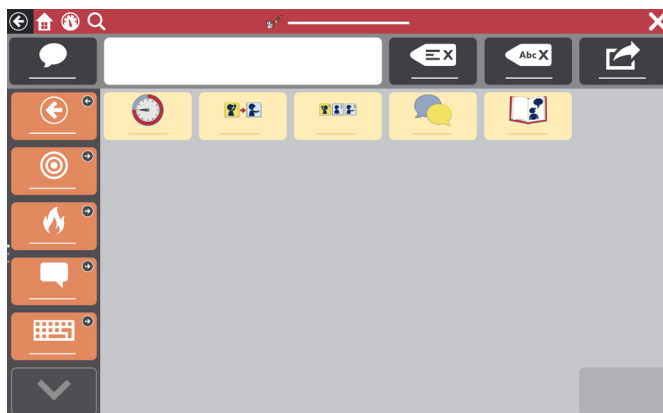

Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje ovládací prvky zařízení, jako je hlasitost a dálkové ovládání. Můžete k nim přistupovat z panelu nástrojů.

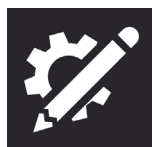

Nástroj pro úpravy

Provádí změny obsahu nebo nastavení.

Začněme je používat!



Na následujících stránkách najdete několik aktivit, které vám pomohou začít. Vyberte aktivity, které jsou motivující a vždy zaujmou. Aktivitu klidně opakujte, protože opakování podporuje učení. Nezapomeňte použít níže uvedené strategie, abyste byli dobrým komunikačním partnerem a vytvořili prostředí pro úspěšnou komunikaci.



Rozpoznávejte příležitosti

Identifikujte časy během dne, kdy se jednotlivec může učit a procvičovat komunikační dovednosti. Například mu pomozte používat TD Snap® ke sdělení jeho výběru svačiny nebo filmu, který chce sledovat.



Vytvořte pozitivní komunikační prostředí

Osvojte si tyto přístupy a strategie, které podporují komunikaci.

■ **Dejte najevo, že věříte v úspěch**

„Vím, že to dokážeš.“

■ **Zaměřte se na použití, ne testování**

Místo toho, abyste řekli „Obstarej si knihu“. Řekněte: „Je čas na čtení. Jakou knihu bychom si měli přečíst?“

■ **Reagujte na všechny způsoby komunikace**

Žák: Usmívá se na vás. Partner: „Taky tě zdravím!“

■ **Počkejte**

Partner počítá do pěti, teprve potom pomůže s nalezením slova.



Modelujte AAK

Modelování se ukázalo jako nejlepší způsob, jak naučit lidi komunikovat pomocí AAK. Modelování zahrnuje dotyk a používání zařízení, když s uživatelem komunikujete.

- Modelování je o tom, že dotyčnému ukážete, jak komunikovat.
- Nevyžaduje imitaci.
- Modelujte jen klíčová slova, není třeba modelovat každé slovo, které řeknete.
- Modelujte při hledání slovní zásoby.
- Dělat chyby je v pořádku. Dávají vám možnost modelovat způsob jejich opravy.
- Modelování není kvíz ani testování.



Podívejte se na video s ukázkou modelování.

qrco.de/bbA7Ur



Oceňte jakýkoli úspěch

Úspěšná komunikace je víc než to, že dotyčná osoba sděluje, co očekáváte, kdy to očekáváte, a způsob, kterým to očekáváte.

Úspěch může zahrnovat:

- Zvýšenou pozornost vůči interakcím
- Zahájení komunikace
- Použití větší slovní zásoby
- Delší interakce
- Větší potěšení z interakcí
- Více nezávislosti v komunikaci

Nedělejte tyto začátečnické chyby!

- Nemusíte budovat něco od základů. Vytvořili jsme základ. Nejprve se seznámte s tím, co je v TD Snap® Core First, a poté je přizpůsobte uživateli.
- Nevytvírejte příliš velký tlak na sebe ani uživatele.
- Přesné provedení každého úkolu hned napoprvé není reálné. Je v pořádku dělat chyby.



Aktivity: Čtení knihy



Materiály

- Téma TD Snap® Core First Reading Topic
- Oblíbená kniha

Příprava

Vyberte Témata na panelu nástrojů. Před zahájením aktivity vyhledejte témata čtení a projděte si slovní zásobu.



Kroky


- 1 Představte knihu a ukažte její obal. Proberte, o čem kniha bude.
- 2 Přečtěte si každou stránku a zastavte se na konci, abyste umožnili diskuzi.
- 3 Při čtení se zastavte, pronášejte komentáře a ptejte se (např. Co si o tom zatím myslíš? Je to strašidelné? Myslím, že chlapec se bál.).
- 4 Po dočtení knihy uživatele nezkoušejte, místo toho se zeptejte, jak se cítil nebo co si o příběhu myslel.

Užitečné tipy

- Pokud je v příběhu opakující se věta a na stránce máte prázdné tlačítko, naprogramujte větu na tlačítko.
- Stiskněte tlačítko vždy, když se objeví opakovaná věta.
- Zprávy jako „Otoč stránku“ a „Přečti si to znovu“ jsou již na zařízení naprogramovány.
- Vyjadřujte se ke všemu, na co se dítě v okolí dívá a/nebo na co ukazuje. Po dokončení zdůrazněte, jak skvěle s vámi komunikovalo.
- Prohlédněte si knihu znovu a zaměřte se na obrázky. Všimněte si slov v zařízení, která odpovídají obrázkům a modelujte tím, že je zvolíte.



Aktivity: Hraní her

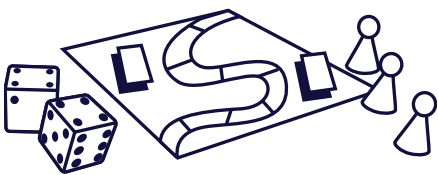

Materiály

- Téma Hry TD Snap® Core First
- Oblíbená stolní nebo karetní hra

Nápady na hry

Najdi rybu, žolíky, bingo, pexeso, člověče nezlob se

Příprava

Vyberte Témata na panelu nástrojů. Před zahájením aktivity najděte téma Hry a projděte si slovní zásobu.



Kroky


- 1 Představte hru a projděte si pravidla, pokud jste ji ještě nehráli.
- 2 Začněte hrát hru pomocí slovní zásoby, kterou jste si prohlédli.
- 3 Hru přerušujte a komentujte, jak probíhá.
- 4 Po skončení hry si udělejte čas na komentáře.

Užitečné tipy

- Podívejte se do složky Herní slova pod Slova z tématu, kde najdete další slovní zásobu.
- Zprávy jako „Jsem na řadě“, „Hrát znovu“ a „Tato hra se mi nelíbí“ jsou již naprogramovány na zařízení.
- Nechte uživatele, aby sledoval tah každého hráče (můj tah, tvůj tah) výběrem příslušných tlačítek.



Aktivity: Sledování sportu

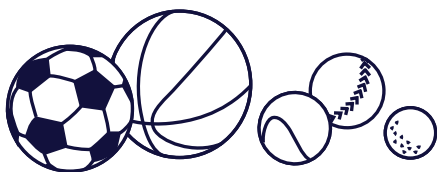

Materiály

- Téma Sport TD Snap® Core First
- Oblíbená sportovní událost

Příprava

Vyberte Témata na panelu nástrojů. Před zahájením aktivity najděte téma Sport a projděte si slovní zásobu.



Kroky


- 1 Představte sportovní událost, kterou sledujete, a prohlédněte si, jaké týmy hrají.
- 2 Předved'te, jak se ve Snapu pohybovat a během hry aktivovat tlačítka se zábavnými komentáři.
- 3 Po dokončení aktivity oceňte všechny úspěšné pokusy o komunikaci (např. „Moc se mi líbilo, jak jsi ukázal na míč, abys vyjádřil, že se ti to líbilo.“).

Užitečné tipy

- Pomocí tlačítka Upravit přidejte svůj oblíbený tým k tlačítku s nápisem „Oblíbený tým []“.
- Zprávy jako „Hraje se dnes?“, „Miluji tento tým“ a „Nemám je rád“ jsou již naprogramovány na zařízení.
- Pokud máte prázdné tlačítko, naprogramujte pro svůj tým zábavné povzbuzování.



Aktivity: Návštěva restaurace

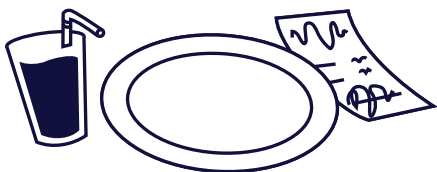

Materiály

- Téma Restaurace TD Snap® Core First
- Oblíbená restaurace

Příprava

Vyberte Témata na panelu nástrojů. Před zahájením aktivity najděte téma Restaurace a projděte si slovní zásobu.



Kroky

- 1 Diskutujte o tom, zda jít do restaurace.
- 2 Můžete začít modelovat slovní zásobu ještě předtím, než se dostanete do restaurace. Například vyberte tlačítko „Pojďme na večeři“.
- 3 Jakmile jste v restauraci, modelujte se zařízením po celou dobu večeře.
- 4 Jakmile dojdíte, oceňte všechny úspěšné pokusy o komunikaci. (např. „Když jsi stiskl tlačítko „více“, věděl jsem, že ti mám podat rohlíky!“).

Užitečné tipy

- Zprávy jako „Můžeme jít na jídlo do restaurace?“ a „Miluji toto místo“ jsou již naprogramovány v zařízení.
- Povzbud'te všechny u stolu, aby se zapojili, včetně obsluhy.



Používání Google Assistant s TD Snap®


Stránky Google Assistant dostupné v TD Snap® jsou uspořádány podle funkcí. Tlačítka na těchto stránkách vám umožňují každodenní správu úkolů, přehrávat hudbu, klást otázky a dokonce ovládat vaši domovskou stránku pomocí Google Assistant.

Chcete-li najít stránky Google Assistant v TD Snap®:

- 1 Vyberte **Ovládací panel** na panelu nástrojů.



- 2 Vyberte **Google Assistant**.

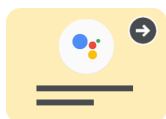

Ikony označují zařízení, které potřebujete k použití tohoto tlačítka.



Není potřeba další hardware.



Vyžaduje se zařízení Google Nest mini nebo reproduktor podporující Google Assistant.



Vyžaduje se chytrá zásuvka, žárovka a/nebo termostat.

Tipy jak uspět:

- Přehrávání hudby velmi nahlas může ztížit vypnutí hudby nebo zadávání jakýchkoli příkazů.
- Pokud při odesílání příkazu Google neobdržíte očekávanou odpověď, zkuste jiné znění nebo buďte konkrétnější.
Příklady: Pokud příkaz „Ok Google, zapni světlo“ nefungoval, zkuste příkaz „Ok Google, zapni světlo v obývacím pokoji“.
- Nezapomeňte, že když používáte externí reproduktor Google, musíte před příkazem říct „Ok Google“.
- Ujistěte se, že máte způsob, jak zavolat pomoc, a záložní systém pro funkce domácí automatizace.
- Hry fungují nejlépe, když nevyžadují konkrétní reakce a poskytují dostatek času na reakci.

Časté otázky týkající se Google Assistant

Potřebuji aplikaci Google Home?

Ano, pokud jste si zakoupili další vybavení (např. Google Nest Mini, chytré zásuvky atd.), budete na svém telefonu nebo tabletu potřebovat aplikaci Google Home.

Potřebuji účet Google?

Ano, k používání Google Assistant potřebujete bezplatný účet Google. Musíte propojit svůj účet Google s TD Snap® (*Upravit>Uživatel>Připojit ke Google*).

Můžu poslouchat hudbu?

Ano, musíte používat externí reproduktor Google (např. Google Nest Mini, Google Home Nest atd.) a zajistit, aby bylo zařízení slyšet i přes hudbu.

Můžu ovládat světla v mé domácnosti?

Ano, se správným vybavením můžete ovládat světla ve vaší domácnosti.

Mám doma chytrý spotřebič. Můžu jej ovládat pomocí Google Assistant?

Ano. Podrobné informace naleznete v příručce dodané s chytrým spotřebičem.

Můžu používat Google Assistant pro tísňová volání?

Ne. Google Assistant NEZAVOLÁ záchranné služby.

Jak kontaktuji podporu?

V případě problémů se softwarem TD Snap® kontaktujte technickou podporu společnosti Tobii Dynavox.

V případě problémů s chytrým zařízením přejděte na webovou stránku výrobce.

Odstraňování problémů s podporou Google

qrco.de/GoogleAssistantExplore

qrco.de/GoogleAssistantHelp

qrco.de/GoogleNestHelp



Přečtěte si celou příručku Google Assistant pro TD Snap®.


qrco.de/gatdsa

Úprava vizuální podpory


- 1 Vyhledejte stránku Podpora, která obsahuje vizuální podporu, kterou chcete upravit.



- 2 Vyberte **Upravit**.

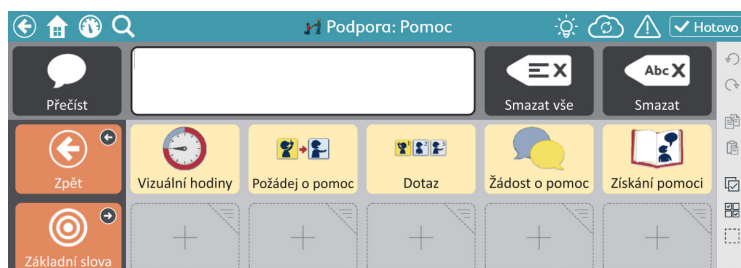


- 3 Vyberte tlačítko podpory, které chcete upravit.

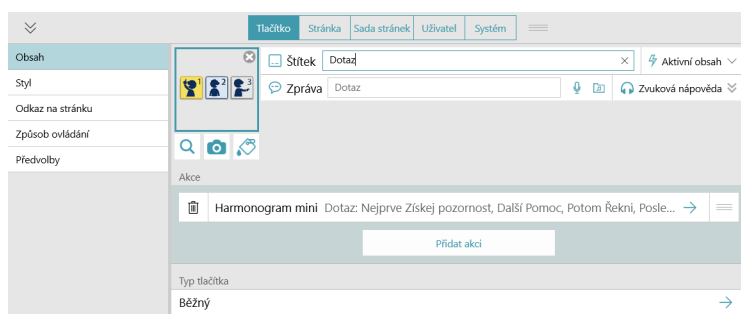

- 4 Vyberte akci (Harmonogram Mini, Vizuální hodiny, Nejprve pak nebo Scénář).

- 5 Pro provedení změn vyberte ikonu tužky v libovolném řádku.

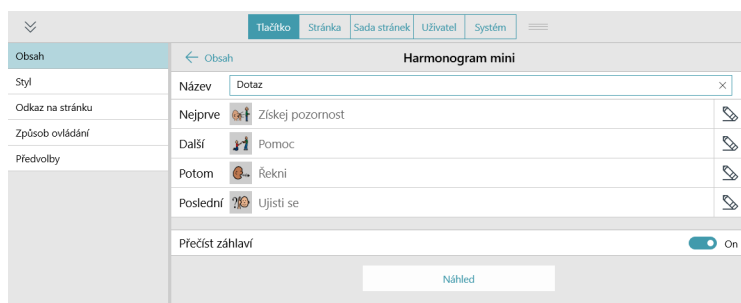

- 6 Pro zobrazení náhledu změn v podpoře chování vyberte tlačítko **Náhled** v dolní části panelu úprav podpory.

- 7 Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.


Změna velikostí mřížky

Doporučujeme upřednostnit schopnost uživatele přesně zvolit tlačítka. Fyzický přístup ke komunikačnímu zařízení vyžaduje praxi. Začněte s menší velikostí mřížky. Když si uživatel na používání zařízení zvykne, může být schopen přejít na větší velikosti mřížky. Změna velikosti mřížky je snadná a sada stránek TD Snap® Core First je navržena tak, aby umístění slovní zásoby zůstalo stejné při různých velikostech mřížky.

- 1 Vyberte tlačítko **Upravit**.



- 2 Vyberte záložku **Sada stránek**.

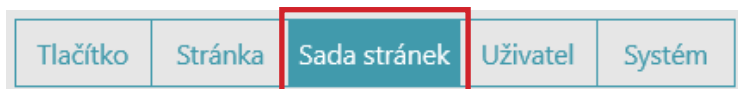


- 3 Vyberte **Velikost mřížky**.



- 4 Vyberte si z optimalizovaných velikostí mřížky.

- 5 Vyberte **Hotovo**.

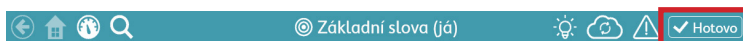

Naskenujte tento kód a podívejte se na krátké video o změně velikosti mřížky.

qrco.de/bbA7X9

Dodatečná podpora



Stránka podpory TD Snap®

qrco.de/SnapHelp



Komunita TD na Facebooku

qrco.de/TDFB



Technická podpora

Pro technickou podporu kontaktujte
místního partnera.

qrco.de/csczAAC

Naučte se upravovat tlačítka, zálohovat a sdílet sady stránek a používat další funkce TD Snap®:



**Tréninkové karty TD Snap®
Basics**

qrco.de/sbtcCZ



Návod k použití TD Snap®

qrco.de/tdsumCZ



**Výukové centrum Tobii Dynavox
(pouze v angličtině)**

learn.tobiidynavox.com